

Compat[®] Adapter

Compat[®] Adapter ENFit[®] till oral/Luer-spruta

Compat[®] Adaptern ENFit[®] till oral/Luer-spruta är avsedd för att ansluta en enteral oral-, Luer- eller ENLock-spruta till ett enteralt administreringsset utrustat med en ENFit[®]-läkemedelsport. Den är även avsedd för användning med en sond med ENFit[®]-anslutning.

Kortfattad beskrivning

Compat[®] Adaptern ENFit[®] till oral/Luer-spruta placeras mellan sonden och sprutan eller mellan läkemedelsporten och sprutan.


Lätt att använda: Compat[®] Adaptern ENFit[®] till oral/Luer-spruta är utformad för att underlätta övergången till ENFit[®] genom att möjliggöra kompatibilitet mellan ENFit[®]-medicinportar och sondmatningsslangar med äldre sprutor.

Säkrare anslutningar: Compat[®] Adaptern ENFit[®] till oral/Luer-spruta har en ENFit[®]-anslutning i enlighet med ISO 80369-3. ENFit[®] är utformad för att vara IV-inkompatibel för att främja patientsäkerheten genom att hjälpa till med att undvika oavsiktliga felkopplingar.

Säkra material: Compat[®] Adaptern ENFit[®] to oral/Luer Spruta är steril, DEHP-, BPA- och latexfri*.

Kompatibilitet:

- Enterala sonder: ENFit[®]
- Läkemedelsport: ENFit[®]
- Sprutor: ENLock, oral, Luer

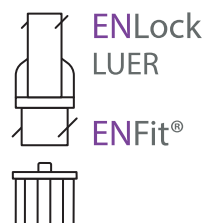


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Antal/Förpackning
Compat [®] Adapter ENFit [®] till oral/Luer-spruta	12459535	30 st.

Patientvård. Vår prioritet.

Compat® Adapter ENFit® till oral/Luer-spruta

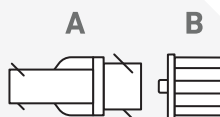

Komponenter

- A Oral/Luer-adapter
- B Avtagbart lock

Specifikationer

Sterilisering:	Steriliserade med Etylenoxid (EO).
Förpackning:	Individuellt förpackade i lådor om 30 st (11,5 x 9,5 x 9 cm).
Förvaring:	Förvaras i rumstemperatur. Förvaras skyddat mot solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatumet. Utgångsdatum på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
ISO-standard:	ENFit®-koppling tillverkad enligt ISO 80369-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med det europeiska direktivet om medicintekniska produkter 93/42 EEG. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass Is.
Laglig tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italien.
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller kraven i ISO 14001:2015.
Material:	Alla material är DEHP-, BPA- och latexfria*. Extra detaljer på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*DEHP: Har inte lagts till med avsikt under tillverkningsprocessen. Ej utformad med BPA eller naturgummilates.

För mer information genom att kontakta din Compat®-representant eller gå till www.compat.com

*Om inte annat anges används alla varumärken med tillstånd.

Detta dokument ersätter inte den ursprungliga bruksanvisningen som måste läsas före användning.

AXI01535 REVO 15 JANUARI 2026

Compat®