

# Compat<sup>®</sup> Buddy

## Gamme Complète de Boutons de Gastrostomie

Le bouton de gastrostomie à ballonnet Compat<sup>®</sup> Buddy est destiné aux patients qui requièrent une administration entérale intermittente ou continue de nutriments, de liquides ou de médicaments en site gastrique. Il convient également à la décompression gastrique.

### Aperçu des Caractéristiques


Le bouton Compat<sup>®</sup> Buddy est disponible dans un large choix de tailles (12/14/16/18/20/24 FR), de longueurs (0.8 à 6.5 cm) et 2 configurations de kits pour répondre à la plupart des besoins des patients et des exigences cliniques.

#### Confort du Patient :

- Sonde en silicone souple biocompatible et ballonnet en silicone haute résistance pour favoriser une durée d'utilisation maximale et limiter le remplacement du bouton.
- Extrémité distale entièrement recouverte pour préserver la paroi de l'estomac.
- Solution discrète et confortable pour offrir plus de liberté de mouvement au patient.

**Facilité d'Utilisation :** Le bouton Compat<sup>®</sup> Buddy est fourni dans deux kits différents. Le kit Compat<sup>®</sup> Buddy contient de nombreux accessoires ENFit<sup>®</sup> pour un remplacement facile et pratique du bouton/sonde de gastrostomie. Le kit Compat<sup>®</sup> Buddy Compact offre une solution écologique avec des accessoires essentiels. Tous les kits sont livrés dans un emballage individuel stérile avec deux étiquettes détachables pour améliorer la traçabilité.

**Sécurité des Matériaux :** Exempt de DEHP, de BPA et de latex\*.

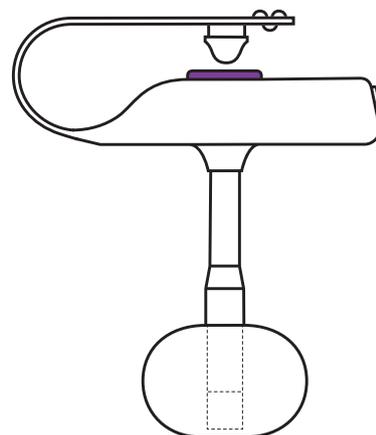

### Gamme de Boutons de Gastrostomie

Longueur (mm)	8	10	12	15	17	20	23	25	27	30	35	40	45	50	55	60	65	
Charrière (FR)	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

# Gamme Complète de Boutons de Gastrostomie

## Contenu des Kits

Compat® Buddy Kit	Compat® Buddy Compact Kit
Bouton de Gastrostomie Compat® Buddy	Bouton de Gastrostomie Compat® Buddy
2 Prolongateurs ENFit®	Seringue Luer 10 mL
Seringue ENFit® 35 mL	Mandrin
Seringue Luer 10 mL	Lubrifiant Hydrosoluble
Mandrin	2 Compresses de Gaze
Lubrifiant Hydrosoluble	
2 Compresses de Gaze	

## Informations de Commande


### Compat® Buddy Kit

Longueur stomie (cm)	Charrière					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0.8	12466557	12466601	12466635	12466759	12466828	12466844
1.0	12466535	12466577	12466642	12466795	12466835	12466864
1.2	12466544	12466600	12466636	12466784	12466841	12466847
1.5	12466321	12460325	12466761	12466785	12466836	12466870
1.7	12466556	12460330	12460320	12466798	12466815	12466865
2.0	12466534	12460327	12460341	12466823	12466842	12466846
2.3	12466543	12466568	12466745	12466824	12466817	12466856
2.5	12466555	12460342	12460352	12466825	12466837	12466871
2.7	12466554	12466576	12466719	12466805	12466818	12466857
3.0	12466561	12466589	12460347	12466830	12466838	12466869
3.5	12466560	12460331	12466752	12466806	12466839	12466868
4.0	12466551	12466620	12466753	12466826	12466863	12466859
4.5	12466528	12466598	12466770	12466807	12466862	12466890
5.0	12466527	12466621	12466762	12466808	12466852	12466892
5.5		12466616		12466811		
6.0		12466632		12466809		
6.5		12466626				

### Compat® Buddy Compact Kit

Longueur stomie (cm)	Charrière					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0.8	P00109	P00123	P00140	P00154	P00170	P00184
1.0	P00110	P00124	P00141	P00155	P00171	P00185
1.2	P00111	P00125	P00142	P00156	P00172	P00186
1.5	P00112	P00126	P00143	P00157	P00173	P00187
1.7	P00113	P00127	P00144	P00158	P00174	P00188
2.0	P00114	P00128	P00145	P00159	P00175	P00189
2.3	P00115	P00129	P00146	P00160	P00176	P00190
2.5	P00116	P00130	P00147	P00161	P00177	P00191
2.7	P00117	P00131	P00148	P00162	P00178	P00192
3.0	P00118	P00132	P00149	P00163	P00179	P00193
3.5	P00119	P00133	P00150	P00164	P00180	P00194
4.0	P00120	P00134	P00151	P00165	P00181	P00195
4.5	P00121	P00135	P00152	P00166	P00182	P00196
5.0	P00122	P00136	P00153	P00167	P00183	P00197
5.5		P00137		P00168		
6.0		P00138		P00169		
6.5		P00139				

# Gamme Complète de Boutons de Gastrostomie

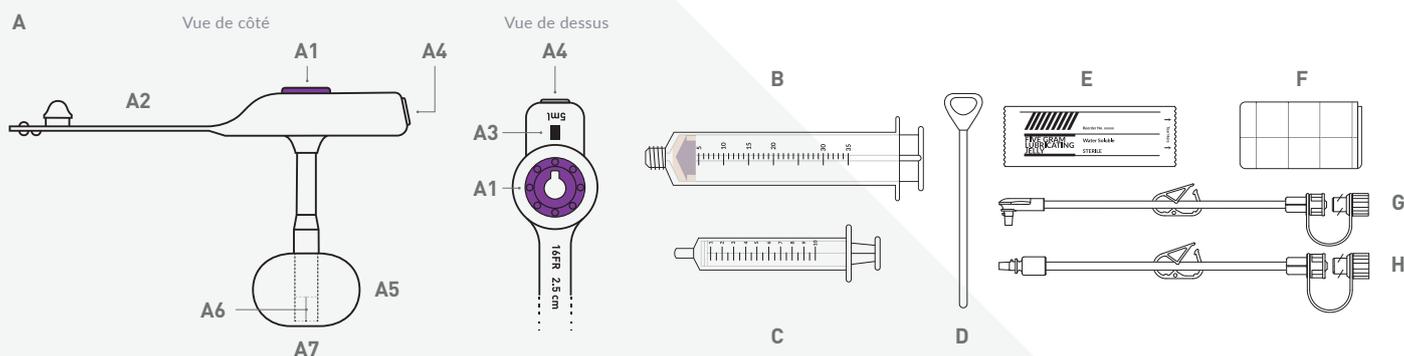

## Composants

- A** Bouton de gastrostomie Compat<sup>®</sup> Buddy  
**A1** Port de nutrition violet avec valve anti-reflux. Compatible avec prolongateurs droits et coudés  
**A2** Bouchon avec indication de la taille en charrière (FR : French) et de la longueur du bouton  
**A3** Repère de position pour le prolongateur  
**A4** Valve de gonflage avec connecteur Luer et indication du volume du ballonnet en mL

Taille et volume du ballonnet						
Charrière (FR)	12	14	16	18	20	24
Volume de remplissage recommandé (mL)	3.0	4.0	5.0	5.0	8.0	8.0
Volume de remplissage max. (mL)	5.0	6.0	7.0	7.0	12.0	12.0

- A5** Ballonnet en silicone haute résistance  
**A6** Repère radio-opaque pour le placement par voie radiographique et contrôle de la position  
**A7** Extrémité distale entièrement recouverte

- B** Seringue ENFit<sup>®</sup> 35 mL compatible avec prolongateurs ENFit<sup>®</sup>  
**C** Seringue Luer pour le gonflage du ballonnet  
**D** Mandrin  
**E** Lubrifiant hydrosoluble  
**F** Compresse de gaze (2 unités)  
**G** Prolongateur simple port ENFit<sup>®</sup> coudé de 30 cm  
**H** Prolongateur simple port ENFit<sup>®</sup> droit de 30 cm

## Caractéristiques

- Stérile :** Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO).  
**Emballage :** Emballé en carton de 1 pièce.  
**Stockage :** Stocker à température ambiante. Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.  
**Durée de conservation :** 3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.  
**Durée d'utilisation :** Indiqué pour une utilisation à long terme. À usage unique.  
**Taille et longueur :** De 12 à 24FR et de 0.8 à 6.5 cm. Voir tableau au recto.  
**Marquage CE :** Conforme à la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été attribuée par un organisme notifié agréé : TÜV SÜD (CE0123).  
**Classification :** Classe IIb.  
**Fabricant légal :** Degania Silicone Ltd.  
**Matériaux :** Sonde en silicone. Exempt de DEHP, de BPA et de latex\*. Informations supplémentaires sur demande.

\*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué(e) médical(e) Compat<sup>®</sup> ou visitez [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Sauf mention contraire, toutes les marques sont utilisées avec permission.

AXI00044 RÉV.2 24 JUIN 2024