

Compat[®] Buddy

Gama Completa de Sondas de Gastrostomía de Perfil Bajo

La sonda de gastrostomía de perfil bajo (botón) Compat[®] Buddy está diseñada para su uso en pacientes que requieren una administración enteral intermitente o continua de nutrientes, fluidos o medicación al tracto digestivo. También es apta para la descompresión gástrica.

Características Generales


Compat[®] Buddy está disponible en gran variedad de tamaños (12/14/16/18/20/24 FR), longitudes (de 0,8 a 6,5 cm) y dos tipos de kit para **satisfacer las diversas necesidades del paciente y el profesional sanitario.**

Confort del Paciente:

- Balón altamente resistente de silicona suave bio-compatible **que prolonga la vida útil y reduce la necesidad de sustitución de la sonda.**
- Con extremo distal diseñado **para proteger la pared del estómago.**
- Solución discreta y cómoda **que ofrece al paciente una mayor libertad de movimiento.**

Uso Sencillo: Compat[®] Buddy está disponible en dos kits diferentes. El Kit Compat[®] Buddy contiene una amplia gama de accesorios ENFit[®] **para una sustitución fácil y cómoda del botón o sonda de gastrostomía.** El kit Compat[®] Buddy Compact ofrece una **solución ecológica con los accesorios esenciales.** Ambos kits se suministran en envases estériles individuales con dos etiquetas extraíbles para **mejorar la trazabilidad.**

Materiales Seguros: Libre de DEHP, BPA y látex*.

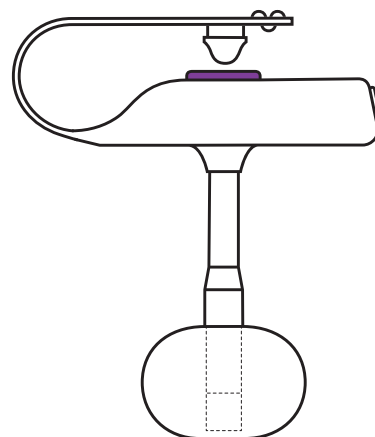

Gama de Medidas Disponibles

Longitud (mm)		8	10	12	15	17	20	23	25	27	30	35	40	45	50	55	60	65
Calibre (FR)	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.

Gama Completa de Sondas de Gastrostomía de Perfil Bajo

Contenido de los Kits

Compat® Buddy Kit	Compat® Buddy Compact Kit
Sonda de Gastrostomía de Perfil bajo Compat® Buddy	Sonda de Gastrostomía de Perfil bajo Compat® Buddy
2 Sistemas de Extensión con Puerto ENFit®	Jeringa Luer de 10 mL
Jeringa ENFit® de 35 mL	Fiador
Jeringa Luer de 10 mL	Lubricante Soluble en Agua
Fiador	2 Apósitos
Lubricante Soluble en Agua	
2 Apósitos	

Información de Pedido

Compat® Buddy Kit


Longitud de estoma (cm)	Calibre					
	12 FR	14 FR	16 FR	18 FR	20 FR	24 FR
0,8	12466557	12466601	12466635	12466759	12466828	12466844
1,0	12466535	12466577	12466642	12466795	12466835	12466864
1,2	12466544	12466600	12466636	12466784	12466841	12466847
1,5	12460321	12460325	12466761	12466785	12466836	12466870
1,7	12466556	12460330	12460320	12466798	12466815	12466865
2,0	12466534	12460327	12460341	12466823	12466842	12466846
2,3	12466543	12466568	12466745	12466824	12466817	12466856
2,5	12466555	12460342	12460352	12466825	12466837	12466871
2,7	12466554	12466576	12466719	12466805	12466818	12466857
3,0	12466561	12466589	12460347	12466830	12466838	12466869
3,5	12466560	12460331	12466752	12466806	12466839	12466868
4,0	12466551	12466620	12466753	12466826	12466863	12466859
4,5	12466528	12466598	12466770	12466807	12466862	12466890
5,0	12466527	12466621	12466762	12466808	12466852	12466892
5,5		12466616		12466811		
6,0		12466632		12466809		
6,5		12466626				

Compat® Buddy Compact Kit

Longitud de estoma (cm)	Calibre					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0,8	P00109	P00123	P00140	P00154	P00170	P00184
1,0	P00110	P00124	P00141	P00155	P00171	P00185
1,2	P00111	P00125	P00142	P00156	P00172	P00186
1,5	P00112	P00126	P00143	P00157	P00173	P00187
1,7	P00113	P00127	P00144	P00158	P00174	P00188
2,0	P00114	P00128	P00145	P00159	P00175	P00189
2,3	P00115	P00129	P00146	P00160	P00176	P00190
2,5	P00116	P00130	P00147	P00161	P00177	P00191
2,7	P00117	P00131	P00148	P00162	P00178	P00192
3,0	P00118	P00132	P00149	P00163	P00179	P00193
3,5	P00119	P00133	P00150	P00164	P00180	P00194
4,0	P00120	P00134	P00151	P00165	P00181	P00195
4,5	P00121	P00135	P00152	P00166	P00182	P00196
5,0	P00122	P00136	P00153	P00167	P00183	P00197
5,5		P00137		P00168		
6,0		P00138		P00169		
6,5		P00139				

Compat®

Gama Completa de Sondas de Gastrostomía de Perfil Bajo

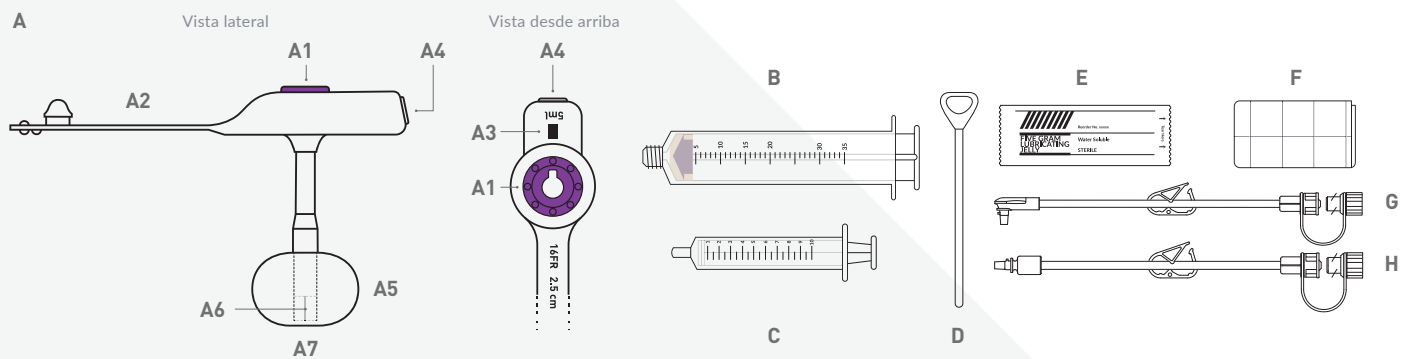

Componentes

- A** Sonda de gastrostomía de perfil bajo Compat® Buddy
- A1** Puerto de nutrición en color morado con válvula antirreflujo. Compatible con sistemas de extensión rectos y en ángulo recto
- A2** Tapón con indicación de calibre y longitud
- A3** Marca de posición para el sistema de extensión
- A4** Válvula de inflado del balón con conector Luer e indicación del volumen del balón, en mL
- | Tamaño del botón y volumen del balón | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Calibre (FR) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Volumen (mL) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 |
- A5** Balón de silicona de larga duración
- A6** Tira radiopaca para colocación y confirmación del posicionamiento
- A7** Extremo distal recubierto
- B** Jeringa ENFit® de 35 mL compatible con los sistemas de administración ENFit®
- C** Jeringa Luer para inflado del balón
- D** Fiador
- E** Lubricante soluble en agua
- F** Apósitos (2 unidades)
- G** Sistema de extensión con un puerto ENFit® de 30 cm con conector en ángulo recto
- H** Sistema de extensión con un puerto ENFit® de 30 cm con conector recto

Especificaciones Técnicas

- Estéril:** Esterilizadas con óxido de etileno (EO).
- Embalaje:** Embaladas individualmente.
- Almacenaje:** Almacenar en el envase original a temperatura ambiente y en un lugar seco. Evitar la luz solar directa y la radiación térmica.
- Período de validez:** 3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
- Duración de uso:** Indicadas para uso a largo plazo. Un solo uso.
- Calibre y longitud:** De 12 a 24 FR y de 0,8 a 6,5 cm. Véase la tabla de la página 1.
- Marca CE:** Cumplen la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
- Clasificación:** Clase IIb.
- Fabricante legal:** Degania Silicone Ltd.
- Materiales:** Sonda: silicona. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*.

*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No están formuladas con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com
 *Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI00044 REV.1 17 DE JUNIO DE 2024

Compat®