

# Compat<sup>®</sup> Buddy

## Portfólio completo de Sondas de Alimentação por Gastrostomia de Baixo Perfil

A sonda de alimentação por gastrostomia de baixo perfil Compat<sup>®</sup> Buddy (button) é destinada para uso em pacientes que requerem administração enteral intermitente ou contínua de nutrição, fluidos ou medicamentos com posicionamento gástrico. Também adequada para decompressão gástrica.

### Características Principais


A sonda Compat<sup>®</sup> Buddy está disponível em uma variedade de tamanhos (12/14/16/18/20/24 FR), comprimentos (de 0,8 até 6,5 cm) e tipos de kit para atender as múltiplas necessidades de pacientes e médicos.

#### Conforto do Paciente:

- Sonda de silicone biocompatível macia e balão de silicone de alta resistência para promover a máxima duração e limitar as necessidades de substituição da sonda.
- Com extremidade distal rebaixada para ser suave na parede do estômago.
- Solução discreta e confortável para oferecer maior liberdade de movimento ao paciente.

**Facilidade de Uso:** A sonda Compat<sup>®</sup> Buddy está disponível em dois kits diferentes. O Compat<sup>®</sup> Buddy Kit contém uma vasta gama de acessórios ENFit<sup>®</sup> para uma substituição fácil e confortável do botão ou da sonda de gastrostomia. O Compat<sup>®</sup> Buddy Compact Kit oferece uma solução amigável do ambiente com acessórios essenciais. Ambos os kits são fornecidos em embalagens individuais estéreis com duas etiquetas amovíveis para uma melhor rastreabilidade.

**Materiais Seguros:** Isentos de DEHP, BPA e látex\*.

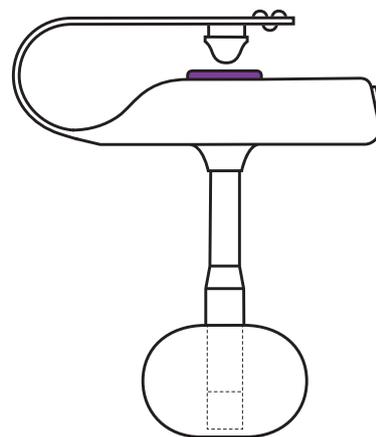

### Gama de Produtos

Comprimento (mm)	8	10	12	15	17	20	23	25	27	30	35	40	45	50	55	60	65
Diâmetro externo (FR)	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Cuidados com o Paciente. Nossa Prioridade.

# Portfólio completo de Sondas de Alimentação por Gastrostomia de Baixo Perfil

## Conteúdo do Kit

Compat® Buddy Kit	Compat® Buddy Compact Kit
Sonda por Gastrostomia de Baixo Perfil Compat® Buddy	Sonda por Gastrostomia de Baixo Perfil Compat® Buddy
2 Extensores ENFit®	Seringa Luer de 10 mL
Seringa de 35 mL	Mandril
Seringa Luer de 10 mL	Lubrificante Solúvel em Água
Mandril	2 Compressas de Gaze
Lubrificante Solúvel em Água	
2 Compressas de Gaze	

## Informações para Pedido


### Compat® Buddy Kit

Comprimento do trato de estoma (cm)	Diâmetro externo					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0,8	12466557	12466601	12466635	12466759	12466828	12466844
1,0	12466535	12466577	12466642	12466795	12466835	12466864
1,2	12466544	12466600	12466636	12466784	12466841	12466847
1,5	12460321	12460325	12466761	12466785	12466836	12466870
1,7	12466556	12460330	12460320	12466798	12466815	12466865
2,0	12466534	12460327	12460341	12466823	12466842	12466846
2,3	12466543	12466568	12466745	12466824	12466817	12466856
2,5	12466555	12460342	12460352	12466825	12466837	12466871
2,7	12466554	12466576	12466719	12466805	12466818	12466857
3,0	12466561	12466589	12460347	12466830	12466838	12466869
3,5	12466560	12460331	12466752	12466806	12466839	12466868
4,0	12466551	12466620	12466753	12466826	12466863	12466859
4,5	12466528	12466598	12466770	12466807	12466862	12466890
5,0	12466527	12466621	12466762	12466808	12466852	12466892
5,5		12466616		12466811		
6,0		12466632		12466809		
6,5		12466626				

### Compat® Buddy Compact Kit

Comprimento do trato de estoma (cm)	Diâmetro externo					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0,8	P00109	P00123	P00140	P00154	P00170	P00184
1,0	P00110	P00124	P00141	P00155	P00171	P00185
1,2	P00111	P00125	P00142	P00156	P00172	P00186
1,5	P00112	P00126	P00143	P00157	P00173	P00187
1,7	P00113	P00127	P00144	P00158	P00174	P00188
2,0	P00114	P00128	P00145	P00159	P00175	P00189
2,3	P00115	P00129	P00146	P00160	P00176	P00190
2,5	P00116	P00130	P00147	P00161	P00177	P00191
2,7	P00117	P00131	P00148	P00162	P00178	P00192
3,0	P00118	P00132	P00149	P00163	P00179	P00193
3,5	P00119	P00133	P00150	P00164	P00180	P00194
4,0	P00120	P00134	P00151	P00165	P00181	P00195
4,5	P00121	P00135	P00152	P00166	P00182	P00196
5,0	P00122	P00136	P00153	P00167	P00183	P00197
5,5		P00137		P00168		
6,0		P00138		P00169		
6,5		P00139				

# Portfólio completo de Sondas de Alimentação por Gastrostomia de Baixo Perfil

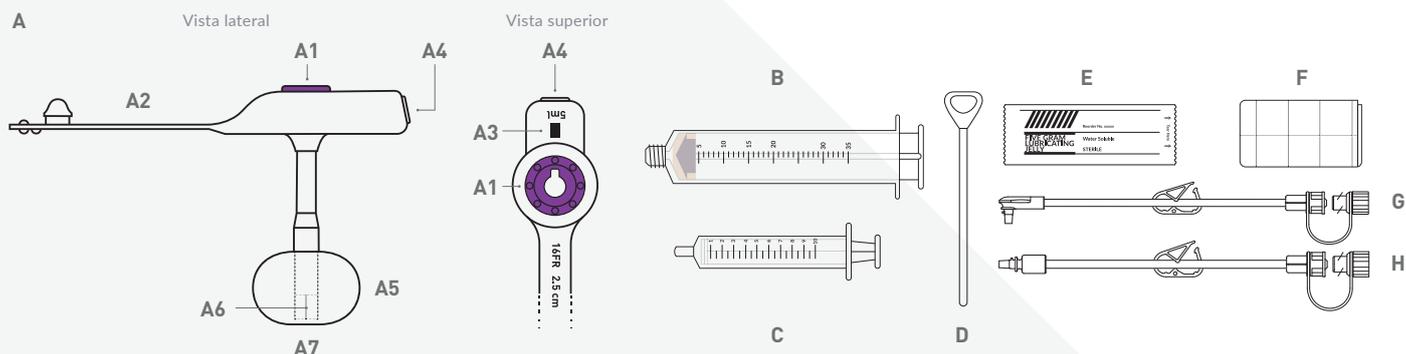

## Componentes

- A** Sonda de alimentação por gastrostomia de baixo perfil Compat® Buddy  
**A1** Porta de alimentação de cor roxa com válvula antirrefluxo. Compatível com extensores com conector reto ou com ângulo de 90°  
**A2** Tampa com indicação do diâmetro externo e comprimento  
**A3** Marca de posição para o extensor  
**A4** Válvula de insuflação com conector Luer e indicação do volume do balão, em mL

Diâmetro externo da sonda e volume do balão						
Diâmetro externo (FR)	12	14	16	18	20	24
Volume (mL)	3,0	4,0	5,0	5,0	8,0	8,0

- A5** Balão de silicone de alta resistência  
**A6** Tira radiopaca para posicionamento e confirmação da posição  
**A7** Extremidade distal rebaixada  
**B** Seringa de 35 mL ENFit® compatível com extensores com conexão ENFit®  
**C** Seringa Luer para insuflar o balão  
**D** Mandril  
**E** Lubrificante solúvel em água  
**F** Compressas de gaze (2 itens)  
**G** Extensor ENFit® de 30 cm com conector com ângulo de 90°  
**H** Extensor ENFit® de 30 cm com conector reto

## Especificações

- Esterilização:** Esterilizada com Óxido de Etileno (EO).  
**Embalagem:** Embalagem individual.  
**Armazenamento:** Armazenar na embalagem original em temperatura ambiente e local seco. Evitar a luz solar direta e a radiação térmica.  
**Prazo de validade:** 3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.  
**Duração de utilização:** Indicada para uso a longo prazo. Para uso único.  
**Tamanho e comprimento:** De 12 até 24 FR e de 0,8 a 6,5 cm. Ver tabela na página 1.  
**Marca CE:** Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).  
**Classificação:** Classe IIb.  
**Fabricante legal:** Degania Silicone Ltd.  
**Materiais:** Sonda: silicone. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex\*.

\*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formuladas com látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse [www.compat.com](http://www.compat.com)  
 \*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

AXI00044 REV.1 12 DE JUNHO DE 2024

# Compat®