

Compat[®] Buddy

Brett sortiment av gastrostomiportar med låg profil

Compat[®] Buddy gastrostomiport (knapp) med låg profil är avsedd för användning på patienter som kräver intermittent eller kontinuerlig enteral administration av näring, vätska eller läkemedel. Passar också för gastrisk dekompensation.

Egenskaper


Compat[®] Buddy-knappen är tillgänglig i flera storlekar (12/14/16/18/20/24FR), längder (0,8 till 6,5 cm) och sammansättning för att uppfylla de flesta patientbehov.

Patientkomfort:

- Mjuk biokompatibel silikonsond och högresistent silikonballong för att främja maximal livslängd och begränsa behovet av sondutbyte.
- Med infälld distal ände som är skonsam mot magväggen.
- Diskret och bekväm lösning för att erbjuda patienten större rörelsefrihet.

Användarvänlighet: Compat Buddy[®]-knappen levereras i två olika satser. Compat[®] Buddy Kit innehåller nödvändiga ENFit[®]-tillbehör för enkelt och bekvämt byte av gastrostomi porten. Compat[®] Buddy Compact Kit är en miljövänlig lösning med optimerat antal tillbehör. Alla kit levereras i en individuell steril förpackning med två avtagbara etiketter för förbättrad spårbarhet.

Säkra Material: Fri från DEHP, BPA och latex*.

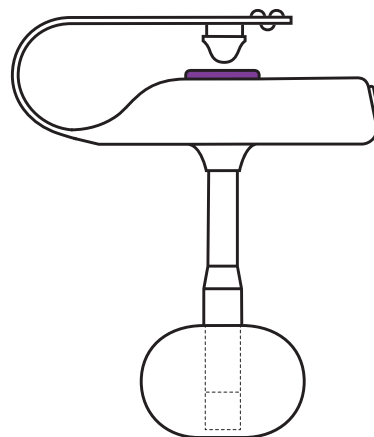

Beställningsinformation

Längd (cm)	8	10	12	15	17	20	23	25	27	30	35	40	45	50	55	60	65
Storlek (yttre diameter) i FR	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Patientvård. Vår Prioritet.

Brett sortiment av gastrostomiportar med låg profil

Kit Innehåll

Compat® Buddy Kit	Compat® Buddy Compact Kit
Compat® Buddy gastrostomimatningssond med låg profil	Compat® Buddy gastrostomimatningssond med låg profil
2 ENFit® förlängningsset	10 mL Luer-spruta för ballonguppblåsning
35 mL ENFit® spruta	Stylet/styrstift
10 mL Luer-spruta för ballonguppblåsning	Vattenlösligt smörjmedel
Stylet/styrstift	Kompresser (2 delar)
Vattenlösligt smörjmedel	
Kompresser (2 delar)	

Beställningsinformation


Compat® Buddy Kit

Stomakanal, längd (cm)	Storlek (yttre diameter) i FR					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0.8	12466557	12466601	12466635	12466759	12466828	12466844
1.0	12466535	12466577	12466642	12466795	12466835	12466864
1.2	12466544	12466600	12466636	12466784	12466841	12466847
1.5	12460321	12460325	12466761	12466785	12466836	12466870
1.7	12466556	12460330	12460320	12466798	12466815	12466865
2.0	12466534	12460327	12460341	12466823	12466842	12466846
2.3	12466543	12466568	12466745	12466824	12466817	12466856
2.5	12466555	12460342	12460352	12466825	12466837	12466871
2.7	12466554	12466576	12466719	12466805	12466818	12466857
3.0	12466561	12466589	12460347	12466830	12466838	12466869
3.5	12466560	12460331	12466752	12466806	12466839	12466868
4.0	12466551	12466620	12466753	12466826	12466863	12466859
4.5	12466528	12466598	12466770	12466807	12466862	12466890
5.0	12466527	12466621	12466762	12466808	12466852	12466892
5.5		12466616		12466811		
6.0		12466632		12466809		
6.5		12466626				

Compat® Buddy Compact Kit

Stomakanal, längd (cm)	Storlek (yttre diameter) i FR					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0.8	P00109	P00123	P00140	P00154	P00170	P00184
1.0	P00110	P00124	P00141	P00155	P00171	P00185
1.2	P00111	P00125	P00142	P00156	P00172	P00186
1.5	P00112	P00126	P00143	P00157	P00173	P00187
1.7	P00113	P00127	P00144	P00158	P00174	P00188
2.0	P00114	P00128	P00145	P00159	P00175	P00189
2.3	P00115	P00129	P00146	P00160	P00176	P00190
2.5	P00116	P00130	P00147	P00161	P00177	P00191
2.7	P00117	P00131	P00148	P00162	P00178	P00192
3.0	P00118	P00132	P00149	P00163	P00179	P00193
3.5	P00119	P00133	P00150	P00164	P00180	P00194
4.0	P00120	P00134	P00151	P00165	P00181	P00195
4.5	P00121	P00135	P00152	P00166	P00182	P00196
5.0	P00122	P00136	P00153	P00167	P00183	P00197
5.5		P00137		P00168		
6.0		P00138		P00169		
6.5		P00139				

Brett sortiment av gastrostomiportar med låg profil

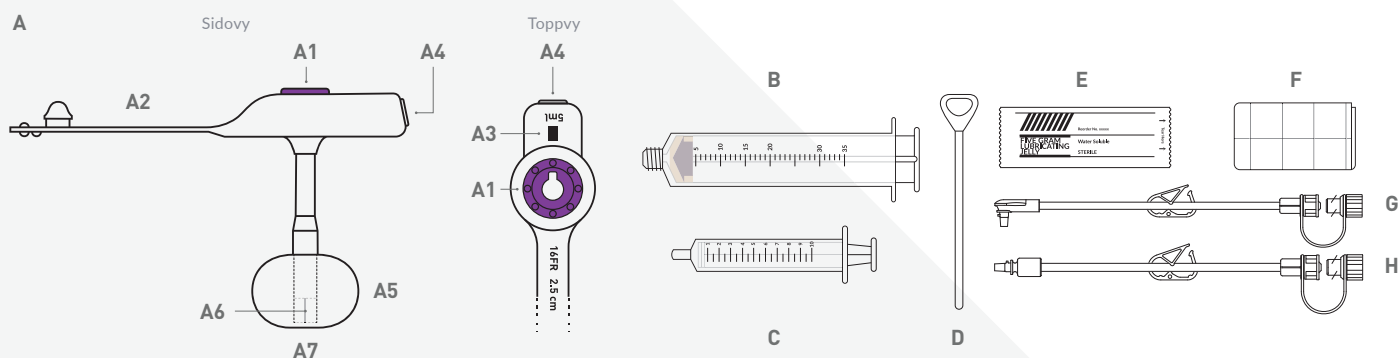

Komponenter

- A** Compat® Buddy gastrostomimatningssond med låg profil
A1 Lilafärgad matningsport med antirefluxventil. Kompatibel med raka och högervinklade förlängningsset
A2 Lock med angiven storlek (FR) och längd
A3 Positionsmarkörer för förlängningssetet
A4 Port med Luer-koppling och indikation på ballongvolym i mL

Knappestorlek och ballongvolym						
Storlek (FR)	12	14	16	18	20	24
Rekommenderad volym (mL)	3.0	4.0	5.0	5.0	8.0	8.0
Maximal volym (mL)	5.0	6.0	7.0	7.0	12.0	12.0

- A5** Högresistent silikonballong
A6 Röntgentät tråd för placering och positioneringsbekräftelse
A7 Infälld distal ände
B ENFit® 35 mL spruta kompatibel med ENFit®-förlängningsset
C Luer-spruta för ballonguppblåsning
D Stylet/styrstift
E Vattenlösligt smörjmedel
F Kompresser (2 delar)
G 30 cm ENFit® förlängningsset med högervinklad koppling
H 30 cm ENFit® förlängningsset med rak koppling

Specifikationer

- Sterilitet:** Steriliserad med etylenoxid (EO).
Förpackning: Individuellt förpackad.
Förvaring: Förvara i originalförpackning vid rumstemperatur och i en torr miljö. Undvik direkt solljus och värmestrålning.
Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatumet. Utgångsdatumet på förpackningen.
Användningstid: Långtidsbruk. För engångsbruk.
Storlek och längd: Från 12 till 24 FR och från 0,8 till 6,5 cm. Se tabell på sida 2.
CE-märke: Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering: Klass IIb.
Juridisk tillverkare: Degania Silicone Ltd.
Material: Sond: Silikon. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*. Ytterligare information kan begäras.

*DEHP och BPA har inte lagts till med avsikt under tillverkningsprocessen. Inte utformad med naturgummilates. Detta dokument ersätter inte bruksanvisningen som måste läsas före användning.

Skaffa mer information genom att kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com
 *Alla varumärken används med tillstånd om inget annat anges.

AXI00044 REV.1 30 APRIL 2024

Compat®