

# Compat<sup>®</sup> Buddy

## Brett Sortiment av Gastrostomiportar med Låg Profil

Compat<sup>®</sup> Buddy gastrostomiport (knapp) med låg profil är avsedd för användning på patienter som kräver intermittent eller kontinuerlig enteral administration av näring, vätska eller läkemedel. Passar också för gastrisk dekompensation.

### Egenskaper


Compat<sup>®</sup> Buddy-knappen är tillgänglig i flera storlekar (12/14/16/18/20/24FR) och längder (0,8 till 6,5 cm) för att uppfylla de flesta patientbehov.

#### Patientkomfort:

- Mjukbiokompatibel silikonsond och högresistent silikonballong för att främja maximal livslängd och begränsa behovet av sondutbyte.
- Med infälld distal ände som är skonsam mot magväggen.
- Diskret och bekväm lösning för att erbjuda patienten större rörelsefrihet.

**Användarvänlighet:** Compat<sup>®</sup> Buddy-knappen finns i ett bekvämt set för enkel placering. Settet tillhandahålls i en individuell steril förpackning med två avtagbara etiketter för förbättrad spårbarhet.

**Säkra Material:** Fri från DEHP, BPA och latex\*.

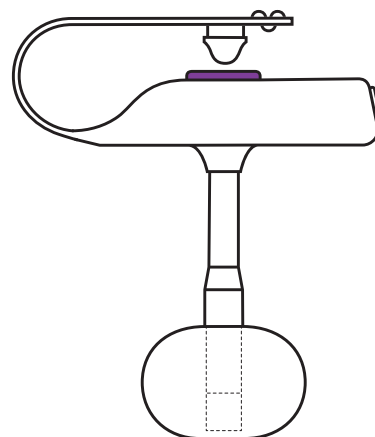


### Beställningsinformation

Stomakanal, längd (cm)	Storlek (yttre diameter) i FR					
	12 FR	14 FR	16 FR	18 FR	20 FR	24 FR
0,8	12466557	12466601	12466635	12466759	12466828	12466844
1,0	12466535	12466577	12466642	12466795	12466835	12466864
1,2	12466544	12466600	12466636	12466784	12466841	12466847
1,5	12460321	12460325	12466761	12466785	12466836	12466870
1,7	12466556	12460330	12460320	12466798	12466815	12466865
2,0	12466534	12460327	12460341	12466823	12466842	12466846
2,3	12466543	12466568	12466745	12466824	12466817	12466856
2,5	12466555	12460342	12460352	12466825	12466837	12466871
2,7	12466554	12466576	12466719	12466805	12466818	12466857
3,0	12466561	12466589	12460347	12466830	12466838	12466869
3,5	12466560	12460331	12466752	12466806	12466839	12466868
4,0	12466551	12466620	12466753	12466826	12466863	12466859
4,5	12466528	12466598	12466770	12466807	12466862	12466890
5,0	12466527	12466621	12466762	12466808	12466852	12466892
5,5		12466616		12466811		
6,0		12466632		12466809		
6,5		12466626				

Patientvård. Vår prioritet.

# Brett Sortiment av Gastrostomiportar med Låg Profil

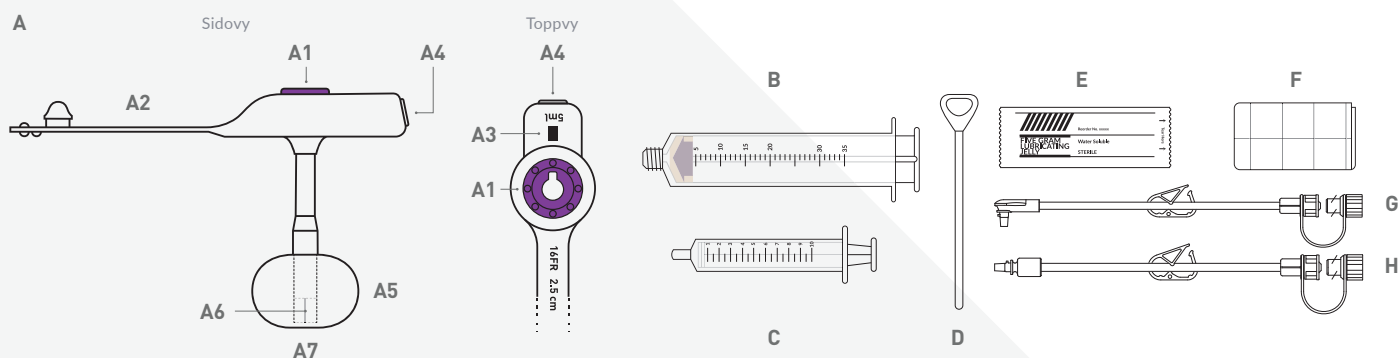

## Komponenter

- A** Compat® Buddy gastrostomimatningssond med låg profil  
**A1** Lilafärgad matningsport med antirefluxventil. Kompatibel med raka och högervinklade förlängningsset  
**A2** Lock med angiven storlek (FR) och längd  
**A3** Positionsmarkörer för förlängningssetet  
**A4** Port med Luer-koppling och indikation på ballongvolym i ml
- | Knappstorlek och ballongvolym |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Storlek (FR)                  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  |
| Volym (ml)                    | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 |
- A5** Högresistent silikonballong  
**A6** Röntgentät tråd för placering och positioneringsbekräftelse  
**A7** Infälld distal ände
- B** ENFit® 35 ml spruta kompatibel med ENFit®-förlängningsset  
**C** Luer-spruta för ballonguppblåsning  
**D** Mandräng  
**E** Vattenlösligt smörjmedel  
**F** Gasvävsdynor (2 delar)  
**G** 30 cm ENFit® förlängningsset med högervinklad koppling  
**H** 30 cm ENFit® förlängningsset med rak koppling

## Specifikationer

- Sterilitet:** Steriliserad med etylenoxid (EO).
- Förpackning:** Individuellt förpackad.
- Förvaring:** Förvara i originalförpackning vid rumstemperatur och i en torr miljö. Undvik direkt solljus och värmestrålning.
- Hållbarhet:** 3 år från tillverkningsdatumet. Utgångsdatumet på förpackningen.
- Användningstid:** Långtidsbruk. För engångsbruk.
- Storlek och längd:** Från 12 till 24 FR och från 0,8 till 6,5 cm. Se tabell på sida 1.
- CE-märke:** Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
- Klassificering:** Klass IIb.
- Juridisk tillverkare:** Degania Silicone Ltd.
- Material:** Sond: Silikon. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex\*. Ytterligare information kan begäras.

\*DEHP och BPA är inte avsiktligt tillsatt under tillverkningsprocessen. Ej formulerad med naturgummilatex. För närmare information, kontakta din representant för Nestlé Health Science eller gå till [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00044 REV.0 29 SEPTEMBER 2022