

Compat[®] Gravity

Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L

La tubulure Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L est indiquée pour l'administration entérale de solutions nutritives, de liquides et/ou de médicaments par gravité.

Aperçu des Caractéristiques

La tubulure Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L comporte un réservoir Flexibaggle[®] 1,5 L, une chambre compte-gouttes, un port de médication en Y ENFit[®] et une extrémité distale ENFit[®] (raccord pour la sonde du patient).


Sécurité du Patient : La tubulure Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L dispose de connecteurs ENFit[®] conformes à la norme ISO 80369-3. Les connecteurs ENFit[®] sont conçus pour être incompatibles IV pour **promouvoir la sécurité du patient** en contribuant à éviter les connexions involontaires.

Facilité d'Utilisation : Le réservoir intégré de 1,5 L offre un système pratique avec une suspension intégrée et un bouchon à vis. La large ouverture supérieure permet de remplir le réservoir avec une solution nutritive ou de l'eau **sans avoir à arrêter l'administration ou à retirer le réservoir de la suspension**.

Des Matériaux Sûrs : Le réservoir de 1,5 L est composé d'éthylène vinyle acétate (EVA), un matériau souple compatible avec les aliments. La tubulure Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L est **stérile et exempte de DEHP, de BPA et de latex***.

Compatibilité :

- Sondes de nutrition entérale : ENFit[®]
- Seringues : ENFit[®]

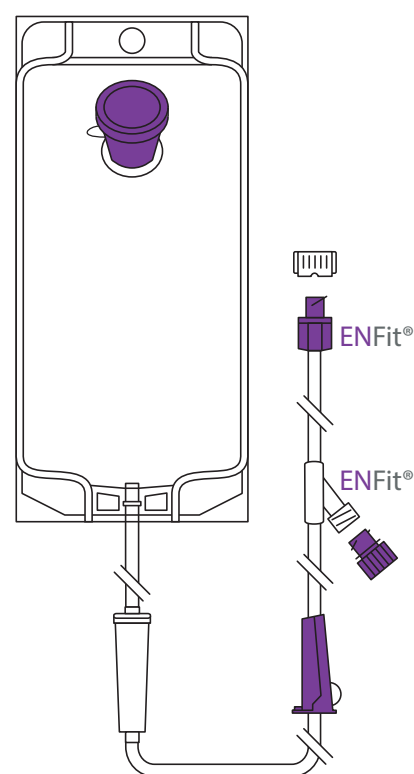


Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente/carton
Compat [®] Gravity Combiset 1,5 L	12298204	30

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Compat® Gravity Combiset 1,5 L

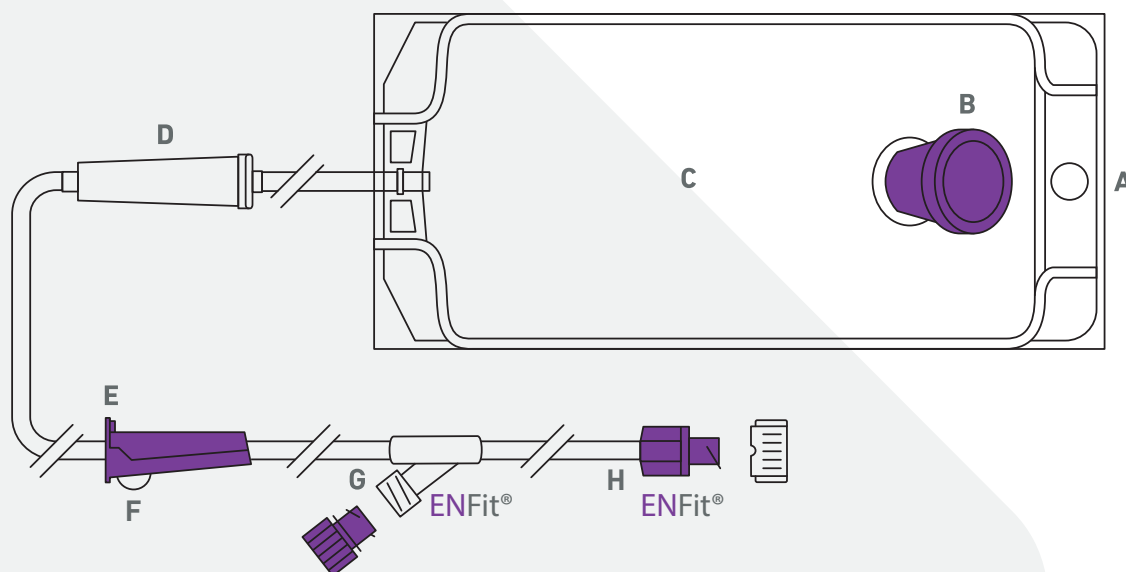

Composants

- A Système de suspension intégré
- B Large ouverture pour le remplissage avec bouchon à vis sécurisé
- C Flexibaggle® 1,5 L en EVA avec graduations (à 50 mL et chaque 100 mL) et champs d'inscription pour le nom du patient et autres informations importantes (formule, volume, date et débit)
- D Chambre compte-gouttes
- E Système de suspension intégré pour permettre de garder l'extrémité distale de la tubulure à l'abri des salissures
- F Clamp à roulette pour arrêter ou régler le débit
- G Port de médication ENFit® en Y avec bouchon
- H Extrémité distale ENFit® avec bouchon (raccord pour la sonde du patient)

Spécifications

- | | |
|--------------------------------|---|
| Stérile : | Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO). |
| Emballage : | Emballé individuellement en carton de 30 pièces (58,5 x 38,5 x 19 cm). |
| Stockage : | Stocker à température ambiante. Tenir à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité. |
| Durée de conservation : | 3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage. |
| Durée d'utilisation : | 24 heures. À usage unique. |
| Longueur : | Distance du Flexibaggle® à l'extrémité de la sonde du patient : 180 cm. |
| Diamètres : | Diamètre nominal intérieur : 4,0 mm. Diamètre nominal extérieur : 5,4 mm. |
| Norme ISO : | Connecteur ENFit® conforme à la norme ISO 80369-3. |
| Marquage CE : | Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.
Une certification CE a été délivrée par un organisme notifié accrédité : TÜV SÜD (CE0123). |
| Classification : | Classe Is. |
| Fabricant légal : | Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, 20068 Peschiera Borromeo (MI). |
| Développement durable : | Système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001:2015. |
| Matériaux : | Tubulure : PVC. Tous les matériaux sont exempts de DEHP, de BPA et de latex*.
Informations supplémentaires sur demande. |
| Pays d'origine : | Fabriquée en Italie. |

*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez www.compat.com.

*Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales sont utilisées avec permission.

AXI00034 RÉV.1 12 JANVIER 2021

Compat®