

Compat[®] Buddy

Dispositivo per la misurazione dello stoma

Il dispositivo per la misurazione dello stoma Compat[®] Buddy è progettato per determinare la profondità di un tratto ben definito dello stoma creato mediante gastrostomia per stabilire più facilmente la corretta lunghezza del bottone per gastrostomia Compat[®] Buddy da scegliere.


● Panoramica delle caratteristiche

Il dispositivo per la misurazione dello stoma Compat[®] Buddy dispone di un tubo con scala graduata, un disco mobile e un palloncino di fissaggio atti a misurare la lunghezza dello stoma.

Comfort del paziente: Grazie al dispositivo per la misurazione dello stoma Compat[®] Buddy è possibile selezionare la lunghezza opportuna del bottone per gastrostomia Compat[®] Buddy, **evitando così perdite gastriche e irritazioni cutanee.**

Materiali sicuri: Il dispositivo per la misurazione dello stoma Compat[®] Buddy è sterile e privo di DEHP, BPA e lattice*.

Una gamma per quasi tutte le esigenze: Il dispositivo per la misurazione dello stoma Compat[®] Buddy fa parte di una gamma completa di bottoni e accessori per gastrostomia **pensati per soddisfare la maggior parte delle esigenze cliniche** per la nutrizione enterale a lungo termine.

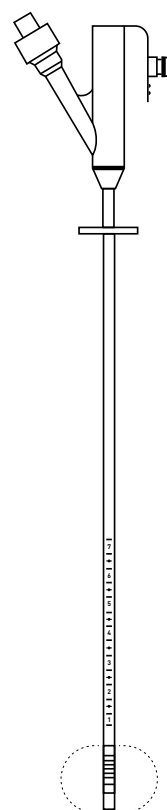


● Informazioni per gli ordini

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Compat [®] Buddy Dispositivo per la misurazione dello stoma	12461149	2

La cura del paziente. La nostra priorità.

Dispositivo per la misurazione dello stoma

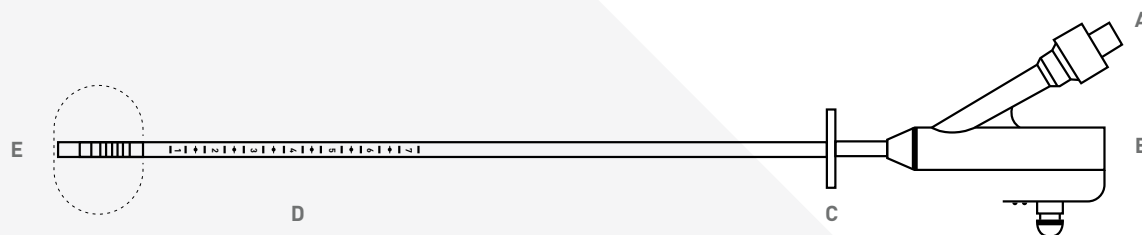

Componenti

- A Valvola di gonfiaggio con connettore Luer
- B Connettore a imbuto con tappo di chiusura
- C Disco mobile
- D Tubo da 12 FR con scala graduata divisa per centimetri e contrassegni distanziati 0,25 cm gli uni dagli altri
- E Palloncino di fissaggio in silicone da 5 ml

Specifiche

- Sterile:** sterilizzato con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** confezionato singolarmente in una confezione da 2 pezzi.
- Conservazione:** conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente e in un ambiente asciutto. Tenere al riparo dalla luce solare e da radiazioni termiche.
- Durata:** 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** Monouso.
- Dimensioni:** 12 FR, 5 ml.
- Marchio CE:** conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** classe I (sterile).
- Fabbricante legale:** Degania Silicone Ltd.
- Materiali:** silicone. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.

* Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com
* Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00333 REV.0 23 MARZO 2021