

Compat ella®

Compat Ella® Set universale

Il set universale Compat Ella® è progettato per la somministrazione di sostanze nutritive, fluidi e/o medicinali per via enterale mediante l'utilizzo della pompa per nutrizione Compat Ella®.

● *Panoramica delle caratteristiche*

Il set universale Compat Ella® è dotato di un adattatore universale con filtro per l'aria, un connettore ENPlus per la nutrizione, un rubinetto a 3 vie compatibile con ENFit® per la somministrazione di medicinali e un connettore ENFit® all'estremità distale (per il collegamento della sonda lato paziente). È incluso anche un supporto separato per flaconi.


Somministrazione affidabile: il set universale Compat Ella® è provvisto di meccanismo di sicurezza con tecnologia brevettata anti flusso libero Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). Il meccanismo AAFF è integrato nella cassetta e si attiva sempre automaticamente per **tutelare la sicurezza del paziente**.

Connettori più sicuri: Il set universale Compat Ella® comprende i connettori ENFit® realizzati in conformità allo standard ISO 80369-3 e un connettore ENPlus realizzato in conformità allo standard ISO 18250-3. I connettori ENFit® ed ENPlus sono progettati per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di **promuovere la sicurezza del paziente** aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati.

Materiali sicuri: Il set universale Compat Ella® è sterile e **privo di DEHP, BPA e lattice***.

Compatibilità:

- Contenitori per sostanze nutritive: ENPlus, contenitori in vetro e plastica con imboccatura larga, bottiglie in vetro con tappo a corona
- Sonde per nutrizione enterale: ENFit®
- Siringhe: ENFit®

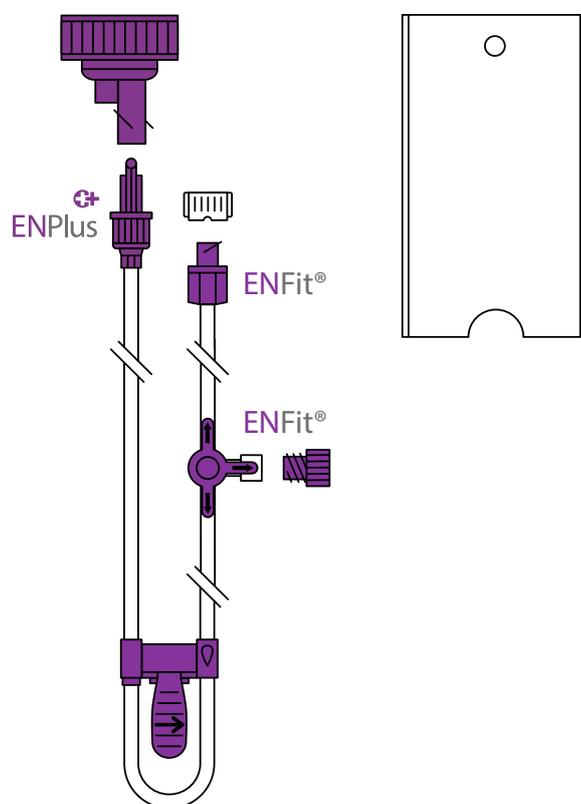


● *Informazioni per gli ordini*

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Compat Ella® Set universale	12298206	30

Conosci Compat Ella® ?

Compat Ella® Set universale

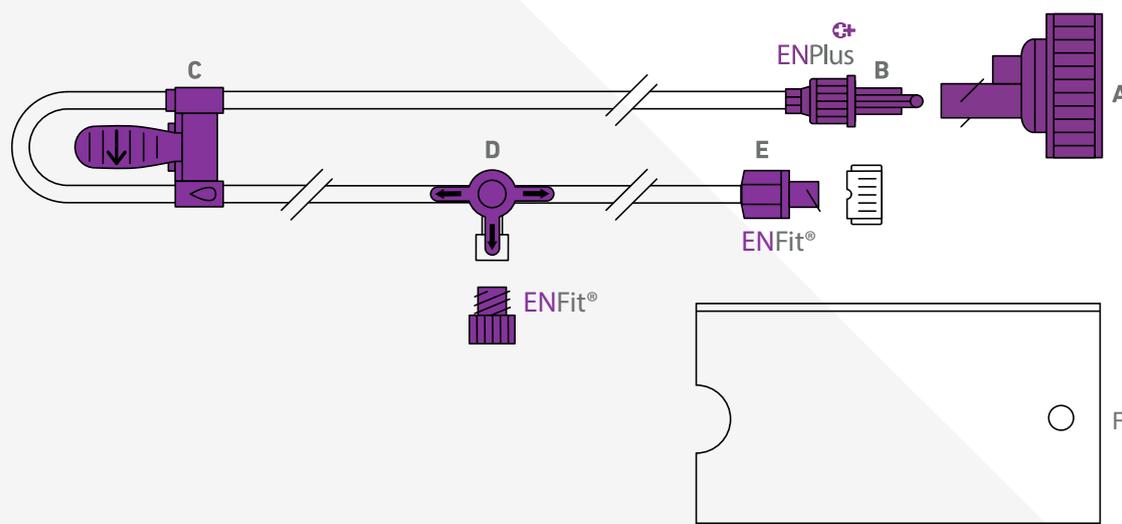

Componenti

- A Adattatore universale con filtro per l'aria e connettore ENPlus compatibile con contenitori in vetro e plastica con imboccatura larga (DIN 168-1) o bottiglie in vetro con tappo a corona (EN 14634 e EN 14635)
- B Connettore ENPlus specifico per la nutrizione enterale con ghiera girevole (collegamento per la nutrizione)
- C Cassetta (same comment as above) per pompa Compat Ella® con integrato il meccanismo brevettato di sicurezza Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- D Rubinetto a 3 vie compatibile con ENFit® per la somministrazione di medicinali provvisto di tappo
- E Estremità distale con connettore ENFit® provvisto di tappo (collegamento per sonda lato paziente)
- F Supporto per flacone da 500 mL in LDPE (polietilene a bassa densità)

Specifiche

- Sterile:** sterilizzato con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** confezionato singolarmente in scatole da 30 pezzi (39,5 × 29,5 × 14 cm).
- Conservazione:** conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
- Durata:** 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** 24 ore. Monouso.
- Lunghezza:** distanza tra il connettore per nutrizione e il connettore per sonda lato paziente: 230 cm. Distanza tra il connettore per nutrizione e la pompa: 50 cm.
- Diametri:** diametro interno nominale di 3,0 mm; diametro esterno nominale di 4,15 mm.
- Standard ISO:** connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3 e connettore ENPlus conforme allo standard ISO 18250-3.
- Marchio CE:** conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** classe IIa.
- Fabbricante legale:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilità:** sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
- Materiali:** tubi in PVC e silicone. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
- Paese di origine:** prodotto in Italia.

* Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com

® Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00406 REV.0 23 MARZO 2021

Compat®