

# Compat® Flexibaggle®

## Contenitore enterale vuoto pieghevole 500 ml

Il contenitore vuoto pieghevole Compat® Flexibaggle® da 500 ml con connettore EN-Plus è progettato per la somministrazione ai pazienti di sostanze nutritive e/o fluidi per via enterale. Da usare in combinazione con i set di somministrazione.

### ● *Panoramica delle caratteristiche*


Il contenitore vuoto pieghevole Compat® Flexibaggle® da 500 ml con connettore ENPlus è pensato per **contribuire a migliorare la cura del paziente**.

**Facilità di utilizzo:** Le sue proprietà autoportanti e l'apertura con imboccatura larga lo rendono molto **facile da maneggiare** e aiutano a **impedire fuoriuscite accidentali**, mentre la sua ripiegabilità permette di averlo sempre a portata di mano e di **ridurre quindi lo spazio occupato nel magazzino**.

**Uso ambulatoriale:** Ogni porta di Compat® Flexibaggle® da 500 ml è dotata di una robusta chiusura a vite che contribuisce a **impedire le perdite**, rendendolo ideale per l'uso ambulatoriale, ad esempio insieme allo zaino Compat Ella®.

**Sicurezza del paziente:** Compat® Flexibaggle® da 500 ml dispone di un connettore ENPlus realizzato in conformità allo standard ISO 18250-3. Il connettore ENPlus è progettato per non essere compatibile con i set per infusione endovenosa al fine di **promuovere la sicurezza del paziente** aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati. Compat® Flexibaggle® è realizzato in polietilene, un materiale compatibile con alimenti. È inoltre **sterile e privo di DEHP, BPA e lattice\***.

**Ecologico:** Compat® Flexibaggle® da 500 ml è pieghevole, il che **riduce l'impatto ambientale** legato alla spedizione.

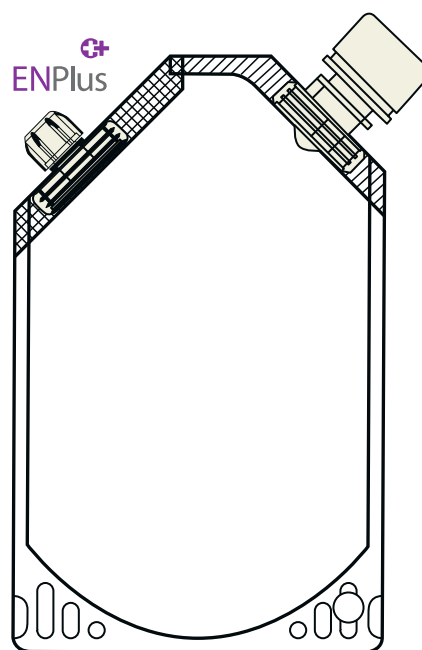


### ● *Informazioni per gli ordini*

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Compat® Flexibaggle® 500 ml	12440917	30

*La cura del paziente. La nostra priorità.*

# Contenitore enterale vuoto pieghevole 500 ml

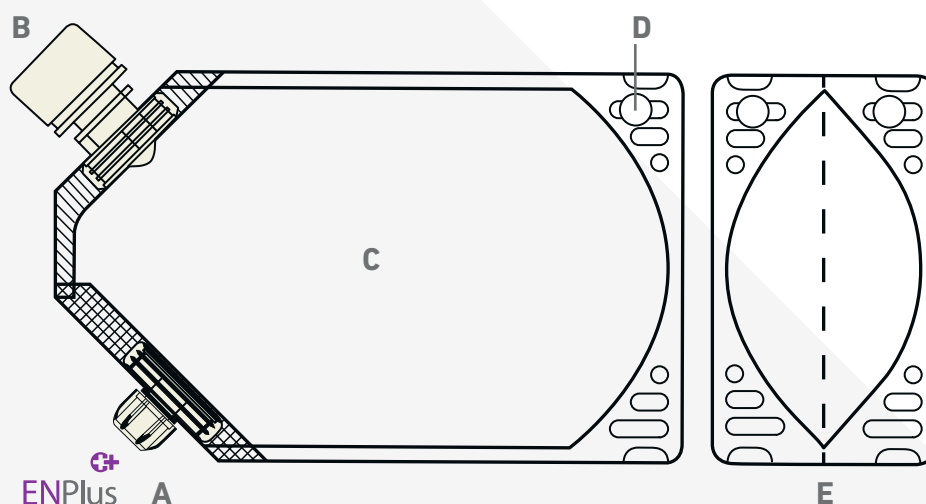

## Componenti

- A** Connettore ENPlus specifico per la nutrizione enterale con ghiera girevole e tappo (collegamento per la nutrizione)
- B** Apertura per riempimento a imboccatura larga con tappo a vite
- C** Contenitore Flexibaggle® da 500 ml con graduazioni (a 250 e 500 ml) ed etichette per il nome del paziente e altre informazioni importanti (formula, velocità del flusso e data)
- D** Sistema per fissaggio ad asta
- E** Base della sacca pieghevole e autoportante, vista dal basso

## Specifiche

- Imboccatura larga:** diametro interno nominale di  $\pm 21,5$  mm.
- Dimensioni della sacca:** dimensione massima nominale della sacca:  $\pm 130 \times 210$  mm.
- Sterile:** sterilizzato con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** confezionato singolarmente in scatole da 30 pezzi (solo  $40 \times 22 \times 19$  cm).
- Conservazione:** conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
- Durata:** 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** 24 ore. Monouso.
- Standard ISO:** connettore ENPlus conforme allo standard ISO 18250-3.
- Marchio CE:** conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** classe Is.
- Fabbricante legale:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilità:** sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
- Materiali:** sacca in PE (polietilene). Tutti i materiali sono privi di DEHP, BPA e lattice\*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
- Paese di origine:** prodotto in Italia.

\*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito [www.compat.com](http://www.compat.com)  
\* Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00033 REV.0 18 MARZO 2021