

Compat[®] Gravity

Compat[®] Gravity Set con spike

Il set con spike Compat[®] Gravity è progettato per la somministrazione di sostanze nutritive, fluidi o medicinali per via enterale mediante il metodo d'infusione per gravità.

Panoramica delle caratteristiche


Il set con spike Compat[®] Gravity è dotato di un connettore per la nutrizione ENPlus, di una camera di gocciolamento, di un regolatore di flusso a rotella, di una porta ENFit[®] a "Y" per la somministrazione di medicinali e di un'estremità distale con connettore ENFit[®].

Sicurezza del paziente: Il set con spike Compat[®] Gravity comprende connettori ENFit[®] realizzati in conformità allo standard ISO 80369-3 e un connettore ENPlus realizzato in conformità allo standard ISO 18250-3. I connettori ENFit[®] ed ENPlus sono progettati per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di **tutelare la sicurezza del paziente** aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati.

Materiali sicuri: Il set con spike Compat[®] Gravity è **sterile** e **privo di DEHP, BPA e lattice***.

Compatibilità:

- Contenitori per sostanze nutritive: ENPlus
- Sonde per nutrizione enterale: ENFit[®]
- Siringhe: ENFit[®]

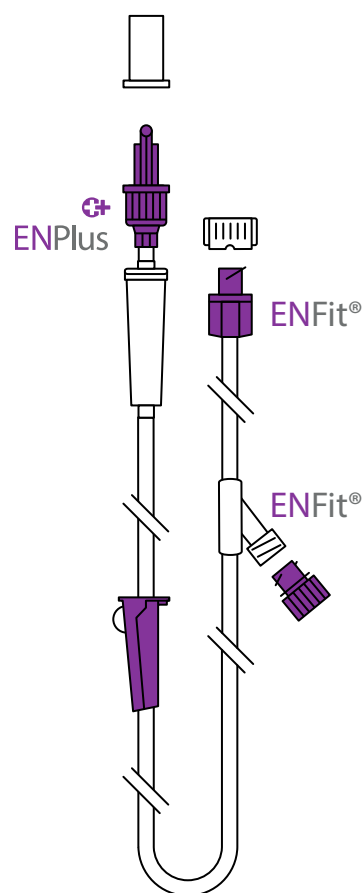


Informazioni per gli ordini

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Compat [®] Gravity Set con spike	12298205	30

La cura del paziente. La nostra priorità.

Compat® Gravity Set con spike

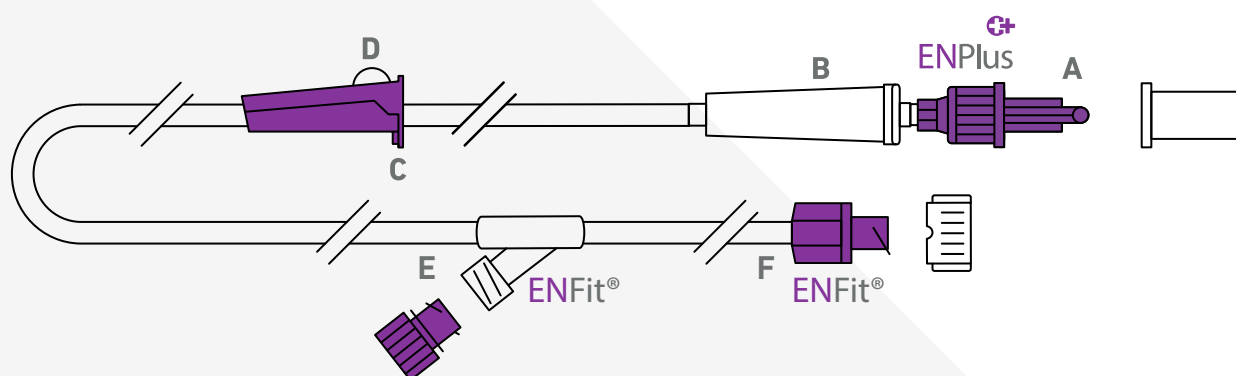

Componenti

- A** Estremità prossimale con connettore ENPlus (collegamento per nutrizione) “esclusivamente enterale” con ghiera girevole e tappo
- B** Camera di gocciolamento
- C** Supporto integrato per tenere l'estremità distale del set di somministrazione lontana da materiali e superfici non puliti
- D** Regolatore di flusso a rotella per regolare la velocità del flusso o arrestarlo completamente
- E** Porta ENFit® a "Y" per la somministrazione di medicinali provvista di tappo
- F** Estremità distale con connettore ENFit® provvisto di tappo (collegamento per sonda lato paziente)

Specifiche

Sterile:	sterilizzato con ossido di etilene (EO).
Confezionamento:	confezionato singolarmente in scatole da 30 pezzi (29,5 × 26 × 22 cm).
Conservazione:	conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
Durata:	3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego:	24 ore. Monouso.
Lunghezza della sonda:	distanza tra il connettore per la nutrizione e il connettore per sonda lato paziente: 180 cm.
Diametro della sonda:	diametro interno nominale di 4,0 mm; diametro esterno nominale di 5,4 mm.
Standard ISO:	connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3 e connettore ENPlus conforme allo standard ISO 18250-3.
Marchio CE:	conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
Classificazione:	classe Is.
Fabbricante legale:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilità:	sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
Materiali:	tubi in PVC. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
Paese di origine:	prodotto in Italia.

*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com
* Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00035 REV.0 18 MARZO 2021

Compat®