

# Compat® Modum

## Accessorio per l'aspirazione e la misurazione dei residui gastrici a circuito chiuso

Compat® Modum è un accessorio progettato per l'aspirazione a circuito chiuso dei residui gastrici e l'eventuale reintroduzione degli stessi nello stomaco del paziente, se utilizzato insieme a tubi, siringhe e sacche di raccolta appropriati. Adatto anche per la nutrizione enterale e la somministrazione di medicinali.

### Panoramica delle caratteristiche

Compat® Modum è un accessorio che si posiziona tra la sonda per nutrizione e il set di somministrazione per **facilitare l'aspirazione dei liquidi gastrici e la misurazione del VGR\***.


#### Facilità di utilizzo:

- Compat® Modum consente l'aspirazione a **circuito chiuso** dei residui gastrici all'interno di una sacca di raccolta del drenaggio, **riducendo così l'esposizione ai liquidi gastrici e al loro odore, nonché il rischio di contaminazione.**
- L'accessorio dispone di due rubinetti a 3 vie che consentono di **selezionare la direzione del flusso**, per passare facilmente dallo svuotamento gastrico alla nutrizione enterale o alla somministrazione di medicinali.
- È **compatibile** con la maggior parte delle sonde per nutrizione enterale, dei dispositivi di somministrazione di medicinali e dei dispositivi di drenaggio/aspirazione\*\*.

**Materiali sicuri:** Compat® Modum è **sterile e privo di DEHP, BPA e lattice\*\*\*.**

#### Compatibilità:

- Set di somministrazione: ENFit®
- Sonde per nutrizione enterale: ENFit® ed ENLock
- Siringhe: ENFit®, ENLock e Luer
- Dispositivi di drenaggio/aspirazione: connettore a imbuto\*\*

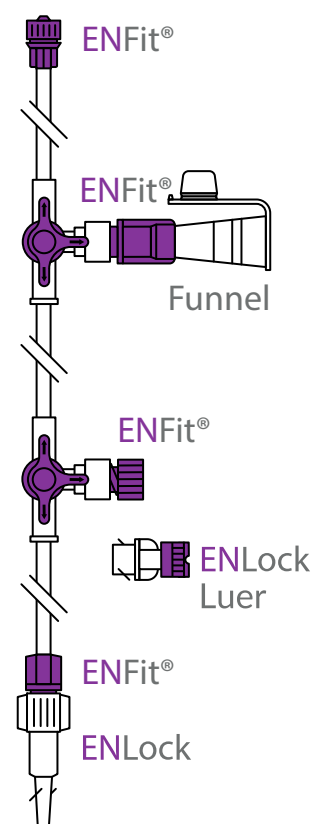


### Informazioni per gli ordini

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Compat® Modum	12340186	50

*La cura del paziente. La nostra priorità.*

# Accessorio per l'aspirazione e la misurazione dei residui gastrici a circuito chiuso

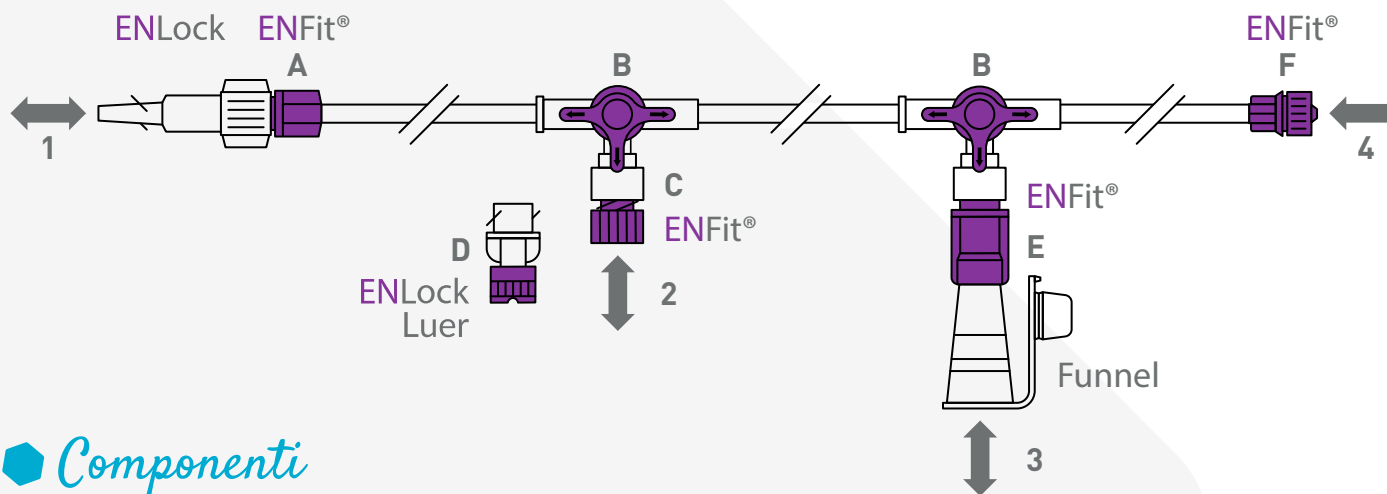

## Componenti

- A Estremità distale con connettore ENFit® femmina dotato di adattatore ENLock rimovibile
- B Rubinetti a 3 vie compatibili con ENFit® per selezionare la direzione del flusso
- C Porta maschio, compatibile con ENFit®, per siringa di drenaggio/somministrazione di medicinali, provvista di tappo
- D Adattatore ENFit® con tappo compatibile con dispositivi di somministrazione di medicinali/siringhe di drenaggio Luer, Oral ed ENLock
- E Connettore a imbuto con tappo compatibile con la maggior parte dei dispositivi di drenaggio/aspirazione\*\*
- F Connettore prossimale ENFit® maschio per collegamento al set di somministrazione

## Direzioni possibili del flusso

- 1 Verso/da sonda per nutrizione (collegamento lato paziente)
- 2 Verso/da siringa di drenaggio / Da dispositivo di somministrazione di medicinali
- 3 Verso/da dispositivi di drenaggio/aspirazione
- 4 Da set di somministrazione (collegamento lato nutrizione)

## Specifiche

- Sterile:** sterilizzato con ossido di etilene (EO).
- Lunghezza:** 12 cm.
- Confezionamento:** confezionato singolarmente in scatole da 50 pezzi (295 × 260 × 190 mm).
- Conservazione:** conservare all'asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.
- Durata:** fino a 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** fino a 7 giorni. Monouso.
- Standard ISO:** connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
- Marchio CE:** conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** classe IIa.
- Fabbricante legale:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilità:** sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
- Materiali:** tubi in PVC. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice\*\*\*.
- Paese di origine:** prodotto in Italia.

\*\*\*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.  
\*\*Non sono escluse alcune incompatibilità.  
Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito [www.compat.com](http://www.compat.com)  
\* Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.