

# Compat<sup>®</sup> Soft

## Gamma completa di sonde nasogastriche per nutrizione in poliuretano morbido

Le sonde nasogastriche per nutrizione Compat<sup>®</sup> Soft dotate di connettori ENFit<sup>®</sup> sono progettate per pazienti pediatrici e adulti che necessitano di somministrazione enterale, intermittente o continua, di sostanze nutritive, fluidi o medicinali per via nasoenterica naturale.

### Panoramica delle caratteristiche


Le sonde Compat<sup>®</sup> Soft sono progettate per aiutare ad aumentare il comfort del paziente.

**Comfort del paziente:** Le sonde per nutrizione Compat<sup>®</sup> Soft hanno una durata di impiego massima di 42 giorni e sono realizzate in poliuretano, un materiale rispettoso del paziente, che si ammorbidisce con la temperatura corporea. La configurazione arrotondata dell'estremità distale della sonda ne consente un inserimento non traumatico e la presenza di un solo connettore ENFit<sup>®</sup> contribuisce al comfort del paziente.

**Ausili per il posizionamento:** Le sonde sono dotate di contrasegni di profondità del posizionamento distanziati di 5 cm gli uni dagli altri, atti a valutare la profondità di inserimento e a controllare l'eventuale spostamento della sonda. È compreso un mandrino premontato per facilitare il posizionamento (opzionale). Il mandrino è lubrificato al fine di ridurre, durante la sua rimozione, il rischio di spostamento della sonda. È possibile procedere all'iniezione di fluidi radio-opachi o all'aspirazione del contenuto gastrico senza rimuovere il mandrino.

**Sicurezza del paziente:** Le sonde nasogastriche per nutrizione Compat<sup>®</sup> Soft con connettori ENFit<sup>®</sup> sono progettate per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di promuovere la sicurezza del paziente aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati. Tutte le sonde sono sterili e prive di DEHP, BPA e lattice<sup>1</sup>.

### Informazioni per gli ordini

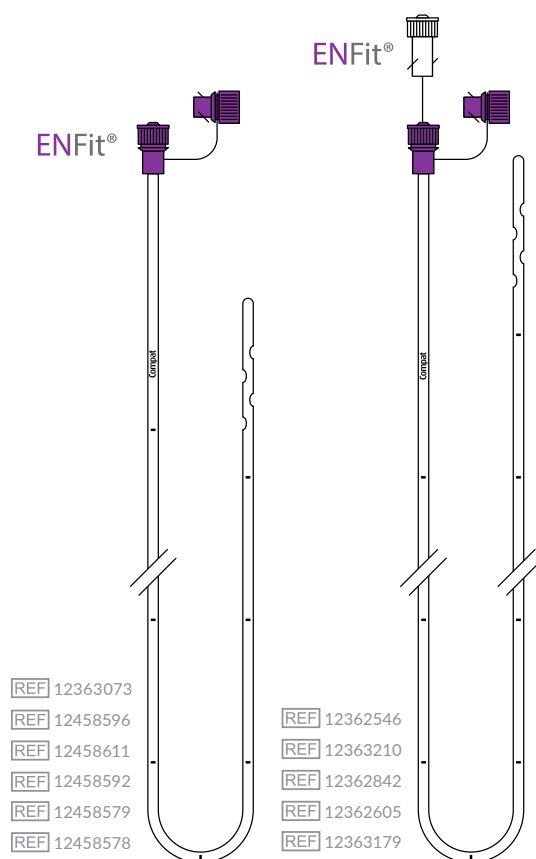


Nome prodotto	Codice prodotto	Calibro	Lunghezza	Sterile	Mandrino
Compat <sup>®</sup> Soft Junior 5FR 50 cm	12363073	5FR	50 cm	Si	No
Compat <sup>®</sup> Soft Junior 6FR 90 cm	12458596*	6FR	90 cm		Si
Compat <sup>®</sup> Soft Junior 6FR 90 cm S	12362546				No
Compat <sup>®</sup> Soft 8FR 120 cm	12458611*	8FR	120 cm		Si
Compat <sup>®</sup> Soft 8FR 120 cm S	12363210				No
Compat <sup>®</sup> Soft 10FR 120 cm	12458592*	10FR	120 cm		Si
Compat <sup>®</sup> Soft 10FR 120 cm S	12362842				No
Compat <sup>®</sup> Soft 12FR 120 cm	12458579*	12FR	120 cm		Si
Compat <sup>®</sup> Soft 12FR 120 cm S	12362605				No
Compat <sup>®</sup> Soft 14FR 120 cm	12458578*	14FR	120 cm		Si
Compat <sup>®</sup> Soft 14FR 120 cm S	12363179				No

\* Disponibile a breve

La cura del paziente. La nostra priorità.

# Gamma completa di sonde nasogastriche per nutrizione in poliuretano morbido

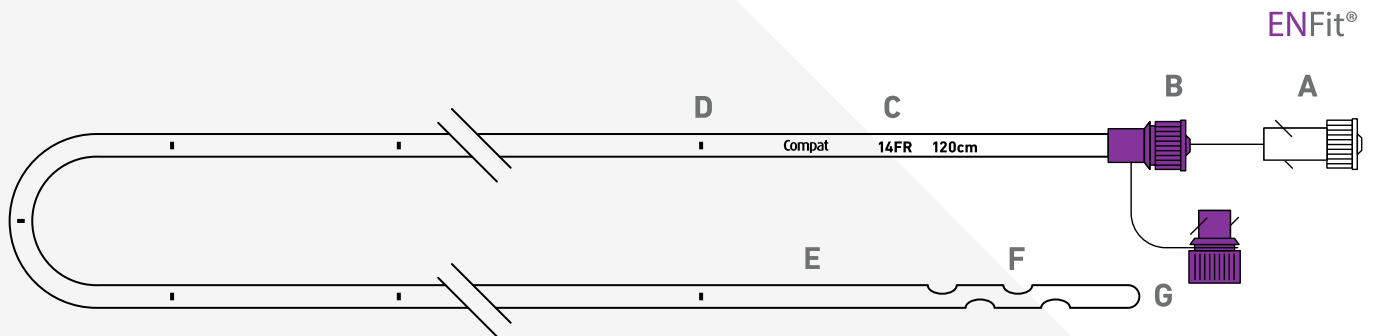

## Componenti

- A Mandrino prelubrificato e a circuito aperto ENFit® (opzionale)
- B Connettore ENFit® con chiusura a rotazione provvisto di tappo
- C Identificazione del prodotto, calibro (FR) e lunghezza stampati sul tubo
- D Contrassegni di profondità di posizionamento distanziati di 5 cm
- E Tubo in poliuretano morbido radio-opaco
- F Fori sulle pareti laterali del tubo
- G Estremità distale arrotondata

## Specifiche

- Sterile:** sterilizzato con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** confezionato singolarmente in scatole da 10 pezzi (220 × 90 × 240 mm).
- Conservazione:** conservare all'asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.
- Durata:** 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** fino a 42 giorni. Monouso.
- Lunghezza della sonda:** 50, 90 e 120 cm.
- Diametro della sonda:** da 5 a 14 FR.
- Standard ISO:** connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
- Marchio CE:** conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** classe IIb.
- Fabbricante legale:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilità:** sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
- Materiali:** tubo in poliuretano. Connettore ENFit® in copoliestere. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice<sup>1</sup>. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
- Paese di origine:** prodotto in Italia.

1. Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito [www.compat.com](http://www.compat.com)

<sup>®</sup> Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00047 REV.0 18 MARZO 2021