

Compat® StayPut

Sonda per nutrizione digiunale a doppio lume con sonda di drenaggio gastrico integrata

Compat® StayPut 9/18FR è una sonda per nutrizione digiunale che presenta una configurazione a lume doppio in cui una sonda è inserita all'interno di un'altra ed è provvista di connettore ENFit® e sonda di drenaggio gastrico integrata. È progettata per pazienti in condizioni patologiche critiche che necessitano di somministrazione per via enterale precoce di sostanze nutritive, fluidi o medicinali all'interno dell'intestino tenue e, contemporaneamente, di drenaggio gastrico, il tutto attraverso un'unica narice.


● *Panoramica delle caratteristiche*

Apprezzata dai medici: Compat® StayPut 9/18FR è progettata per le tecniche di posizionamento a visualizzazione diretta (ad esempio endoscopia o radiologia interventistica) e per semplificare la manipolazione endoscopica.

Ausili per il posizionamento: La sonda per aspirazione gastrica da 18 FR è dotata di contrassegni di profondità di posizionamento distanziati di 5 cm gli uni dagli altri, atti a valutare la profondità di inserimento e a controllare l'eventuale spostamento della sonda. Entrambe le sonde sono radio-opache e ciascuna presenta una punta altamente radio-opaca che rende più semplice confermare la precisione del posizionamento. È inoltre incluso un mandrino premontato e a circuito aperto per la sonda da 9 FR atto a semplificare il posizionamento. Il mandrino è lubrificato al fine di ridurre, durante la sua rimozione, il rischio di spostamento della sonda.

Sicurezza del paziente: La sonda per nutrizione digiunale è compatibile con tutti i set di somministrazione e le siringhe con connettori ENFit®. I connettori ENFit® sono progettati per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di promuovere la sicurezza del paziente aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati.

Il connettore a imbuto della sonda per aspirazione gastrica è compatibile con la maggior parte dei dispositivi di aspirazione*.

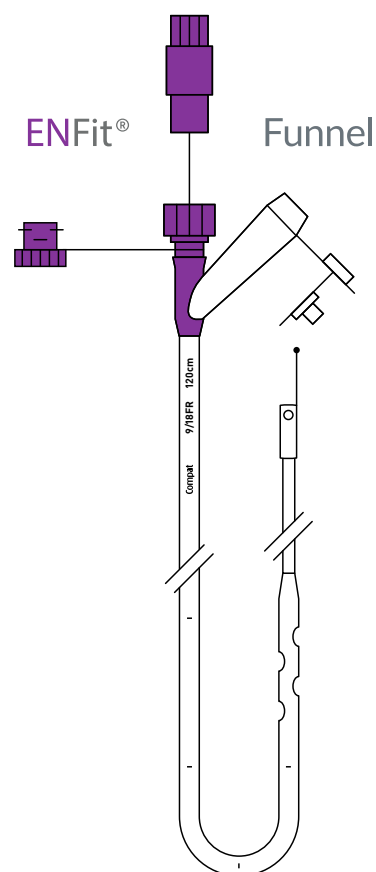


● *Informazioni per gli ordini*

Nome prodotto	Codice prodotto	Calibro/lunghezza	Mandrino	Sterile	Qtà / Confezione
Compat® StayPut 9/18FR 165/120 CM	12380234	Sonda per nutrizione digiunale: 9 FR, 165 cm	Si	Si	1
		Sonda per aspirazione gastrica: 18 FR, 120 cm			

La cura del paziente. La nostra priorità.


Sonda per nutrizione digiunale a doppio lume con sonda di drenaggio gastrico integrata

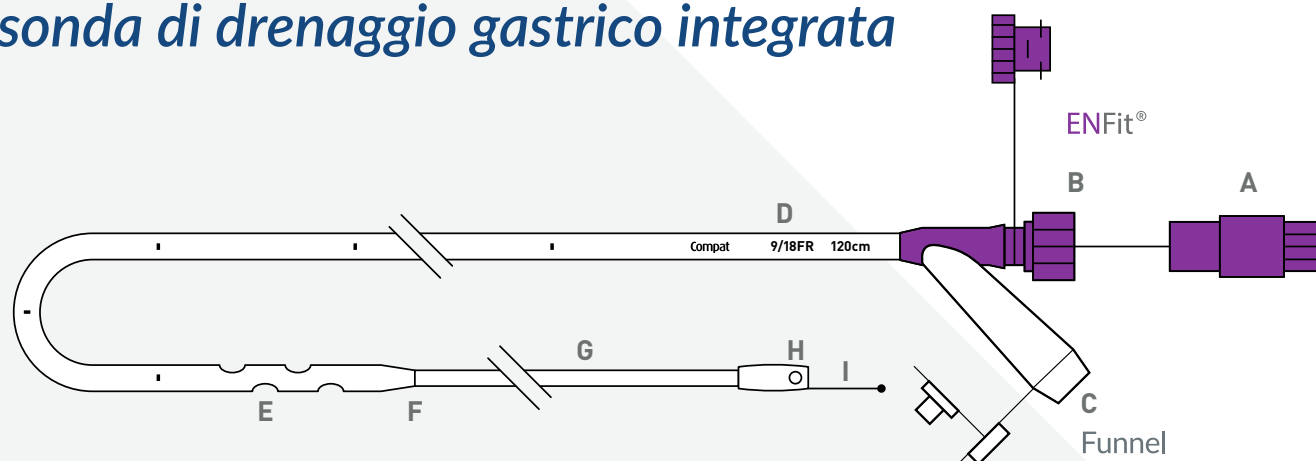

Componenti

- A** Mandrino pre-lubrificato e a circuito aperto ENFit®
- B** Connettore ENFit® per nutrizione con chiusura a rotazione provvisto di tappo
- C** Connettore a imbuto con tappo progettato per essere compatibile con la maggior parte dei dispositivi di drenaggio/aspirazione**
- D** Sonda radio-opaca per drenaggio gastrico da 18 FR/120 cm con contrassegni di profondità di posizionamento ogni 5 cm
- E** Quattro fori di drenaggio sulla parete laterale della sonda per coerenza con Compat Soft® (due su ciascun lato)
- F** Punta altamente radio-opaca
- G** Sonda per nutrizione digiunale radio-opaca da 9 FR/165 cm
- H** Punta altamente radio-opaca con due uscite per nutrizione laterali ed estremità distale aperta per il posizionamento over-the-wire (filo guida non incluso)
- I** Antenna per rendere più semplice la manipolazione endoscopica

Specifiche

Dimensioni della sonda: Gastrica da 18 FR/120 cm Ø 6,0/4,8 mm  Digiunale da 9 FR/165 cm Ø 3,0/2,2 mm

- Sterile:** sterilizzata con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** confezionata singolarmente in scatole da un pezzo (2,3 × 19 × 25 cm).
- Conservazione:** conservare all'asciutto, a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.
- Durata:** fino a 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** fino a 29 giorni. Monouso.
- Standard ISO:** connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
- Marchio CE:** conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** classe IIa.
- Fabbricante legale:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilità:** sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
- Materiali:** tubi in poliuretano. Connettore ENFit® in copoliestere. Connettore a imbuto in poliuretano. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*.
- Paese di origine:** prodotto in Italia.

*Non sono escluse alcune incompatibilità.
**Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.
Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com
* Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.