

Compat[®] Buddy

Gamme Complète de Boutons de Gastrostomie

Le bouton de gastrostomie à ballonnet Compat[®] Buddy est destiné aux patients qui requièrent une administration entérale intermittente ou continue de nutriments, de liquides ou de médicaments en site gastrique. Il convient également à la décompression gastrique.

Aperçu des Caractéristiques


Le bouton Compat[®] Buddy est disponible dans un large choix de tailles (12/14/16/18/20/24 FR) et de longueurs (0.8 à 6.5 cm) pour répondre à la plupart des besoins des patients et des exigences cliniques.

Confort du Patient :

- Sonde en silicone souple biocompatible et ballonnet en silicone haute résistance pour favoriser une durée d'utilisation maximale et limiter le remplacement du bouton.
- Extrémité distale entièrement recouverte pour préserver la paroi de l'estomac.
- Solution discrète et confortable pour offrir plus de liberté de mouvement au patient.

Facilité d'Utilisation : Le bouton Compat[®] Buddy est disponible sous forme de kit pratique pour faciliter le placement. Il est livré dans un emballage individuel stérile comportant deux étiquettes détachables pour améliorer la traçabilité.

Sécurité des Matériaux : Exempt de DEHP, de BPA et de latex*.

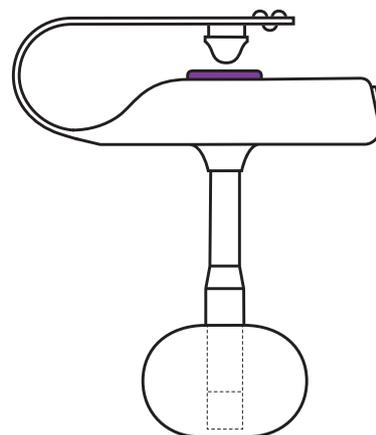


Informations de Commande

Longueur stomie (cm)	Charrière					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0.8	12466557	12466601	12466635	12466759	12466828	12466844
1.0	12466535	12466577	12466642	12466795	12466835	12466864
1.2	12466544	12466600	12466636	12466784	12466841	12466847
1.5	12460321	12460325	12466761	12466785	12466836	12466870
1.7	12466556	12460330	12460320	12466798	12466815	12466865
2.0	12466534	12460327	12460341	12466823	12466842	12466846
2.3	12466543	12466568	12466745	12466824	12466817	12466856
2.5	12466555	12460342	12460352	12466825	12466837	12466871
2.7	12466554	12466576	12466719	12466805	12466818	12466857
3.0	12466561	12466589	12460347	12466830	12466838	12466869
3.5	12466560	12460331	12466752	12466806	12466839	12466868
4.0	12466551	12466620	12466753	12466826	12466863	12466859
4.5	12466528	12466598	12466770	12466807	12466862	12466890
5.0	12466527	12466621	12466762	12466808	12466852	12466892
5.5		12466616		12466811		
6.0		12466632		12466809		
6.5		12466626				

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Gamme Complète de Boutons de Gastrostomie

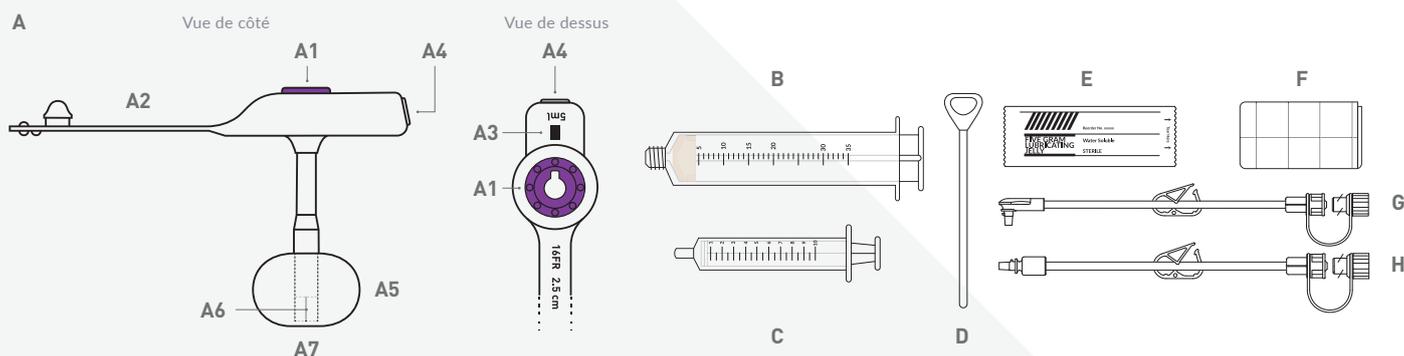

Composants

- A** Bouton de gastrostomie Compat® Buddy
A1 Port de nutrition violet avec valve anti-reflux. Compatible avec prolongateurs droits et coudés
A2 Bouchon avec indication de la taille en charrière (FR : French) et de la longueur du bouton
A3 Repère de position pour le prolongateur
A4 Valve de gonflage avec connecteur Luer et indication du volume du ballonnet en ml

Taille et volume du ballonnet						
Charrière (FR)	12	14	16	18	20	24
Volume de remplissage recommandé (ml)	3.0	4.0	5.0	5.0	8.0	8.0
Volume de remplissage max. (ml)	5.0	6.0	7.0	7.0	12.0	12.0

- A5** Ballonnet en silicone haute résistance
A6 Repère radio-opaque pour le placement par voie radiographique et contrôle de la position
A7 Extrémité distale entièrement recouverte
- B** Seringue ENFit® 35 ml compatible avec prolongateurs ENFit®
C Seringue Luer pour le gonflage du ballonnet
D Mandrin
E Lubrifiant hydrosoluble
F Compresse de gaze (2 unités)
G Prolongateur simple port ENFit® coudé de 30 cm
H Prolongateur simple port ENFit® droit de 30 cm

Caractéristiques

- Stérile :** Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO).
Emballage : Emballé en carton de 1 pièce.
Stockage : Stocker à température ambiante. Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Durée de conservation : 3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation : Indiqué pour une utilisation à long terme. À usage unique.
Taille et longueur : De 12 à 24FR et de 0.8 à 6.5 cm. Voir tableau au recto.
Marquage CE : Conforme à la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été attribuée par un organisme notifié agréé : TÜV SÜD (CE0123).
Classification : Classe IIb.
Fabricant légal : Degania Silicone Ltd.
Matériaux : Sonde en silicone. Exempt de DEHP, de BPA et de latex*. Informations supplémentaires sur demande.

*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué(e) médical(e) Compat® ou visitez www.compat.com

*Sauf mention contraire, toutes les marques sont utilisées avec permission.

AXI00044 RÉV.1 19 AVRIL 2021