

Compat[®] Buddy

Gamma Completa di Bottoni Gastrostomici

Il bottone gastrostomico a palloncino Compat Buddy è progettato per pazienti che necessitano di somministrazione enterale, intermittente o continua, in sede gastrica di sostanze nutritive, fluidi o medicinali. Adatto anche per la decompressione gastrica.

● Panoramica delle Caratteristiche


Il bottone Compat[®] Buddy è disponibile in varie dimensioni (12/14/16/18/20/24 FR) e lunghezze (da 0,8 a 6,5 cm) per soddisfare la maggior parte delle esigenze cliniche e dei pazienti.

Comfort del paziente:

- Sonda in silicone morbido biocompatibile e palloncino in silicone ad alta resistenza per massimizzare la durata di utilizzo e limitare le sostituzioni del bottone
- Con estremità distale ricoperta che permette di agire con delicatezza sulla parete dello stomaco
- Soluzione discreta e confortevole per offrire maggiore libertà di movimento al paziente

Facilità di utilizzo: Il bottone Compat[®] Buddy è disponibile sotto forma di pratico kit per facilitare il posizionamento. Il kit è fornito in una confezione singola sterile con due etichette rimovibili per migliorarne la tracciabilità.

Materiali sicuri: privi di DEHP, BPA e lattice*.

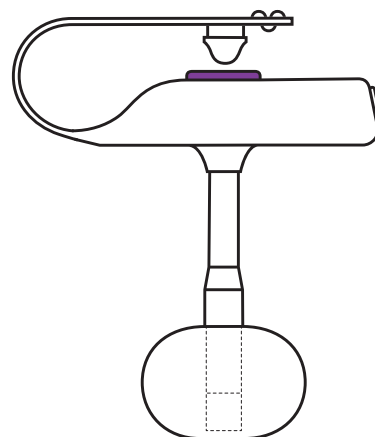


● Informazioni per gli Ordini

Lunghezza dello stoma (cm)	Calibro					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0,8	12466557	12466601	12466635	12466759	12466828	12466844
1,0	12466535	12466577	12466642	12466795	12466835	12466864
1,2	12466544	12466600	12466636	12466784	12466841	12466847
1,5	12460321	12460325	12466761	12466785	12466836	12466870
1,7	12466556	12460330	12460320	12466798	12466815	12466865
2,0	12466534	12460327	12460341	12466823	12466842	12466846
2,3	12466543	12466568	12466745	12466824	12466817	12466856
2,5	12466555	12460342	12460352	12466825	12466837	12466871
2,7	12466554	12466576	12466719	12466805	12466818	12466857
3,0	12466561	12466589	12460347	12466830	12466838	12466869
3,5	12466560	12460331	12466752	12466806	12466839	12466868
4,0	12466551	12466620	12466753	12466826	12466863	12466859
4,5	12466528	12466598	12466770	12466807	12466862	12466890
5,0	12466527	12466621	12466762	12466808	12466852	12466892
5,5		12466616		12466811		
6,0		12466632		12466809		
6,5		12466626				

La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.

Gamma Completa di Bottoni Gastrostomici

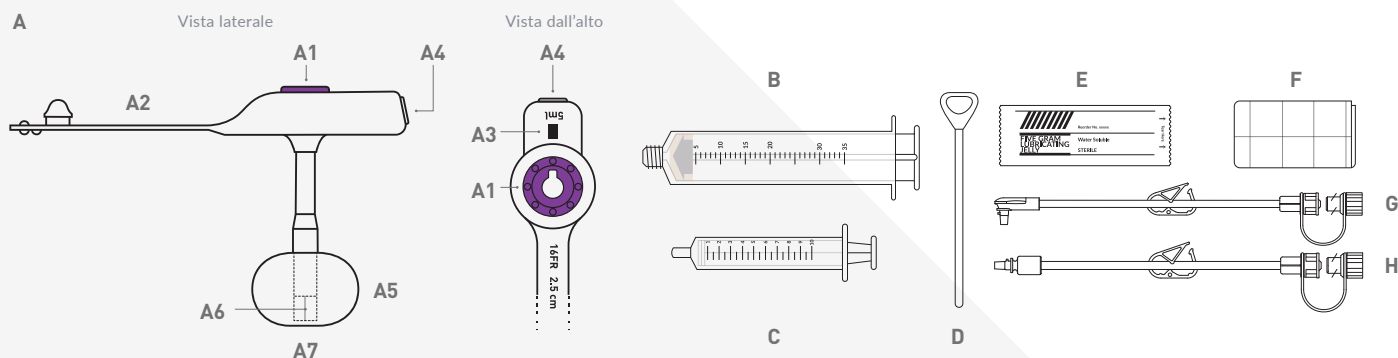

Componenti

- A** Bottone gastrostomico Compat® Buddy
A1 Porta per nutrizione di colore viola con valvola antiriflusso. Compatibile con set di estensione con connettore dritto e ad angolo retto
A2 Tappo con indicazione del calibro in French e della lunghezza
A3 Contrassegno di posizionamento per il set di estensione
A4 Valvola di gonfiaggio con connettore Luer e indicazione del volume del palloncino in ml

Calibro del bottone e volume del palloncino						
Calibro (FR)	12	14	16	18	20	24
Volume di gonfiaggio consigliato	3,0	4,0	5,0	5,0	8,0	8,0
Volume di gonfiaggio massimo	5,0	6,0	7,0	7,0	12,0	12,0

- A5** Palloncino in silicone ad alta resistenza
A6 Striscia radio-opaca per posizionamento e conferma della posizione
A7 Punta distale ricoperta

- B** Siringa ENFit® da 35 ml compatibile con i set di estensione ENFit®
C Siringa Luer per gonfiaggio del palloncino
D Mandrino
E Lubrificante idrosolubile
F Garze (2 pezzi)
G Set di estensione ENFit® singolo da 30 cm con connettore ad angolo retto
H Set di estensione ENFit® singolo da 30 cm con connettore dritto

Specifiche

- Sterile:** Sterilizzato con ossido di etilene (EO).
Confezionamento: Confezionato singolarmente.
Conservazione: Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente e in un ambiente asciutto. Tenere al riparo dalla luce solare e da radiazioni termiche.
Durata: 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego: Indicato per uso a lungo termine. Monouso.
Calibro e lunghezza: Da 12 a 24 FR e da 0,8 a 6,5 cm. Vedere tabella a pagina 1.
Marchio CE: Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
Classificazione: Classe IIb.
Fabbricante legale: Degania Silicone Ltd.
Materiali: Tubo in silicone. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*.

*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com
 * Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00044 REV.0 28 APRILE 2021

Compat®