

# Compat<sup>®</sup> Buddy

## Dispositif de Mesure pour Stomie

Le dispositif de mesure pour stomie Compat<sup>®</sup> Buddy est indiqué pour déterminer la profondeur d'une stomie gastrique afin de sélectionner la taille adéquate du bouton de gastrostomie Compat<sup>®</sup> Buddy.


### Aperçu des Caractéristiques

Le dispositif Compat<sup>®</sup> Buddy est composé d'un tube avec échelle graduée, d'un disque mobile et d'un ballonnet de rétention pour permettre de mesurer la longueur de la stomie.

**Confort du Patient :** Le dispositif de mesure pour stomie Compat<sup>®</sup> Buddy permet de sélectionner la longueur adaptée du bouton de gastrostomie Compat<sup>®</sup> Buddy pour **réduire le risque de fuites gastriques et d'irritation de la peau.**

**Sécurité des Matériaux :** Le dispositif de mesure pour stomie Compat<sup>®</sup> Buddy est stérile et exempt de DEHP, de BPA et de latex<sup>1</sup>.

**Gamme Complète :** Le dispositif de mesure pour stomie Compat<sup>®</sup> Buddy fait partie d'une gamme complète de boutons de gastrostomie et d'accessoires permettant de **répondre à la plupart des exigences cliniques** pour l'administration de la nutrition entérale de longue durée.

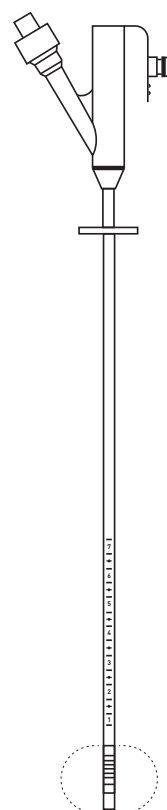

### Informations de Commande

Désignation	Référence	Unité de vente
Compat <sup>®</sup> Buddy Dispositif de Mesure pour Stomie	12461149	2

*Les Soins aux Patients. Notre Priorité.*

# Dispositif de Mesure pour Stomie



## Composants

- A Valve de gonflage avec connecteur Luer
- B Connecteur godet avec bouchon de fermeture
- C Disque mobile
- D Tube de 12FR (charrière) avec échelle graduée tous les centimètres et repères tous les 0.25 cm
- E Ballonnet de rétention en silicone de 5 ml

## Caractéristiques

- Stérile :** Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
- Emballage :** Emballage individuel en carton de 2 pièces.
- Stockage :** Stocker à température ambiante. Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Durée de conservation :** 3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
- Durée d'utilisation :** À usage unique.
- Taille :** 12FR 5 ml.
- Marquage CE :** Conforme à la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été attribuée par un organisme notifié agréé : TÜV SÜD (CE0123).
- Classification :** Classe I (sterile).
- Fabricant légal :** Degania Silicone Ltd.
- Matériaux :** Silicone. Exempt de DEHP, de BPA et de latex\*. Informations supplémentaires sur demande.

\*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué(e) médical(e) Compat® ou visitez [www.compat.com](http://www.compat.com)  
\*Sauf mention contraire, toutes les marques sont utilisées avec permission.

AXI00333 RÉV.1 04 MAI 2021

# Compat®