

Compat[®] Flexibaggle[®]

Réservoir Entéral Vide Pliable 1,5 L

Le réservoir vide pliable Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 L avec connecteur ENPlus est indiqué pour l'administration de solutions nutritives et/ou de liquides par la voie entérale. Pour utilisation avec une tubulure d'administration.

Aperçu des Caractéristiques


Le réservoir Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 L est conçu pour contribuer à améliorer les soins aux patients.

Facilité d'Utilisation : Le système de suspension intégré et la large ouverture facilitent le remplissage. Le Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 L est pliable pour économiser de l'espace de stockage et être ainsi facilement à portée de main.

Usage Mobile : Le récipient résiste aux chutes jusqu'à 1,5 m et est composé d'un bouchon facile à refermer en un quart de tour pour assurer l'étanchéité, ce qui réduit le risque de fuite et permet d'utiliser le produit également en déplacement.

Sécurité du Patient : Le Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 L dispose d'un connecteur ENPlus conforme à la norme ISO 18250-3. Le connecteur ENPlus est conçu pour être incompatible IV pour promouvoir la sécurité du patient en contribuant à éviter les connexions involontaires. Il est fabriqué en éthylène-acétate de vinyle (EVA), un matériau souple compatible avec les aliments. Il est stérile et exempt de DEHP, de BPA et de latex*.

Écologique : Le Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 L est pliable, ce qui réduit l'impact environnemental lors du transport.

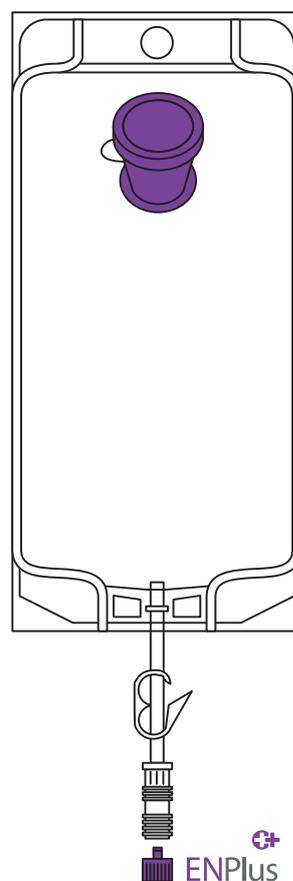


Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente/carton
Compat [®] Flexibaggle [®] 1,5 L	12306162	30

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Réservoir Entéral Vide Pliable de 1,5 L

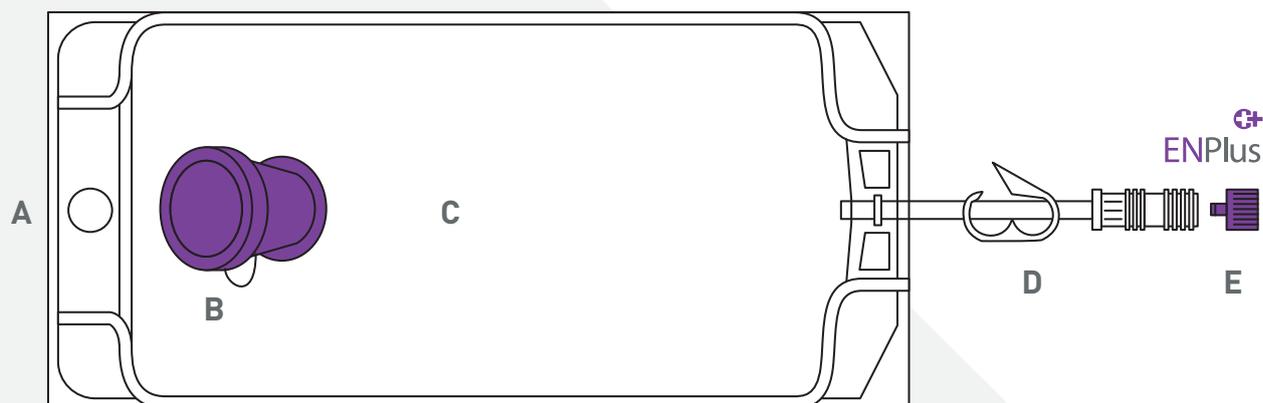

Composants

- A Système de suspension intégré
- B Large ouverture pour le remplissage avec bouchon à vis sécurisé
- C Réservoir de 1,5 L avec graduations (à 50 ml puis chaque 100 ml) et zones pour indication des données du patient (nom, formule, volume, débit, date)
- D Clamp de fermeture
- E Connecteur ENPlus spécifique à la nutrition entérale avec bouchon

Spécifications

- | | |
|-------------------------|--|
| Large ouverture : | Diamètre intérieur nominal : ± 38 mm. |
| Taille de la poche : | Taille nominale maximale : $\pm 326 \times 190$ mm. |
| Stérile : | Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO). |
| Emballage : | Emballé individuellement en carton de 30 pièces (58.5 x 38.5 x 16 cm). |
| Stockage : | Stocker à température ambiante. Tenir à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité. |
| Durée de conservation : | 3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage. |
| Durée d'utilisation : | 24 heures. A usage unique. |
| Norme ISO : | Connecteur ENPlus conforme à la norme ISO 18250-3. |
| Marquage CE : | Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.
Une certification CE a été délivrée par un organisme notifié accrédité: TÜV SÜD (CE0123). |
| Classification : | Classe Is. |
| Fabricant légal : | Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI). |
| Développement durable : | Système de gestion de l'environnement conforme à la norme ISO 14001:2015. |
| Matériaux : | Réservoir: EVA. Tube : PVC. Tous les matériaux sont exempts de DEHP, de BPA et de latex*.
Informations supplémentaires sur demande. |
| Pays d'origine : | Fabriqué en Italie. |

*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez www.compat.com.
*Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales sont utilisées avec permission.

AXI00032 RÉV.1 04 MAI 2021

Compat®