

Compat[®] Flexibaggle[®]

Réservoir Entéral Vide Pliable 500 ml

Le réservoir vide pliable Compat[®] Flexibaggle[®] 500 ml avec connecteur ENPlus est indiqué pour l'administration de solutions nutritives et/ou de liquides par la voie entérale. Pour utilisation avec une tubulure d'administration.

● Aperçu des Caractéristiques


Le réservoir vide pliable Compat[®] Flexibaggle[®] 500 ml est conçu pour contribuer à **améliorer les soins aux patients**.

Facilité d'Utilisation : Ses propriétés autoportantes et sa large ouverture permettent une **manipulation facile** et contribuent à **éviter les fuites accidentelles**. Compat[®] Flexibaggle[®] 500 ml est pliable **pour économiser de l'espace de stockage** et être ainsi **facilement à portée de main**.

Usage Mobile : Chaque port du réservoir Compat[®] Flexibaggle[®] 500 ml dispose d'un système de fermeture à vis résistant qui contribue à éviter les fuites; ce qui le rend **idéal pour une utilisation ambulatoire**, par exemple avec le sac à dos Compat Ella[®].

Sécurité du Patient : Le réservoir Compat[®] Flexibaggle[®] 500 ml comporte un connecteur ENPlus conforme à la norme ISO 18250-3. Les connecteurs ENPlus sont conçus pour être incompatibles IV pour **promouvoir la sécurité du patient** en contribuant à éviter les connexions involontaires. Il est en polyéthylène, un matériau compatible avec les aliments. Il est **stérile et exempt de DEHP, de BPA et de latex***.

Écologique : Le Compat[®] Flexibaggle[®] 500 ml est pliable, ce qui **réduit l'impact environnemental lors du transport**.

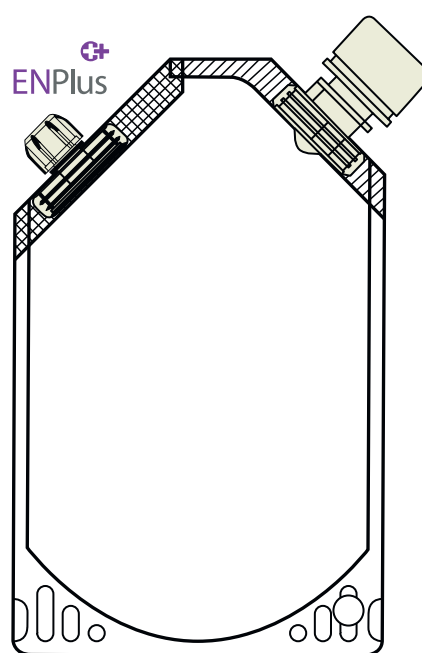


● Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente/carton
Compat [®] Flexibaggle [®] 500 ml	12440917	30

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Réservoir Entéral Vide Pliable de 500 ml

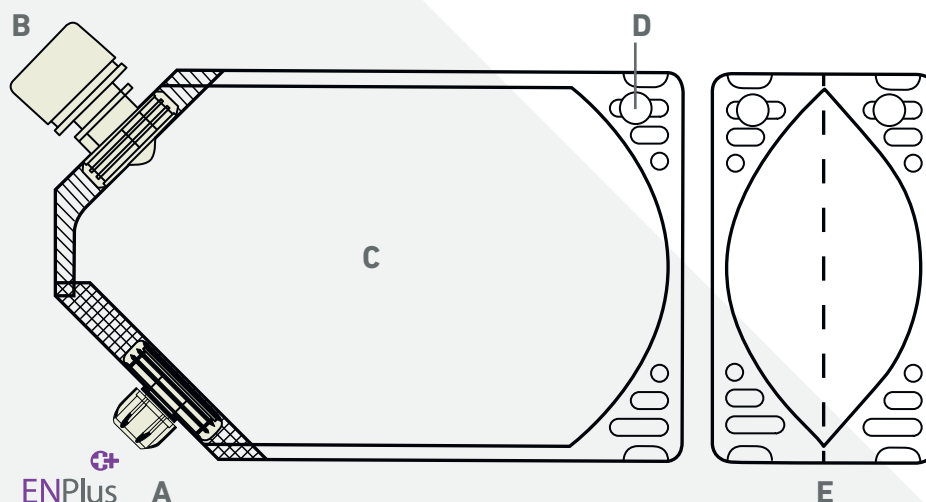

Composants

- A Connecteur ENPlus spécifique à la nutrition entérale avec bouchon
- B Large ouverture pour le remplissage avec bouchon à vis sécurisé
- C Réservoir Flexibaggle® 500 ml avec graduations (à 250 ml et 500 ml) et zones pour indication des données du patient (nom, formule, volume, débit, date)
- D Système de suspension au statif
- E Base autoportante pliable, vue du dessous

Spécifications

Large ouverture :	Diamètre intérieur nominal : $\pm 21,5$ mm.
Taille de la poche :	Taille nominale maximale : $\pm 130 \times 210$ mm.
Stérile :	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
Emballage :	Emballé individuellement en carton de 30 pièces (29.5 x 25 x 17 cm seulement).
Stockage :	Stocker à température ambiante. Tenir à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité.
Durée de conservation :	3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation :	24 heures. A usage unique.
Norme ISO :	Connecteur ENPlus conforme à la norme ISO 18250-3.
Marquage CE :	Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été délivrée par un organisme notifié accrédité: TÜV SÜD (CE0123).
Classification :	Classe Is.
Fabricant légal :	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Développement durable :	Système de gestion de l'environnement conforme à la norme ISO 14001:2015.
Matériaux :	Réservoir: PE (polyéthylène). Tous les matériaux sont exempts de DEHP, de BPA et de latex*. Informations supplémentaires sur demande.
Pays d'origine :	Fabriqué en Italie.

*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez www.compat.com.
*Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales sont utilisées avec permission.

AXI00033 RÉV.1 04 MAI 2021

Compat®