

Compat[®] Buddy

Gama Completa de Sistemas de Extensión para Sondas de Gastrostomía de Perfil Bajo

Los sistemas de extensión para sondas de gastrostomía de perfil bajo Compat[®] Buddy están diseñados para la administración enteral de nutrientes, líquidos y/o medicación. Indicados para pacientes que necesitan soporte nutricional y llevan una sonda de gastrostomía de perfil bajo (botón). También son aptos para la descompresión gástrica pasiva.

Características Generales

Múltiples Tamaños y Funciones:

- Conector en ángulo recto para **alimentación continua** y conector recto para **alimentación en bolo**.
- Disponible en longitudes de 5, 30 y 60 cm para **satisfacer las diversas necesidades del paciente y el profesional sanitario**.
- Doble puerto para **facilitar la administración de medicación** (opcional).
- Tapón a rosca y abrazadera de cierre (opcional) para **ayudar a prevenir pérdidas de fluidos y facilitar la manipulación**.

Compatibilidad:


- Los sistemas de extensión Compat[®] Buddy son **compatibles con el botón Compat[®] Buddy**, así como con la mayoría de **botones gástricos**, como Mic-Key[®], Aquarius[™], MiniONE[®] y Freka[®] Belly, entre otros.
- Compatibles únicamente con sistemas de administración y jeringas con conector ENFit[®] para **garantizar la seguridad del paciente**.

Seguridad del Paciente: Los conectores ENFit[®] están fabricados de conformidad con la norma ISO 80369-3. Están diseñados para ser incompatibles con la administración IV, con el objetivo de **incrementar la seguridad del paciente** impidiendo errores de conexión accidentales.

Materiales Seguros: Libres de DEHP, BPA y látex*.


Información de Pedido

	Conector	Puerto ENFit [®]	Longitud (cm)	Código	Unidad de venta
Sistema de Extensión para Sondas de Gastrostomía de Perfil Bajo Compat [®] Buddy	En ángulo recto	Doble	5	12475125	10
	En ángulo recto	Doble	30	12475124	
	En ángulo recto	Doble	60	12474948	
	En ángulo recto	Simple	30	12475113	
	En ángulo recto	Simple	60	12474936	
	Recto	Simple	30	12474949	
	Recto	Simple	60	12474937	

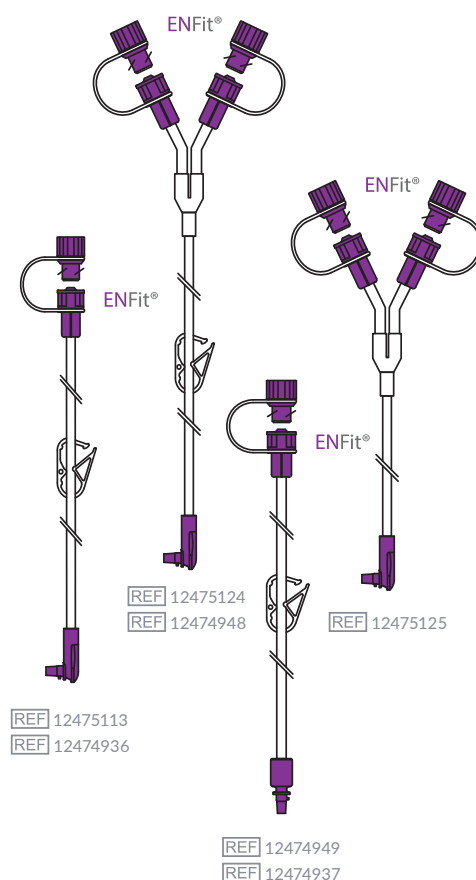

El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.

Gama Completa de Sistemas de Extensión para Sondas de Gastrostomía de Perfil Bajo

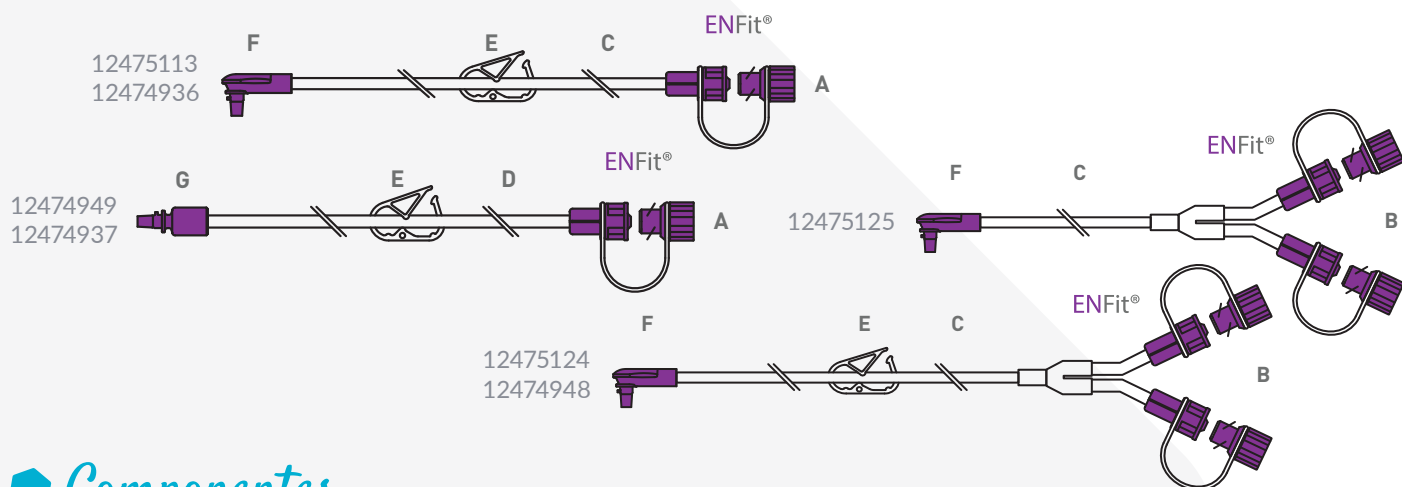

Componentes

- A** Puerto de nutrición ENFit® con cierre giratorio con tapón y sujeción
- B** Puerto de nutrición ENFit® doble con cierre giratorio con tapón y sujeción
- C** Diámetro externo de sonda de PVC estándar 4,15 mm
- D** Diámetro externo de sonda de PVC ancha 5,4 mm
- E** Abrazadera de cierre
- F** Conector en ángulo recto con marcador de alineación (conexión con la sonda en el lado del paciente)
- G** Conector recto con marcador de alineación (conexión con la sonda en el lado del paciente)

Especificaciones Técnicas

Estéril:	Esterilizados con óxido de etileno (EO).
Embalaje:	Embalados individualmente en cajas de: 10 unidades (19 x 19 x 10 cm).
Almacenaje:	Almacenar a temperatura ambiente, alejados de la luz solar.
Período de validez:	3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
Duración de uso:	Hasta 7 días, 5 usos por día.
Longitud de la sonda:	5, 30 y 60 cm.
Diámetro exterior de la sonda:	4,15 mm (REF con conector en ángulo recto) o 5,4 mm (REF con conector recto).
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3.
Marca CE:	Cumplen la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
Clasificación:	Clase IIa.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilidad:	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
Materiales:	Conexiones: PVC. Conectores ENFit® y de botón: copoliéster. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen:	Fabricados en Italia.

*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No están formulados con látex de caucho natural. Las marcas ENFit® y Compat® se utilizan con la debida autorización. Mic-Key® es una marca registrada de Halyard Health, Inc. o sus afiliados. Freka® es una marca registrada de Fresenius Kabi AG. MiniONE® es una marca registrada de Applied Medical Technology, Inc. Aquarius™ es una marca registrada de Degania Medical, Inc.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com

AXI00469 REV.0 07 DE JUNIO DE 2021

Compat®