

Compat[®] Buddy

Gama Completa de Sondas de Gastrostomía de Perfil Bajo

La sonda de gastrostomía de perfil bajo (botón) Compat[®] Buddy está diseñada para su uso en pacientes que requieren una administración enteral intermitente o continua de nutrientes, fluidos o medicación al tracto digestivo. También es apta para la descompresión gástrica.

Características Generales


Compat[®] Buddy está disponible en gran variedad de tamaños (12/14/16/18/20/24 Fr) y longitudes (0,8 a 6,5 cm) para satisfacer las diversas necesidades del paciente y el profesional sanitario.

Confort del Paciente:

- Balón altamente resistente de silicona suave bio-compatible que prolonga la vida útil y reduce la necesidad de sustitución de la sonda.
- Con extremo distal diseñado para proteger la pared del estómago.
- Solución discreta y cómoda que ofrece al paciente una mayor libertad de movimiento.

Uso Sencillo: Compat[®] Buddy está disponible en forma de cómodo kit para facilitar su colocación. El kit se entrega en un envase individual estéril con dos etiquetas extraíbles para mejorar la trazabilidad.

Materiales Seguros: Libre de DEHP, BPA y látex*.

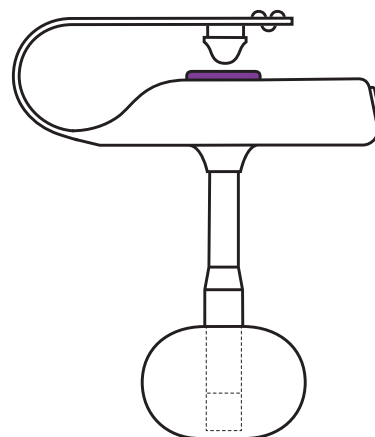


Información de Pedido

Longitud de estoma (cm)	Calibre					
	12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr	20 Fr	24 Fr
0,8	12466557	12466601	12466635	12466759	12466828	12466844
1,0	12466535	12466577	12466642	12466795	12466835	12466864
1,2	12466544	12466600	12466636	12466784	12466841	12466847
1,5	12460321	12460325	12466761	12466785	12466836	12466870
1,7	12466556	12460330	12460320	12466798	12466815	12466865
2,0	12466534	12460327	12460341	12466823	12466842	12466846
2,3	12466543	12466568	12466745	12466824	12466817	12466856
2,5	12466555	12460342	12460352	12466825	12466837	12466871
2,7	12466554	12466576	12466719	12466805	12466818	12466857
3,0	12466561	12466589	12460347	12466830	12466838	12466869
3,5	12466560	12460331	12466752	12466806	12466839	12466868
4,0	12466551	12466620	12466753	12466826	12466863	12466859
4,5	12466528	12466598	12466770	12466807	12466862	12466890
5,0	12466527	12466621	12466762	12466808	12466852	12466892
5,5		12466616		12466811		
6,0		12466632		12466809		
6,5		12466626				

El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.

Gama Completa de Sondas de Gastrostomía de Perfil Bajo

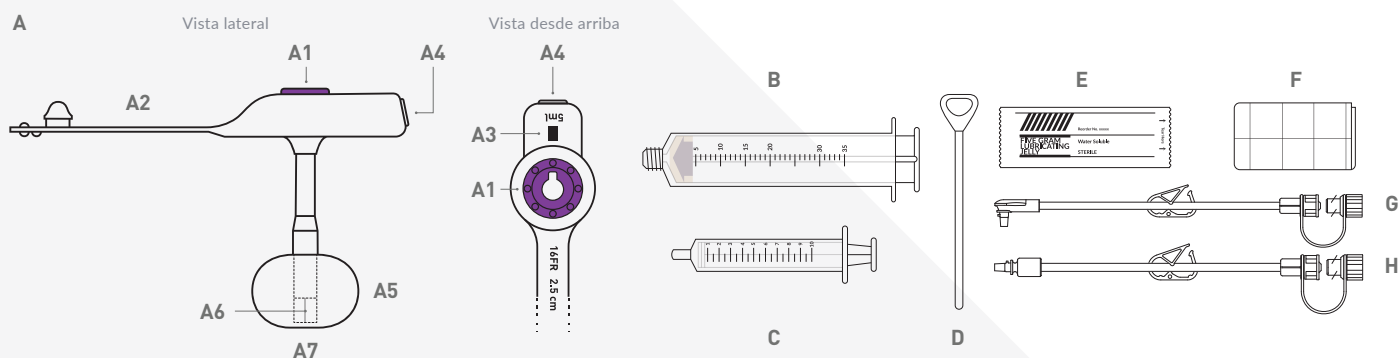

Componentes

- A** Sonda de gastrostomía de perfil bajo Compat® Buddy
 - A1** Puerto de nutrición en color morado con válvula antirreflujo. Compatible con sistemas de extensión rectos y en ángulo recto
 - A2** Tapón con indicación de calibre y longitud
 - A3** Marca de posición para el sistema de extensión
 - A4** Válvula de inflado del balón con conector Luer e indicación del volumen del balón, en ml

Tamaño del botón y volumen del balón						
Calibre (Fr)	12	14	16	18	20	24
Volumen (ml)	3,0	4,0	5,0	5,0	8,0	8,0

- A5** Balón de silicona de larga duración
- A6** Tira radiopaca para colocación y confirmación del posicionamiento
- A7** Extremo distal recubierto
- B** Jeringa ENFit® de 35 ml compatible con los sistemas de administración ENFit®
- C** Jeringa Luer para inflado del balón
- D** Fiador
- E** Lubricante soluble en agua
- F** Apósitos (2 unidades)
- G** Sistema de extensión con un puerto ENFit® de 30 cm con conector en ángulo recto
- H** Sistema de extensión con un puerto ENFit® de 30 cm con conector recto

Especificaciones Técnicas

- Estéril:** Esterilizadas con óxido de etileno (EO).
- Embalaje:** Embaladas individualmente.
- Almacenaje:** Almacenar en el envase original a temperatura ambiente y en un lugar seco. Evitar la luz solar directa y la radiación térmica.
- Período de validez:** 3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
- Duración de uso:** Indicadas para uso a largo plazo. Un solo uso.
- Calibre y longitud:** De 12 a 24 Fr y de 0,8 a 6,5 cm. Véase la tabla de la página 1.
- Marca CE:** Cumplen la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
- Clasificación:** Clase IIb.
- Fabricante legal:** Degania Silicone Ltd.
- Materiales:** Sonda: silicona. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*.

*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No están formuladas con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com
 *Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI00044 REV.07 DE JUNIO DE 2021