

# Compat<sup>®</sup> Buddy

## Dispositivo de Medición de Estoma

El dispositivo de medición de estoma Compat<sup>®</sup> Buddy está diseñado para determinar la profundidad de un canal de estoma bien establecido por la gastrostomía, y facilitar la selección de la longitud del botón de gastrostomía Compat<sup>®</sup> Buddy adecuado.


### Características Generales

El dispositivo de medición de estoma Compat<sup>®</sup> Buddy incluye un eje tubular con escala graduada, disco móvil y balón de retención para medir la longitud del estoma.

**Confort del Paciente:** El dispositivo de medición de estoma Compat<sup>®</sup> Buddy permite seleccionar la longitud adecuada del botón de gastrostomía Compat<sup>®</sup> Buddy para **ayudar a prevenir las pérdidas gástricas y la irritación cutánea.**

**Materiales Seguros:** El dispositivo de medición de estoma Compat<sup>®</sup> Buddy es estéril y está libre de DEHP, BPA y látex\*.

**Una Gama Versátil:** El dispositivo de medición de estoma Compat<sup>®</sup> Buddy pertenece a una gama completa de accesorios y botones de gastrostomía **diseñados para satisfacer la mayoría de las necesidades clínicas** relacionadas con la nutrición enteral a largo plazo.

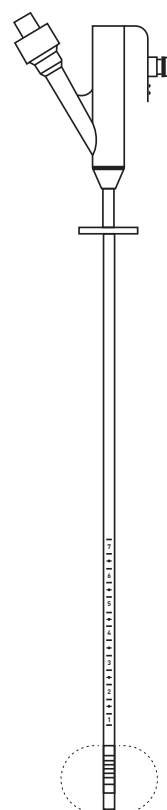


### Información de Pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Dispositivo de Medición de Estoma Compat <sup>®</sup> Buddy	12461149	2

*El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.*

# Dispositivo de Medición de Estoma

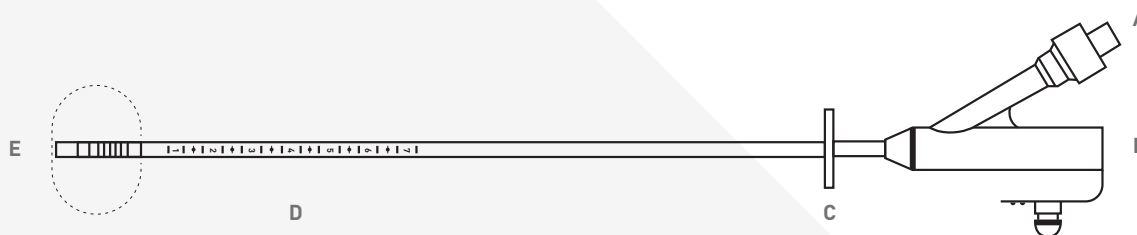

## Componentes

- A Válvula de inflado del balón con conector Luer
- B Conector tipo embudo con tapón de cierre
- C Disco móvil
- D Eje de sonda de 12 Fr con escala graduada cada centímetro y marcas cada 0,25 cm
- E Balón de retención de silicón de 5 ml

## Especificaciones Técnicas

- Estéril:** Esterilizado con óxido de etileno (EO).
- Embalaje:** Embalado individualmente en cajas de 2 unidades.
- Almacenaje:** Almacenar en el envase original a temperatura ambiente y en un lugar seco. Evitar la luz solar directa y la radiación térmica.
- Período de validez:** 3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
- Duración de uso:** un solo uso.
- Calibre:** 12 Fr, 5 ml.
- Marca CE:** Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
- Clasificación:** Clase I (estéril).
- Fabricante legal:** Degania Silicone Ltd.
- Materiales:** Silicón. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex\*. Detalles adicionales bajo solicitud.

\*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No está formulado con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite [www.compat.com](http://www.compat.com)  
\*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI00333 REV.0 07 DE JUNIO DE 2021

# Compat®