

Compat ella®

Compat Ella® Línea Spike

La Línea Spike Compat Ella® está indicada para la administración enteral de nutrientes, líquidos o medicación, y es apta para su uso con la bomba de nutrición enteral Compat Ella®.

Características Generales

La Línea Spike Compat Ella® consta de un conector enteral ENPlus, un puerto de medicación de 3 vías compatible con ENFit® y un extremo distal ENFit® (conexión con la sonda en el lado del paciente).


Nutrición Fiable: la Línea Spike Compat Ella® integra la tecnología de seguridad patentada Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). El sistema AAFF está integrado en el cassette y siempre está activo para **garantizar la seguridad del paciente**.

Conectores más Seguros: la Línea Spike Compat Ella® incluye conectores ENFit® fabricados de conformidad con la norma ISO 80369-3, así como un conector ENPlus fabricado de conformidad con la norma ISO 18250-3. Los conectores ENFit® y ENPlus están diseñados para ser incompatibles con la administración IV, con el objetivo de **incrementar la seguridad del paciente** impidiendo errores de conexión accidentales.

Materiales Seguros: La Línea Spike Compat Ella® es **estéril** y está libre de DEHP, BPA y látex*.

Compatibilidad:

- Contenedores de nutrición: ENPlus
- Sondas de nutrición enteral: ENFit®
- Jeringas: ENFit®

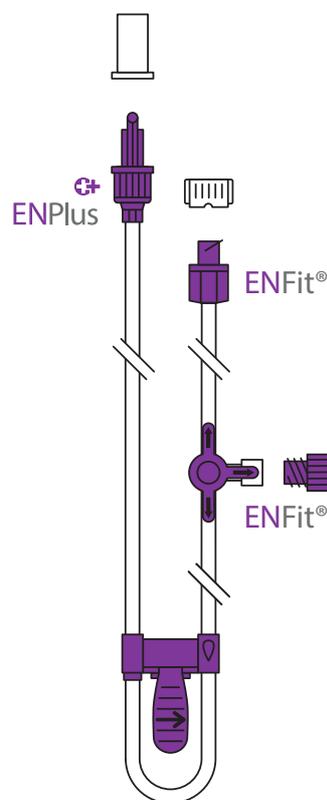


Información de Pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Línea Spike Compat Ella®	12298203	30

¿Conoces a Compat Ella®?

Compat Ella® Línea Spike

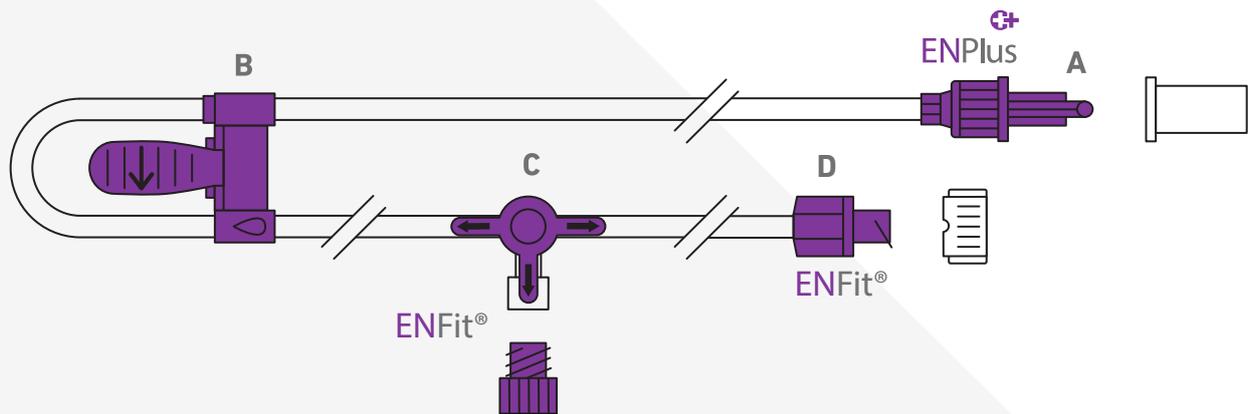

Componentes

- A** Conector ENPlus exclusivamente para uso enteral (conexión de nutrición) con cierre a rosca y tapón
- B** Cassette para insertar en la bomba Compat Ella® con función de seguridad Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) integrada y patentada
- C** Puerto de medicación de 3 vías compatible con tapón ENFit®
- D** Extremo distal ENFit® con tapón (conexión con la sonda en el lado del paciente)

Especificaciones Técnicas

Estéril:	Esterilizada con óxido de etileno (EO).
Embalaje:	Embalada individualmente en cajas de 30 unidades (29,5 x 26 x 19 cm).
Almacenaje:	Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejada del sol y la humedad.
Período de validez:	3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
Duración de uso:	24 horas. Un solo uso.
Longitud:	Distancia de la conexión de nutrición a la conexión de la sonda en el lado del paciente: 230 cm. Distancia del conector de nutrición a la bomba: 50 cm.
Diámetros:	Diámetro interno nominal: 3,0 mm. Diámetro externo nominal: 4,15 mm.
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3 y conector ENPlus fabricado de conformidad con la norma ISO 18250-3.
Marca CE:	Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
Clasificación:	Clase IIa.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilidad:	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
Materiales:	Conexiones: PVC y silicona. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen:	Fabricada en Italia.

*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No está formulada con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com

*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI00405 REV.0 14 DE JUNIO DE 2021

Compat®