

# Compat<sup>®</sup> Flexibaggle<sup>®</sup>

## Contenedor Enteral Flexible de 1.5 L

El contenedor flexible de Compat<sup>®</sup> Flexibaggle<sup>®</sup> 1,5 L con conector ENPlus está destinado a la administración enteral de nutrientes o líquidos a los pacientes. Uso en combinación con sistemas de administración.

### Características Generales


El contenedor flexible Compat<sup>®</sup> Flexibaggle<sup>®</sup> de 1,5 L con conector ENPlus está diseñado para **ayudar a mejorar el cuidado del paciente**.

**Uso Sencillo:** El colgador incorporado y la amplia abertura de llenado superior permiten **rellenar fácilmente** la bolsa con nutrientes o agua, mientras que su capacidad de plegado **ahorra espacio de almacenamiento**.

**Uso Ambulatorio:** La bolsa **soporta caídas desde una altura de hasta 1,5 m** y, gracias a su diseño con tapón de cierre fácil, basta con un cuarto de vuelta para **garantizar un cierre seguro**, lo que permite utilizar el producto también durante desplazamientos con un riesgo de fuga bajo.

**Seguridad del Paciente:** El contenedor Compat<sup>®</sup> Flexibaggle<sup>®</sup> de 1,5 L incluye un conector ENPlus fabricado de conformidad con la norma ISO 18250-3. El conector ENPlus está diseñado para ser incompatible con la administración IV, con el objetivo de **incrementar la seguridad del paciente** impidiendo errores de conexión accidentales. El contenedor Compat<sup>®</sup> Flexibaggle<sup>®</sup> de 1,5 L está fabricado en etilvinilacetato (EVA), un material suave e inocuo para los alimentos. Es **estéril y está libre de DEHP, BPA y látex\***.

**Respetuoso con el Medio Ambiente:** El contenedor Compat<sup>®</sup> Flexibaggle<sup>®</sup> de 1,5 L es flexible **lo que reduce el impacto medioambiental** del transporte.

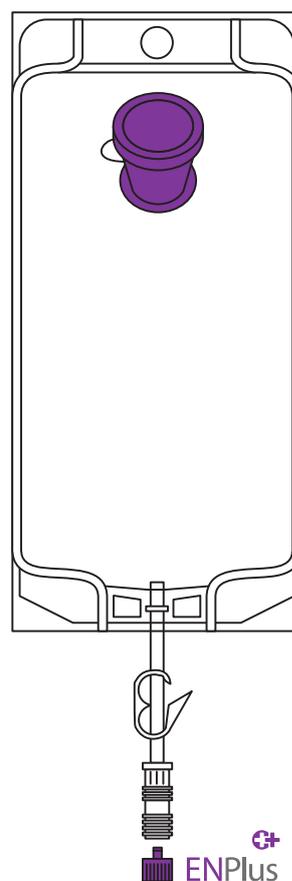


### Información de Pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Compat <sup>®</sup> Flexibaggle <sup>®</sup> 1,5 L	12306162	30

*El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.*

# Contenedor Enteral Flexible de 1,5 L

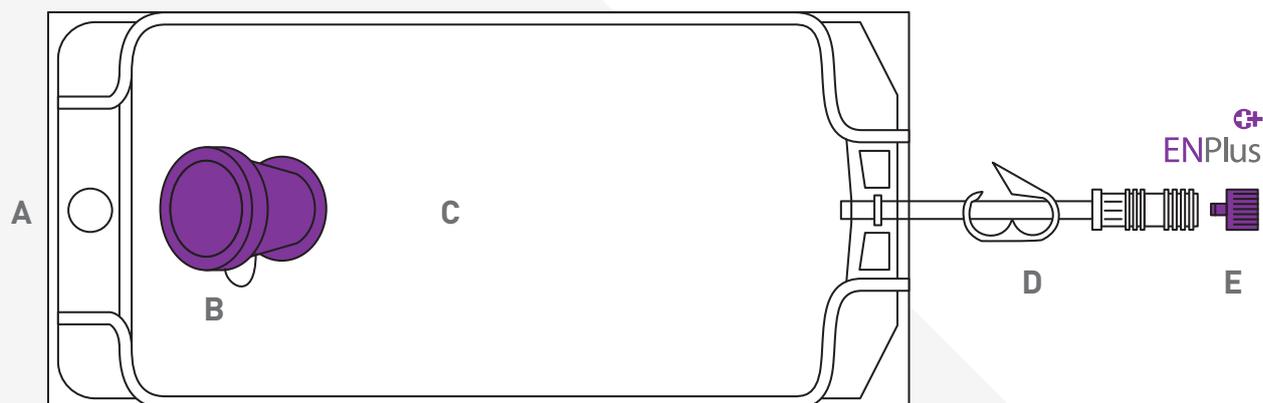

## Componentes

- A Colgador incorporado
- B Amplia abertura de llenado superior con tapón de rosca seguro
- C Contenedor de 1,5 l con graduaciones (a los 50 ml y cada 100 ml) y etiquetas para el nombre del paciente y otra información importante (fórmula, volumen, fecha y velocidad)
- D Abrazadera de pinza
- E Conector ENPlus exclusivamente para uso enteral con tapón

## Especificaciones Técnicas

<b>Abertura de boca ancha:</b>	Diámetro interno nominal: $\pm 36$ mm.
<b>Tamaño de la bolsa:</b>	Tamaño nominal máx. de la bolsa: $\pm 326 \times 190$ mm.
<b>Estéril:</b>	Esterilizado con óxido de etileno (EO).
<b>Embalaje:</b>	Embalado individualmente en cajas de 30 unidades (58,5 x 38,5 x 16 cm).
<b>Almacenaje:</b>	Almacenar a temperatura ambiente, alejado de la luz solar.
<b>Período de validez:</b>	Hasta 3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
<b>Duración de uso:</b>	24 horas. Un solo uso.
<b>Norma ISO:</b>	Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 18250-3.
<b>Marca CE:</b>	Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
<b>Clasificación:</b>	Clase Is.
<b>Fabricante legal:</b>	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
<b>Sostenibilidad:</b>	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
<b>Materiales:</b>	Bolsa: EVA. conexiones: PVC. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
<b>País de origen:</b>	Fabricado en Italia.

\*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No está formulado con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI00032 REV.0 15 DE JUNIO DE 2021

# Compat®