

Compat[®] Flexibaggle[®]

Contenedor Enteral Flexible de 500 ml

El contenedor flexible Compat[®] Flexibaggle[®] de 500 ml con conector ENPlus está destinado a la administración enteral de nutrientes o líquidos a los pacientes. Uso en combinación con sistemas de administración.

Características Generales


El contenedor flexible Compat[®] Flexibaggle[®] de 500 ml con conector ENPlus está diseñado para **ayudar a mejorar el cuidado del paciente**.

Uso Sencillo: su base independiente y su abertura de boca ancha hacen que resulte muy **fácil de manipular** y **ayudan a evitar derrames accidentales**. Su capacidad de plegado **ahorra espacio de almacenamiento**.

Uso Ambulatorio: cada uno de las aberturas del contenedor Compat[®] Flexibaggle[®] de 500 ml cuenta con un firme cierre a rosca, que **contribuye a prevenir las pérdidas**, lo que lo hace ideal para el uso ambulatorio, por ejemplo, en combinación con la mochila Compat Ella[®].

Seguridad del Paciente: el contenedor Compat[®] Flexibaggle[®] de 500 ml incluye un conector ENPlus fabricado de conformidad con la norma ISO 18250-3. El conector ENPlus está diseñado para ser incompatible con la administración IV, con el objetivo de **incrementar la seguridad del paciente** impidiendo errores de conexión accidentales. Compat[®] Flexibaggle[®] está fabricado en polietileno, un material inocuo para los alimentos. Además, es **estéril** y está libre de DEHP, BPA y látex*.

Respetuoso con el Medio Ambiente: El contenedor Compat[®] Flexibaggle[®] de 500 ml es flexible, **lo que reduce el impacto medioambiental** del transporte.

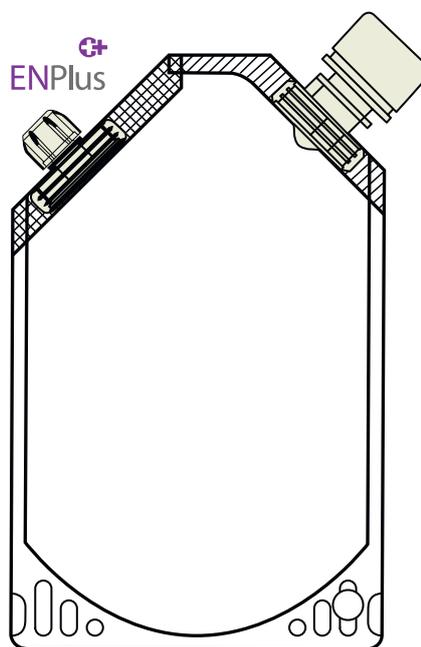


Información de Pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Compat [®] Flexibaggle [®] 500 ml	12440917	30

El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.

Contenedor Enteral Flexible de 500 ml

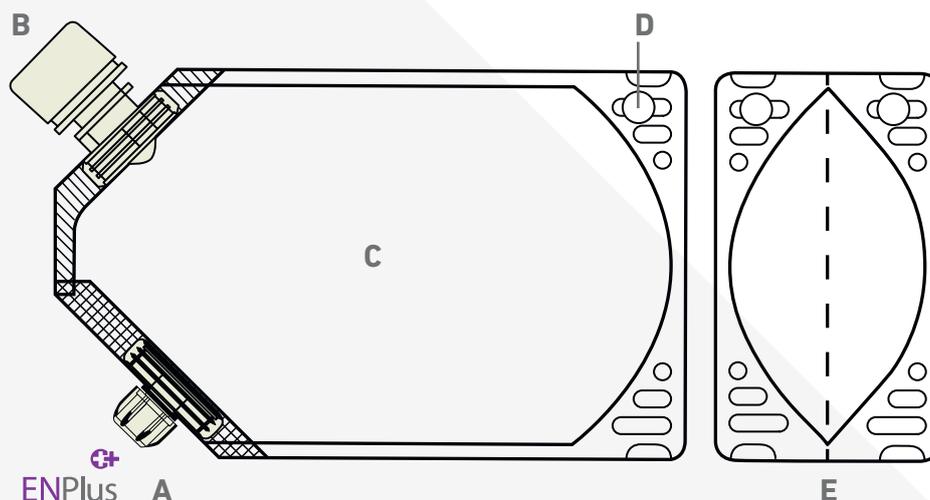

Componentes

- A** Conector ENPlus exclusivamente para uso enteral con cierre a rosca y tapón
- B** Abertura de llenado de boca ancha con cierre a rosca
- C** Contenedor Flexibaggle® de 500 ml con graduaciones (a los 250 ml y 500 ml) y etiquetas para el nombre del paciente y otra información importante (fórmula, volumen, fecha y velocidad)
- D** Colgador incorporado
- E** Base plegable de la bolsa vista desde abajo

Especificaciones Técnicas

Abertura de boca ancha:	Diámetro interno nominal: $\pm 21,5$ mm.
Tamaño de la bolsa:	Tamaño nominal máx. de la bolsa: $\pm 130 \times 210$ mm.
Estéril:	Esterilizado con óxido de etileno (EO).
Embalaje:	Embalado individualmente en cajas de 30 unidades (29,5 x 25 x 17 cm).
Almacenaje:	Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado del sol y la humedad.
Período de validez:	3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
Duración de uso:	24 horas. Un solo uso.
Norma ISO:	Conector ENPlus fabricado de conformidad con la norma ISO 18250-3.
Marca CE:	Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
Clasificación:	Clase Is.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilidad:	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
Materiales:	Bolsa: PE (polietileno). Libre de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen:	Fabricado en Italia.

*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No está formulado con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com
* Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI00033 REV.0 15 DE JUNIO DE 2021

Compat®