

# Compat ella®

## Compat Ella® Rucksackeinsatz/Tischständer

Der Compat Ella® Rucksackeinsatz/Tischständer ist eine praktische Unterstützung mit Doppelfunktion für Pumpe und Nahrungsergänzung und kann entweder in Kombination mit dem Compat Ella® Rucksack einfach für unterwegs oder als alleinstehender Nachttischständer genutzt werden.

### ◆ Funktionen auf einen Blick

#### Praktische Doppelfunktion:


- Nachttischständer: Klein, tragbar, **praktisch und mit Niedrigprofil**.
- Rucksackeinsatz: Einfache Übertragung in den Compat Ella® Rucksack **für eine mobile Nutzung** ohne Funktionsunterbrechung des Sets.
- Der erweiterbare Nahrungsbehälter und die verstellbaren Gurte ermöglichen die Kompatibilität mit den meisten Sondennahrungsbehältern bis zu 1500 ml.
- Einfacher zu transportieren als ein traditioneller Infusionsständer.

#### Intelligentes Design:

- **Einfacher Zugriff auf alle** eventuell Pumpenfunktionen wenn eingesetzt.
- Pumpe bleibt an AC-Netz anschließbar.
- Schutz und sichere Halterung der Compat Ella® Pumpe.
- „**Knickfreies**“ **Schlauch-Handhabungsdesign** mit versenkten Schlauchführungen.
- 4 Fußpolster aus Kautschuk **verbessern die Stabilität** und reduzieren Schwingungen.

#### Robust und Modern:

- Hergestellt aus **haltbarem Polycarbonat**.
- **Diskretes** weißes Finish mit abgerundetem, geschwungenem Design.

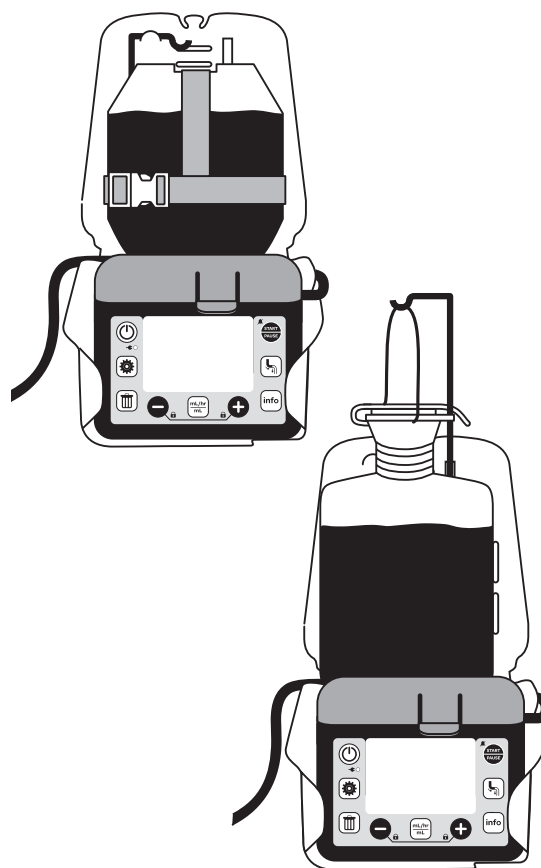


### ◆ Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat Ella® Rucksackeinsatz/Tischständer	12277737	1

*Kennen Sie schon Compat Ella®?*

# Compat Ella® Rucksackeinsetz/Tischständer

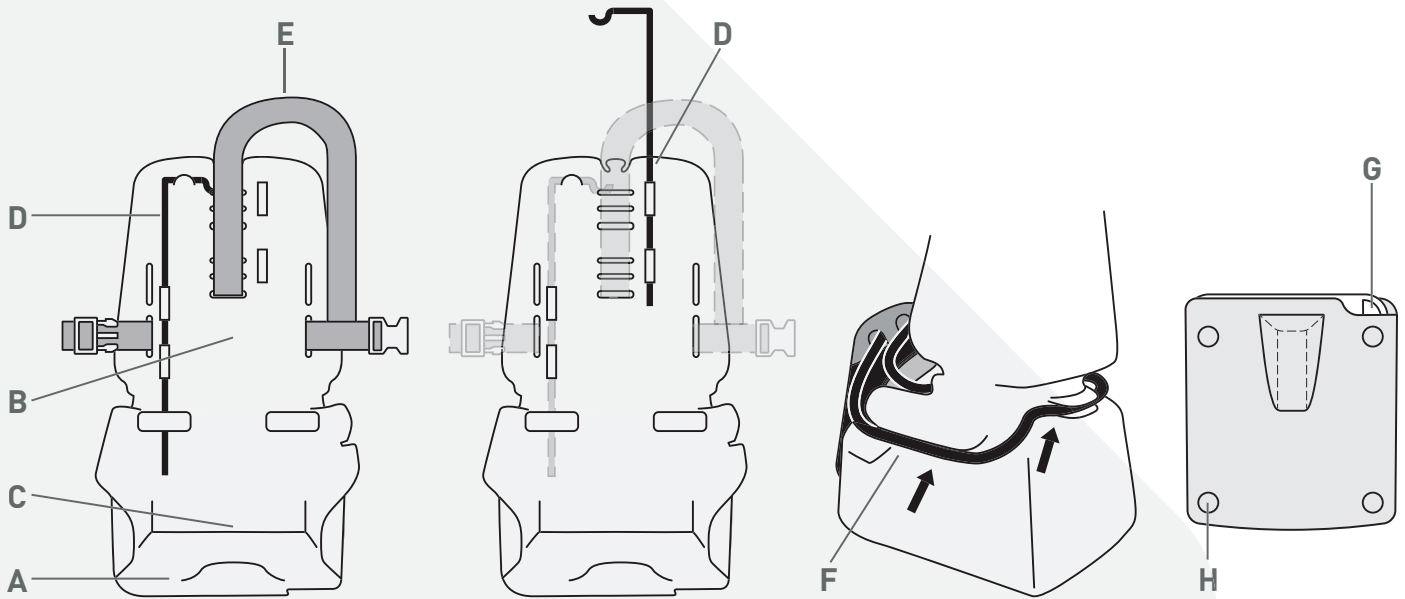

## Komponenten

- A Pumpenfach
- B Nahrungsfach
- C Aufbewahrungsfach für AC-Netzadapter (wenn nicht an AC-Netzteil angeschlossen)
- D Einzigartige abnehmbare und einstellbare Edelstahlstange
- E Abnehmbarer und einstellbarer Gurt für Nahrungsbehälter
- F „Knickfreies“ Schlauch-Handhabungsdesign mit versenkten Schlauchführungen
- G Versenktes Design für AC-Netzadapter-Pumpenanschluss
- H Fußpolster aus Kautschuk

## Technische Daten

- Verpackung:** Einzeln verpackt in Kartons zu je 1 Stück (17,5 × 30 × 17,5 cm).
- Lagerung:** Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- CE-Kennzeichnung:** Entspricht der europäischen Medizinprodukteverordnung 2017/745.
- Klassifizierung:** Klasse I.
- Rechtmäßiger Hersteller:** Axiom MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Schweiz.
- Reinigung:** Handwäsche.
- Materialien:** Einsatz: Polycarbonat. Stange: Edelstahl. Gurt: Polypropylen.
- Herkunftsland:** Hergestellt in China.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter [www.compat.com](http://www.compat.com)  
\*Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.  
Dieses Dokument ersetzt nicht die Original-Gebrauchsanweisung, die vor dem Gebrauch gelesen werden muss.

AXI00014 REV.2 29. MAI 2023

# Compat®