



Compat ella®

Accesorio para Mochila/Soporte de Mesa Compat Ella®

El accesorio para mochila/soporte de mesa Compat Ella® es un cómodo soporte para bomba y nutrición, diseñado para un doble uso: puede utilizarse para facilitar los desplazamientos junto con la mochila Compat Ella® o bien como soporte de mesa independiente.

Características Generales

Cómodo Doble Uso:


- Soporte de mesa independiente: Pequeño, portátil, cómodo y de perfil bajo.
- Accesorio para mochila: puede utilizarse de manera portátil con la mochila Compat Ella® sin necesidad de desconectar el sistema.
- Es compatible con la mayoría de contenedores de nutrición de hasta 1500 ml gracias a su soporte de nutrición extensible y sus correas ajustables.
- Es más fácil de trasladar que un portasueros tradicional.

Diseño Inteligente:

- Fácil acceso a todas las funciones de la bomba una vez instalada.
- Continúa siendo posible conectar la bomba a la alimentación de CA.
- Protege y sostiene la bomba Compat Ella® de forma segura.
- Guías incorporadas para mantener el sistema de administración sin dobleces.
- Las 4 almohadillas de goma en su base mejoran la estabilidad y reducen las vibraciones.

Robusto y Moderno:

- Fabricado en policarbonato de larga duración.
- Discreto acabado en color blanco con diseño curvo y redondeado.

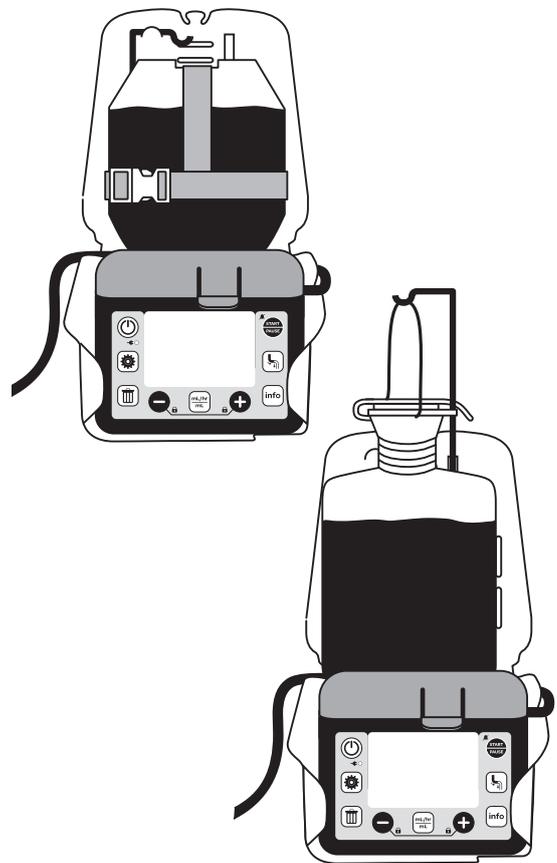


Información de Pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Accesorio para Mochila/Soporte de Mesa Compat Ella®	12277737	1

¿Conoces a Compat Ella®?

Accesorio para Mochila/Soporte de Mesa Compat Ella®

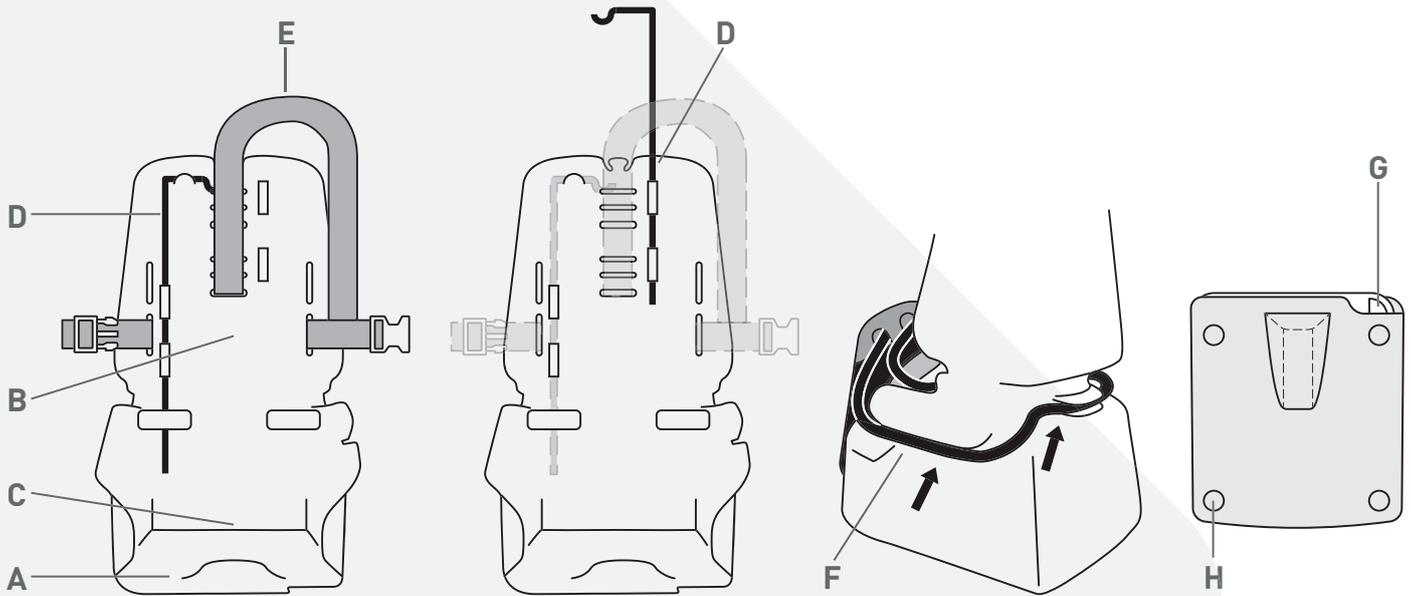

Componentes

- A Compartimento de la bomba
- B Compartimento de nutrición
- C Compartimento de almacenamiento para el adaptador de CA (cuando no esté conectado a la alimentación de CA)
- D Exclusiva barra de acero inoxidable ajustable y extraíble
- E Correa para contenedor de nutrición ajustable y extraíble
- F Guías incorporadas para mantener el sistema de administración sin dobleces
- G Diseño empotrado para conexión de la bomba con adaptador de CA
- H Almohadillas de goma en la base

Especificaciones Técnicas

- Embalaje: Embalado individualmente en cajas de 1 unidad (17,5 × 30 × 17,5 cm).
- Almacenaje: Mantener alejado de la luz solar.
- Marca CE: Cumple con el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios 2017/745.
- Clasificación: Clase I.
- Fabricante legal: Axiom MTEch S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Suiza.
- Limpieza: Lavar a mano con detergente suave.
- Materiales: Accesorio: policarbonato. barra: acero inoxidable. correa: polipropileno.
- País de origen: Fabricado en China.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com
*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.
Este documento no sustituye a las Instrucciones de Uso originales, que deben leerse antes de la utilización.

AXI00014 REV.2 05 DE DICIEMBRE DE 2022

Compat®