



Compat ella®

Statif de Table/Accessoire pour Sac à Dos Compat Ella®

Le Statif de Table/Accessoire pour Sac à Dos Compat Ella® est un support pratique deux en un pour la pompe et la nutrition. Pour utilisation avec le sac à dos Compat Ella® lors de déplacements ainsi que comme support de table autonome.

Aperçu des Caractéristiques

Accessoire Pratique Deux en Un :


- Statif de table : Petit, portable, **pratique et discret**.
- Accessoire de sac à dos : se glisse facilement dans le sac à dos Compat Ella® sans débrancher la tubulure, **pour une utilisation mobile**.
- Grâce à sa tige et à ses sangles ajustables, il est compatible avec la plupart des contenants de nutrition jusqu'à 1500 ml.
- Plus mobile qu'un statif traditionnel.

Une Conception Intelligente :

- **Accès facile** à toutes les fonctions de la pompe une fois installée.
- La pompe peut être en tout temps connectée à l'alimentation secteur.
- Protège et maintient la pompe Compat Ella®.
- Guide de tubulure encastré pour **éviter tout emmêlement** du tube.
- 4 patins en caoutchouc pour **une meilleure stabilité** et moins de vibrations.

Robuste et Moderne :

- Fabriqué en polycarbonate durable.
- Design discret avec finition blanche et bords arrondis.

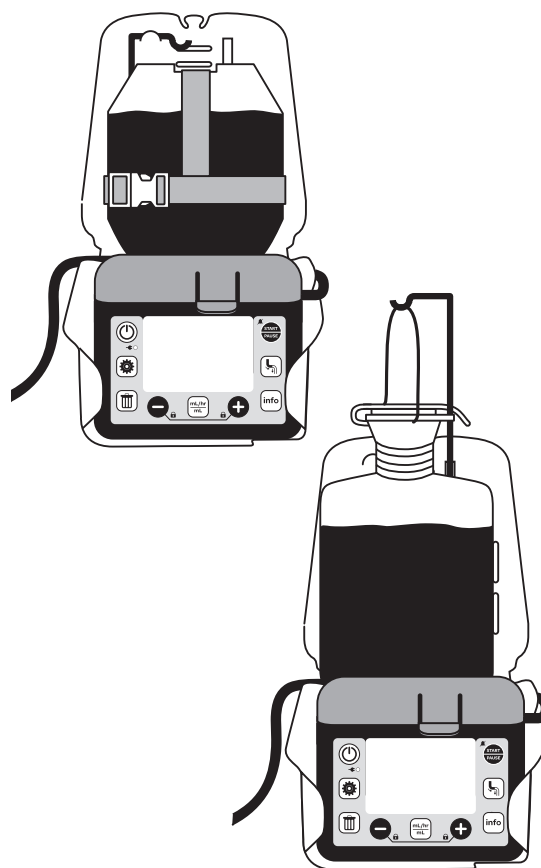


Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente/carton
Compat Ella® Statif de Table/Support de Sac à Dos	12277737	1

Connaissez-vous Compat Ella® ?

Statif de Table/Accessoire pour Sac à Dos Compat Ella®

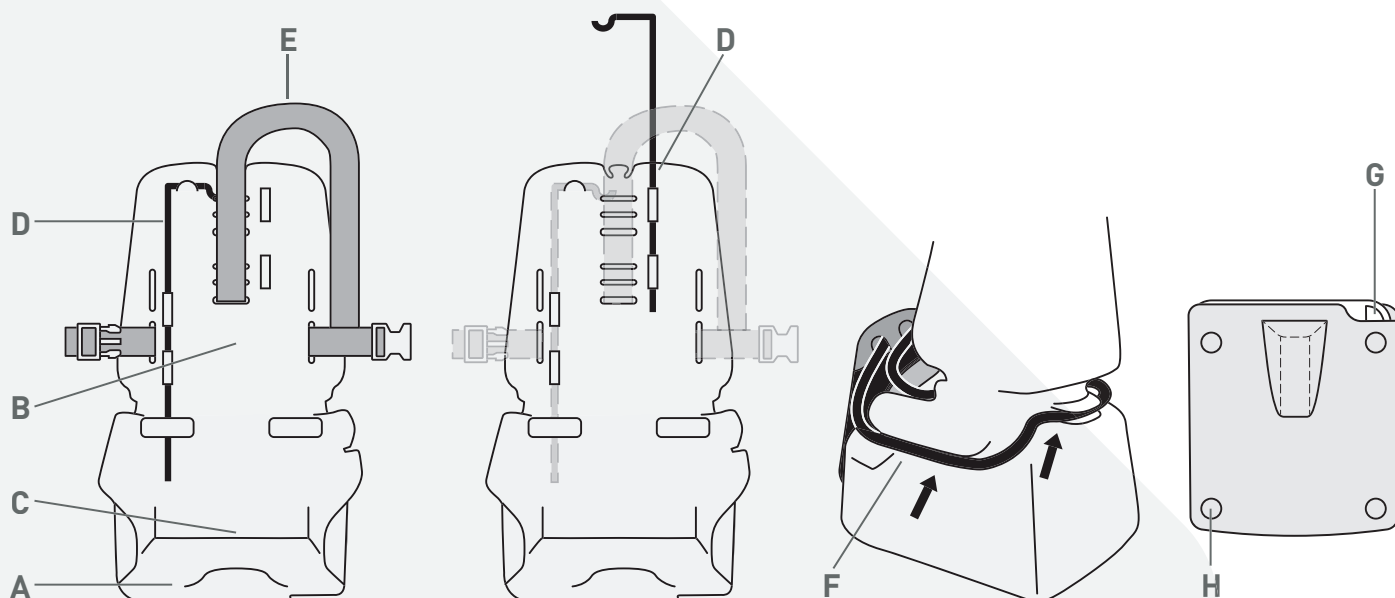

Composants

- A Compartiment pour la pompe
- B Compartiment pour la nutrition
- C Compartiment de rangement pour l'adaptateur secteur (lorsqu'il n'est pas relié au secteur)
- D Tige amovible et ajustable en acier inoxydable
- E Sangle amovible et ajustable pour le contenant de nutrition
- F Guide encastré pour éviter tout emmêlement de la tubulure
- G Passage pour l'adaptateur secteur lorsqu'il est connecté à la pompe
- H Patins en caoutchouc

Spécifications

- Emballage: Emballé individuellement en carton de 1 pièce (17,5 × 30 × 17,5 cm).
- Stockage: Tenir à l'abri des rayons du soleil.
- Marquage CE: Conforme au règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
- Classification: Classe I.
- Fabricant légal: Axiom MTEch S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Suisse.
- Nettoyage: Lavable à la main.
- Matériaux: Support: polycarbonate. Tige: acier inoxydable. Sangle: polypropylène.
- Pays d'origine: Fabriqué en Chine.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez www.compat.com
*Sauf mention contraire, toutes les marques sont utilisées avec permission.
Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation qui doit être lue avant emploi.

AXI00014 RÉV.3 05 DÉCEMBRE 2022

Compat®