

# Compat<sup>®</sup> Buddy

## Portfólio Completo de Extensores para Sonda de Alimentação por Gastrostomia de Baixo Perfil

Os extensores para sonda de alimentação por gastrostomia de baixo perfil Compat<sup>®</sup> Buddy são destinados à administração enteral de nutrição, fluidos e/ou medicamentos. São indicados para pacientes que requerem suporte nutricional e têm uma sonda de alimentação por gastrostomia de baixo perfil (button). Também adequados para decompressão gástrica passiva.

### Características Principais

#### Vários Tamanhos e Características:

- Conector com ângulo de 90° para alimentação contínua e conector reto para alimentação em bolo.
- 5, 30 e 60 cm para atender as múltiplas necessidades de pacientes e médicos.
- Porta dupla para facilitar a administração de medicamentos (opcional).
- Tampa de rosca e grampo de fechamento (opcional) para ajudar a evitar vazamento do fluido e facilitar o manuseio.

#### Compatibilidade:


- Os extensores Compat<sup>®</sup> Buddy são compatíveis com a sonda Compat<sup>®</sup> Buddy e com a maioria das outras sondas incluindo Mic-Key<sup>®</sup>, Aquarius<sup>™</sup>, MiniONE<sup>®</sup> e Freka<sup>®</sup> Belly.
- Compatíveis somente com conjuntos de administração e seringas com conector ENFit<sup>®</sup> para promover a segurança do paciente.

**Segurança do paciente:** Os conectores ENFit<sup>®</sup> são fabricados de acordo com a norma ISO 80369-3 e são projetados para serem incompatíveis com IV para promover a segurança do paciente ajudando a evitar conexões indevidas acidentais.

**Materiais seguros:** Isentos de DEHP, BPA e Látex\*.


### Informações para pedido

	Conector	Porta ENFit <sup>®</sup>	Comprimento (cm)	Código do Produto	Qtd./caixa
Extensores para Sonda de Alimentação por Gastrostomia de Baixo Perfil Compat <sup>®</sup> Buddy	Com ângulo de 90°	Dupla	5	12475125	10
	Com ângulo de 90°	Dupla	30	12475124	
	Com ângulo de 90°	Dupla	60	12474948	
	Com ângulo de 90°	Única	30	12475113	
	Com ângulo de 90°	Única	60	12474936	
	Reto	Única	30	12474949	
	Reto	Única	60	12474937	

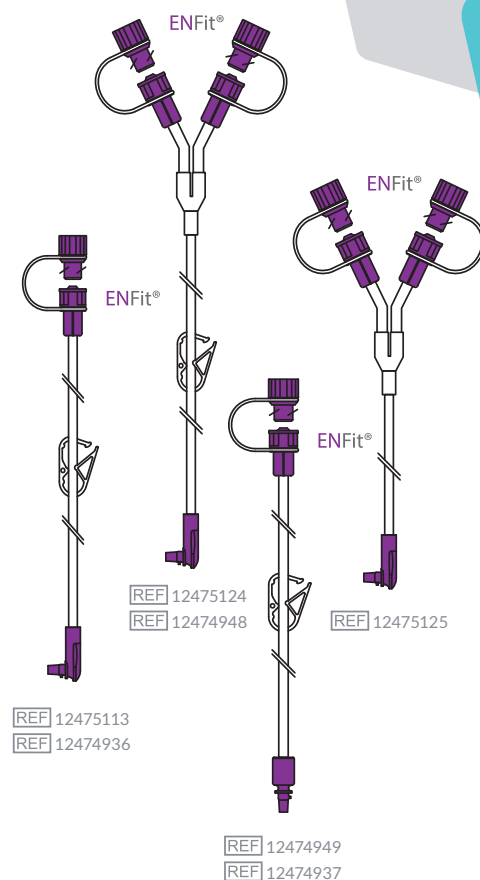

Cuidados com o paciente. Nossa prioridade.

# Portfólio Completo de Extensores para Sonda de Alimentação por Gastrostomia de Baixo Perfil

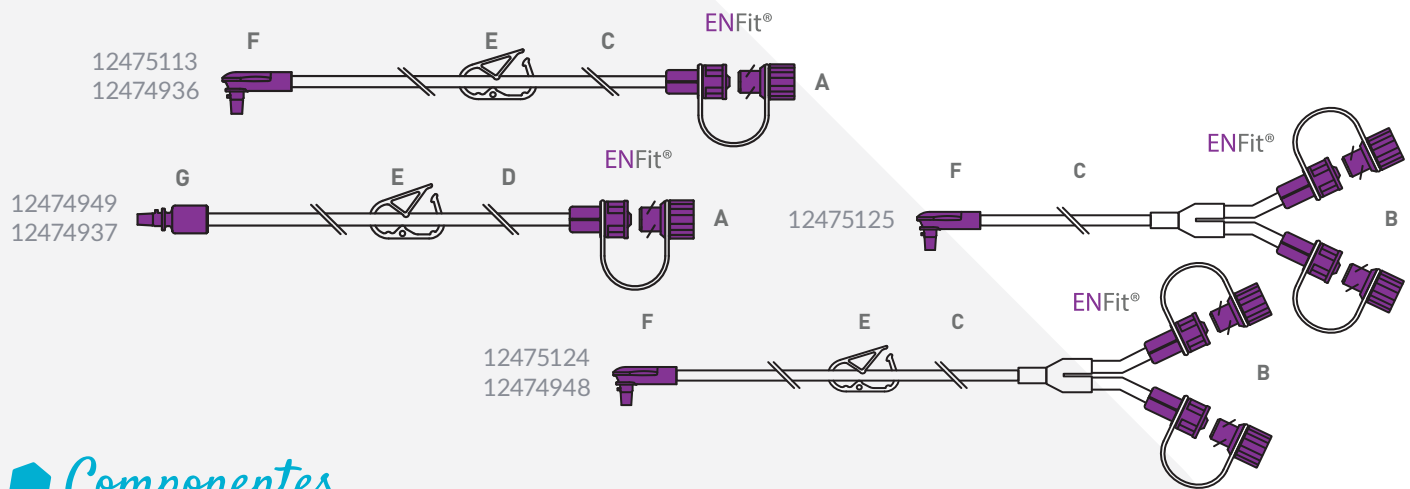

## Componentes

- A Porta de alimentação ENFit® com tampa rosqueável e alça
- B Porta de alimentação ENFit® dupla com tampa rosqueável e alça
- C Sonda de PVC padrão com 4,15 mm de diâmetro externo
- D Sonda de PVC de grande diâmetro com 5,4 mm de diâmetro externo
- E Grampo de fechamento
- F Conector com ângulo de 90°, com marcador de alinhamento (conexão da sonda no lado paciente)
- G Conector reto com marcador de alinhamento (conexão da sonda no lado paciente)

## Especificações

- Esterilização:** Esterilizados com Óxido de Etileno (EO).
- Embalagem:** Embalagem individual em um pacote de: 10 itens por caixa (19 x 19 x 10 cm). 24 caixas em um pacote de expedição (60 x 40 x 42 cm).
- Armazenamento:** Armazenar em local seco e temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar.
- Prazo de validade:** 3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
- Duração de utilização:** Até 7 dias e 5 utilizações por dia.
- Comprimento da sonda:** 5, 30 ou 60 cm.
- Diâmetro externo da sonda:** 4,15 mm (REF com conector com ângulo de 90°) ou 5,4 mm (REF com conector reto).
- Norma ISO:** Conector ENFit® fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3.
- Marca CE:** Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificação:** Classe IIa.
- Fabricante legal:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
- Sustentabilidade:** Sistema de gestão ambiental em conformidade com a norma ISO 14001:2015.
- Materiais:** Sonda: PVC. Conectores ENFit® e da sonda: copoliéster. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex\*. Informações adicionais a pedido.
- País de origem:** Fabricados na Itália.

\*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulados com látex de borracha natural. As marcas registradas ENFit® e Compat® são utilizadas com permissão. Mic-Key® é uma marca registrada da Halyard Health, Inc. ou de suas afiliadas. Freka® é uma marca registrada da Fresenius Kabi AG. MiniONE® é uma marca registrada da Applied Medical Technology, Inc. Aquarius™ é uma marca registrada da Degania Medical, Inc.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse [www.compat.com](http://www.compat.com)  
AXI00013 REV.0 23 DE FEVEREIRO DE 2021

# Compat®