

Compat[®] Buddy

Medidor de Estoma

O medidor de estoma Compat[®] Buddy é projetado para determinar a profundidade de um trato de estoma de gastrostomia bem posicionado, a fim de auxiliar na seleção do comprimento apropriado da sonda de alimentação Compat[®] Buddy.


Características Principais

O medidor de estoma Compat[®] Buddy é dotado de um tubo com escala graduada, um disco móvel e um balão de retenção para medir o comprimento do estoma.

Conforto do paciente: O medidor de estoma Compat[®] Buddy permite selecionar o comprimento apropriado da sonda de alimentação por gastrostomia Compat[®] Buddy para **ajudar a evitar o vazamento gástrico e a irritação da pele.**

Materiais seguros: O medidor de estoma Compat[®] Buddy é estéril e isento de DEHP, BPA e Látex*.

Um Portfólio para a Maioria das Necessidades: O medidor de estoma Compat[®] Buddy pertence a um portfólio completo de sondas de alimentação por gastrostomia e acessórios **projetados para atender a maioria das necessidades clínicas** de alimentação enteral a longo prazo.

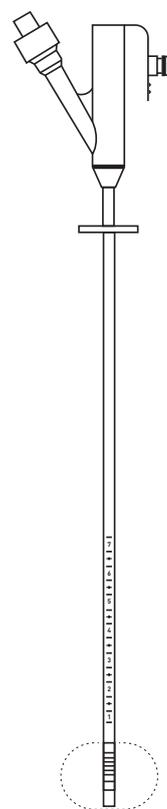

Informações para pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./caixa
Medidor de Estoma Compat [®] Buddy	12461149	2

Cuidados com o paciente. Nossa prioridade.

Medidor de Estoma



Componentes

- A Válvula de insuflação com conector Luer
- B Conector cônico com tampa de fechamento
- C Disco móvel
- D Tubo de 12FR com escala graduada a cada centímetro e marcadores a cada 0,25 cm
- E Balão de retenção de silicone de 5 ml

Especificações

- Esterilização:** Esterilizado com Óxido de Etileno (EO).
- Embalagem:** Embalagem individual em uma caixa de 2 itens.
- Armazenamento:** Armazenar na embalagem original em temperatura ambiente e local seco. Evitar a luz solar direta e a radiação térmica.
- Prazo de validade:** 3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
- Duração de utilização:** Para uso único.
- Tamanho:** 12 FR, 5 ml.
- Marca CE:** Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificação:** Classe I (estéril).
- Fabricante legal:** Degania Silicone Ltd.
- Materiais:** Silicone. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex*. Informações adicionais a pedido.

*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com
*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

AXI00333 REV.0, 23 DE FEVEREIRO DE 2021

Compat®