

# Compat ella®

## Equipo Compat Ella® Via Dupla

O equipo Compat Ella® Via Dupla é específico para a administração simultânea de nutrição e/ou hidratação enterais por meio de dois recipientes separados, e é adequado para uso com a bomba de nutrição Compat Ella®.

### Características Principais

O equipo Compat Ella® Via Dupla possui dois conectores de nutrição ENPlus permitindo **nutrição e/ou hidratação enterais simultâneas**, uma porta de medicação de 3 vias compatível com ENFit® e uma extremidade distal ENFit® (conexão da sonda do lado do paciente).


**Segurança Garantida:** O equipo Compat Ella® Via Dupla apresenta a tecnologia patenteada Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). Esta incorporada ao «sistema» e é sempre ativada automaticamente para **garantir a segurança do paciente**.

**Conectores mais Seguros:** O equipo Compat Ella® Via Dupla inclui conectores ENFit® fabricados de acordo com a norma ISO 80369-3 e dois conectores ENPlus fabricados de acordo com a norma ISO 18250-3. Os conectores ENFit® e ENPlus são projetados para serem incompatíveis com IV para **promover a segurança do paciente**, ajudando a evitar conexões indevidas acidentais.

**Materiais Seguros:** O equipo Compat Ella® Via Dupla é estéril e **isento de DEHP, BPA e Látex\***.

#### Compatibilidade:

- Recipientes de nutrição: ENPlus
- Sondas de nutrição enteral: ENFit®
- Seringas: ENFit®

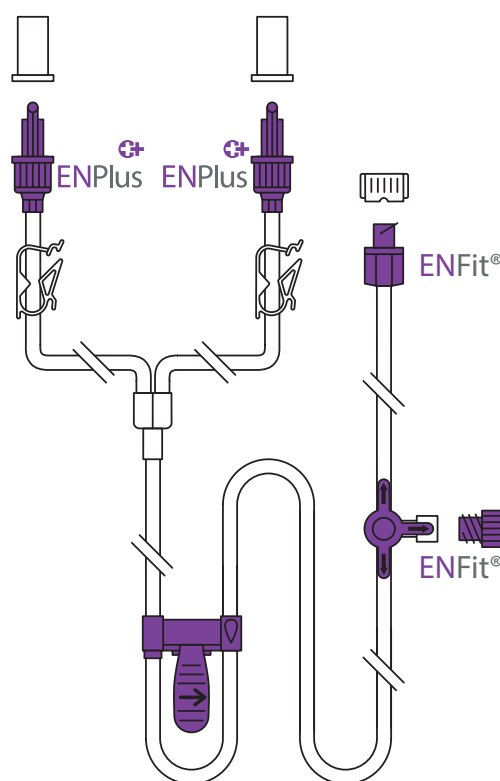


### Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Equipo Compat Ella® Via Dupla	12297288	30

Já conhece a Compat Ella®?

# Equipo Compat Ella® Via Dupla

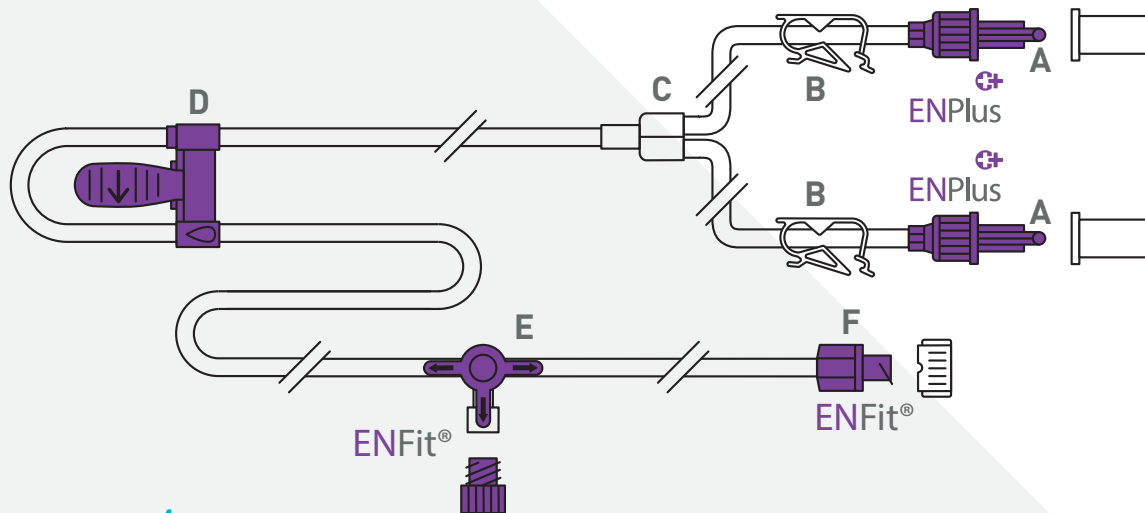

## Componentes

- A Conectores ENPlus 'apenas enteral' (conexão de nutrição) com fechamento giratório e tampa
- B Grampos de compressão para fechar manualmente o fluxo de fluidos
- C Conexão Y
- D Cassete para bomba Compat Ella® com sistema de segurança Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) patenteado e integrado
- E Porta de medicação de 3 vias compatível ENFit® com tampa
- F Extremidade distal ENFit® com tampa (conexão da sonda do lado do paciente)

## Especificações

- Esterilização:** Esterilizado com Óxido de Etileno (EO).
- Embalagem:** Embalado individualmente em caixas de 30 itens (29,5 × 26 × 19 cm).
- Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado da luz solar e da umidade.
- Prazo de validade:** 3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
- Duração de utilização:** 24 horas. Para uso único.
- Comprimento:** Distância da conexão de nutrição à conexão da sonda do lado do paciente: 230 cm.  
Distância da conexão de nutrição à conexão Y: 30 cm.  
Distância da conexão de nutrição à bomba: 50 cm.
- Diâmetros:** Diâmetro interno nominal: 3,0 mm. Diâmetro externo nominal: 4,15 mm.
- Norma ISO:** Conector ENFit® fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3 e conector ENPlus fabricado de acordo com a norma ISO 18250-3.
- Marca CE:** Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificação:** Classe IIa.
- Fabricante legal:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
- Sustentabilidade:** Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com a norma ISO 14001:2015.
- Materiais:** Sonda: PVC e silicone. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex\*.
- País de origem:** Fabricado na Itália.

\*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

AXI00010 REV.0 04 DE JULHO DE 2023

# Compat®