

# Compat® Flexibaggle®

## Recipiente Enteral Vazio Dobrável 1,5 L

O recipiente vazio dobrável Compat® Flexibaggle® 1,5 L com porta ENPlus é destinado à administração de nutrição e/ou fluidos enterais aos pacientes. Para uso junto com conjuntos de administração.

### Características Principais


O recipiente vazio dobrável Compat® Flexibaggle® 1,5 L com porta ENPlus foi projetado para **ajudar a melhorar o cuidado do paciente**.

**Facilidade de Uso:** A perfuração incorporada para encaixe no pedestal e a grande abertura de enchimento superior permitem **encher facilmente** o recipiente com nutrição ou água e a possibilidade de dobrar **economiza espaço de armazenamento** para que esteja facilmente à mão quando necessário.

**Uso Ambulatorial:** O recipiente **resiste a uma queda de até 1,5 m** e o design da tampa de fácil fechamento requer apenas um quarto de volta para **garantir a vedação segura**, permitindo o uso do produto também em movimento com baixo risco de vazamento.

**Segurança do Paciente:** Compat® Flexibaggle® 1,5 L inclui um conector ENPlus fabricado de acordo com a norma ISO 18250-3. O conector ENPlus é projetado para ser incompatível com IV para **promover a segurança do paciente**, ajudando a evitar conexões indevidas acidentais. Compat® Flexibaggle® 1,5 L é feito em Acetato de Vinil Etileno (EVA), um material macio e compatível com alimentos. É **estéril e isento de DEHP, BPA e látex\***.

**Ecológico:** Compat® Flexibaggle® 1,5 L é dobrável, **reduzindo o impacto ambiental**.

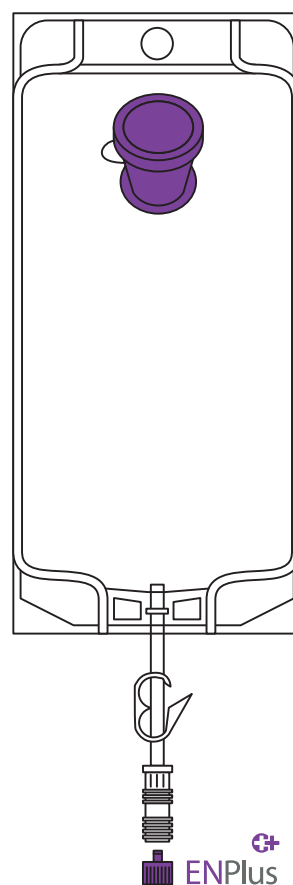


### Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Compat® Flexibaggle® 1,5 L	12306162	30

*Cuidados com o Paciente. Nossa Prioridade.*

# Recipiente Enteral Vazio Dobrável 1,5 L

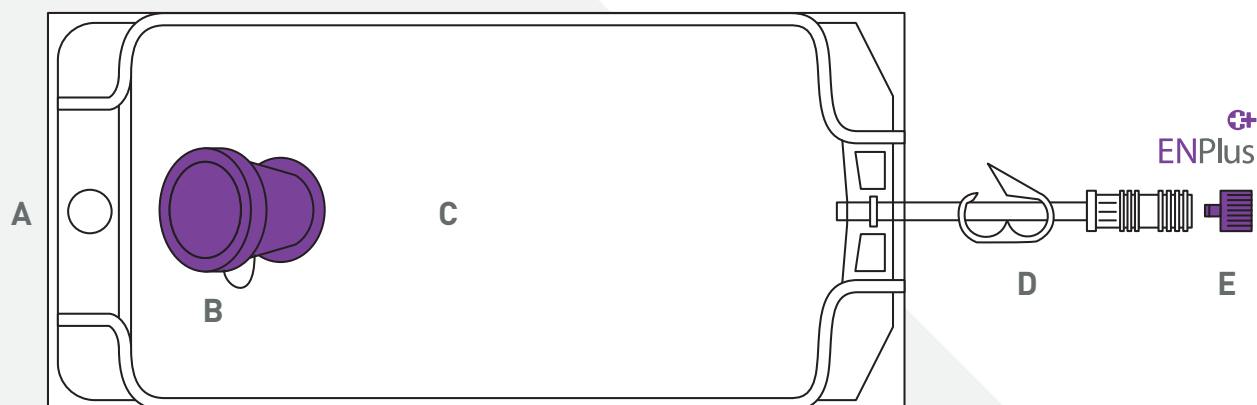

## Componentes

- A** Perfuração para encaixe no pedestal
- B** Grande abertura de enchimento superior com tampa de rosca de segurança
- C** Recipiente de 1,5 L com graduação (50 ml e a cada 100 ml) e etiquetas para o nome do paciente e outras informações importantes (fórmula, volume, data e fluxo)
- D** Grampos de compressão para fechar manualmente o fluxo de fluidos
- E** Porta de alimentação ENPlus 'apenas enteral' com tampa

## Especificações

- Porta com abertura larga:** Diâmetro interno nominal:  $\pm 36$  mm.
- Tamanho do recipiente:** Tamanho máximo nominal do recipiente:  $\pm 326 \times 190$  mm.
- Esterilização:** Esterilizado com Óxido de Etileno (EO).
- Embalagem:** Embalado individualmente em caixas de 30 itens ( $58,5 \times 38,5 \times 16$  cm).
- Armazenamento:** Armazenar em local seco e temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar.
- Prazo de validade:** Até 3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
- Duração de utilização:** 24 horas. Para uso único.
- Norma ISO:** Conector ENPlus fabricado de acordo com a norma ISO 18250-3.
- Marca CE:** Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificação:** Classe Is.
- Fabricante legal:** Cedec Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
- Sustentabilidade:** Sistema de gestão ambiental em conformidade com a norma ISO 14001:2015.
- Materiais:** Recipiente: EVA. Sonda: PVC. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex\*.
- País de origem:** Fabricado na Itália.

\*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

AXI00032 REV.0 04 DE JULHO DE 2023

# Compat®