

Compat® Flexibaggle®

Recipiente Enteral Vazio Dobrável 500 ml

O recipiente vazio dobrável Compat® Flexibaggle® 500 ml com porta ENPlus é destinado à administração de nutrição e/ou fluidos enterais aos pacientes. Para uso junto com conjuntos de administração.

Características Principais


O recipiente vazio dobrável Compat® Flexibaggle® 500 ml com porta ENPlus foi projetado para **ajudar a melhorar o cuidado do paciente**.

Facilidade de Uso: Suas características autoportantes e a porta com abertura larga facilitam o **manuseio** e **ajudam a evitar derramamentos acidentais**. A possibilidade de dobrar **economiza o espaço de armazenamento** para que esteja facilmente à mão quando necessário.

Uso Ambulatorial: Cada porta do Compat® Flexibaggle® 500 ml possui um fechamento de rosca resistente que **ajuda a evitar vazamentos**, tornando-o ideal para uso ambulatorial, por exemplo, junto com a mochila Compat Ella®.

Segurança do Paciente: Compat® Flexibaggle® 500 ml inclui um conector ENPlus fabricado de acordo com a norma ISO 18250-3. O conector ENPlus é projetado para ser incompatível com IV para **promover a segurança do paciente**, ajudando a evitar conexões indevidas acidentais. Compat® Flexibaggle® é feito em polietileno, um material compatível com alimentos. Também é **estéril e isento de DEHP, BPA e látex***.

Ecológico: Compat® Flexibaggle® 500 ml é dobrável, reduzindo o **impacto ambiental** da expedição.

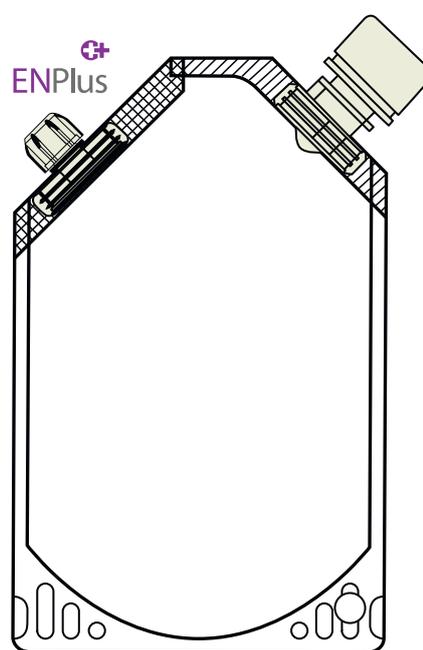


Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Compat® Flexibaggle® 500 ml	12440917	30

Cuidados com o Paciente. Nossa Prioridade.

Recipiente Enteral Vazio Dobrável 500 ml

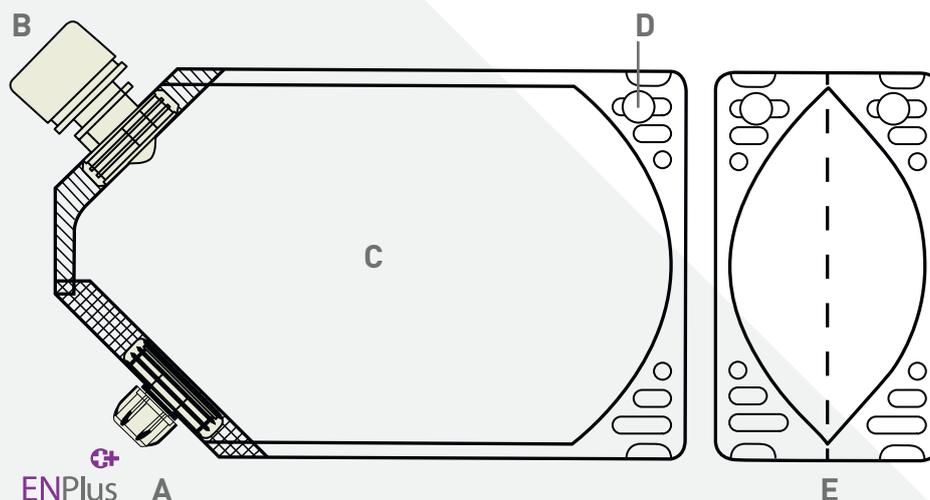

Componentes

- A Porta de alimentação ENPlus 'apenas enteral' com fechamento giratório e tampa
- B Porta de enchimento com abertura larga e tampa de rosca
- C Recipiente Flexibaggle® de 500 ml com graduação (250 ml e 500 ml) e etiquetas para o nome do paciente e outras informações importantes (fórmula, fluxo e data)
- D Perfuração para encaixe no pedestal
- E Base autoportante dobrável do recipiente vista debaixo

Especificações

Porta com abertura

larga: Diâmetro interno nominal: $\pm 21,5$ mm.

Tamanho do recipiente: Tamanho máximo nominal do recipiente: $\pm 130 \times 210$ mm.

Esterilização: Esterilizado com Óxido de Etileno (EO).

Embalagem: Embalado individualmente em caixas de 30 itens (apenas $29,5 \times 25 \times 17$ cm).

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado da luz solar e da umidade.

Prazo de validade: 3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.

Duração de utilização: 24 horas. Para uso único.

Norma ISO: Conector ENPlus fabricado de acordo com a norma ISO 18250-3.

Marca CE: Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).

Classificação: Classe Is.

Fabricante legal: Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.

Sustentabilidade: Sistema de gestão ambiental em conformidade com a norma ISO 14001:2015.

Materiais: Recipiente: PE (Polietileno). Isento de DEHP, BPA e látex*.

País de origem: Fabricado na Itália.

*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com
*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

AXI00033 REV.0 04 DE JULHO DE 2023