

Compat[®] Gastrotube

Portfólio Completo de Sondas de Alimentação por Gastrostomia com Balão de Silicone

As sondas de alimentação por gastrostomia com balão de silicone Compat[®] Gastrotube são destinadas para uso em pacientes que requerem administração enteral intermitente ou contínua de nutrição, fluidos ou medicamentos através de um trato de estoma bem posicionado. As sondas também podem ser usadas para descompressão gástrica.

Características Principais


As sondas Compat[®] Gastrotube estão disponíveis em uma variedade de tamanhos (12/14/16/18/20/22/24 FR) e volumes de balão (5, 10 e 15 cc) para atender a maioria das necessidades clínicas.

Conforto do Paciente:

- Balão de silicone durável para **promover a duração máxima de uso e limitar a substituição da sonda.**
- Fabricadas em silicone macio, transparente e biocompatível, tem uma extremidade rebaixada para ser **suaves na parede do estômago.**
- O disco de retenção de silicone com furos de arejamento e pés elevados permite a circulação de ar em redor do estoma, o que pode **reduzir a irritação da pele.**

Conveniência: As sondas Compat[®] Gastrotube têm uma porta de medicação ENFit[®] integrada para **simplificar a administração de medicamentos** e são embaladas individualmente em um blister estéril.

Segurança do Paciente: As sondas Compat[®] Gastrotube têm conectores ENFit[®] que são projetados para serem incompatíveis com IV para ajudar a **promover a segurança do paciente** e evitar conexões indevidas acidentais. Todas as sondas são isentas de DEHP, látex e BPA*.

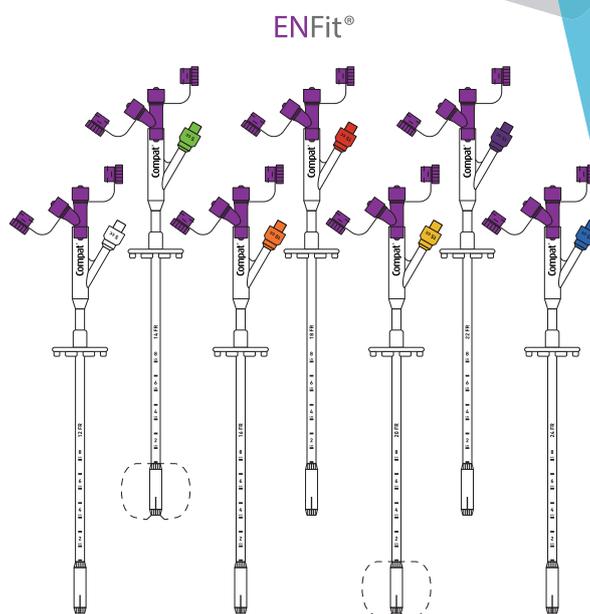


Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Cor da Válvula	Tamanho do Balão	Diâmetro Externo Nominal	Qtd.	Diâmetro Externo	Comprimento
Compat [®] Gastrotube 12 FR	12480167		5 cc	Ø 4,0	1	12 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 14 FR	12287616		5 cc	Ø 4,7	1	14 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 16 FR	12287746		10 cc	Ø 5,3	1	16 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 18 FR	12287607		15 cc	Ø 6,0	1	18 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 20 FR	12287606		15 cc	Ø 6,7	1	20 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 22 FR	12287605		15 cc	Ø 7,3	1	22 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 24 FR	12287604		15 cc	Ø 8,0	1	24 FR	± 255 mm

Cuidados com o Paciente. Nossa Prioridade.

Portfólio Completo de Sondas de Alimentação por Gastrostomia com Balão de Silicone

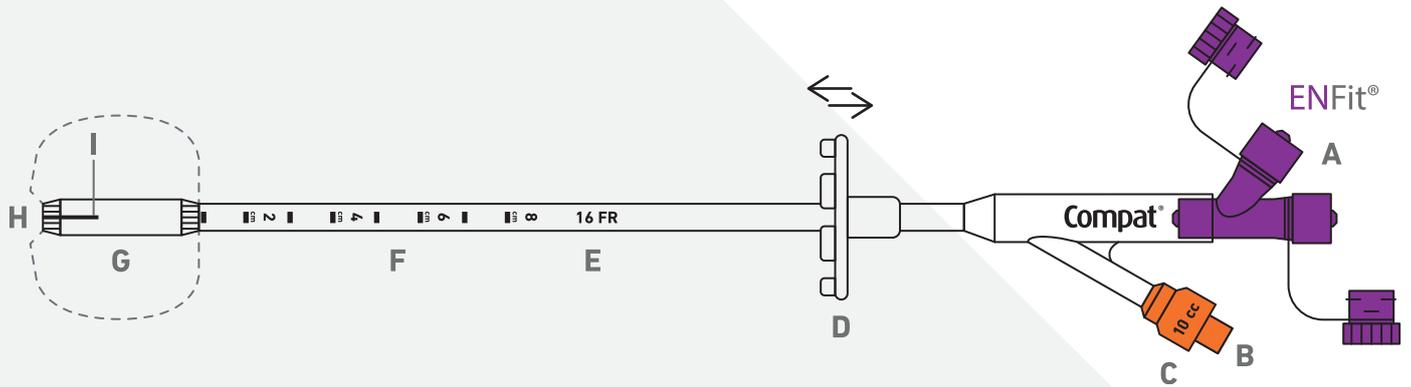

Componentes

- A Porta de alimentação ENFit® com porta de medicação integrada e tampas rosqueáveis
- B Válvula de insuflação com conector Luer
- C Tamanhos identificados por um código de cores e identificação do volume de insuflação do balão impresso
- D Disco de retenção de silicone ajustável com 37 mm de largura com furos de arejamento e pés elevados
- E Diâmetro externo (FR) impresso no tubo
- F Sonda de silicone macio, transparente e biocompatível com marcadores de profundidade de posicionamento a cada centímetro
- G Balão de silicone de alta resistência
- H Extremidade distal aberta e cônica (extremidade distal rebaixada quando insuflada)
- I Tira radiopaca para posicionamento e confirmação da posição

Especificações

Esterilização:	Esterilizadas com Óxido de Etileno (EO).
Embalagem:	Embaladas individualmente em caixa de 1 item (370 × 100 × 40 mm).
Armazenamento:	Armazenar na embalagem original em temperatura ambiente e local seco. Evitar a luz solar direta e a radiação térmica.
Prazo de validade:	5 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
Duração de utilização:	Indicadas para uso a longo prazo. Para uso único.
Comprimento da sonda:	Comprimento nominal total: ± 255 mm.
Diâmetros da sonda:	Diâmetro externo nominal: de 12 FR (± 4,0 mm) até 24 FR (± 8,0 mm).
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3.
Marca CE:	Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
Classificação:	Classe IIb.
Fabricante legal:	Degania Silicone Ltd.
Materiais:	Sonda: borracha de silicone. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex*.

*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formuladas com látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com

*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

Esse documento não substitui as Instruções de Uso originais que devem ser lidas antes do uso.

AXI00028 REV.1 22 DE NOVEMBRO DE 2022

Compat®