

Compat[®] Buddy

Gamma Completa di Set di Estensione per Sonde per Nutrizione Gastrostomica a Basso Profilo

I set di estensione per sonde per nutrizione gastrostomica a basso profilo Compat[®] Buddy sono ideati per la somministrazione di sostanze nutritive, fluidi o medicinali per via enterale e sono indicati per i pazienti provvisti di sonda per gastrostomia a basso profilo (bottone) che necessitano di un supporto nutrizionale. Adatti anche per la decompressione gastrica passiva.

Panoramica delle Caratteristiche

Varie dimensioni e Caratteristiche:

- Disponibili con connettore ad angolo retto e connettore dritto.
- Lunghezza di 5, 30 e 60 cm per soddisfare le più disparate esigenze di pazienti e medici.
- Porta doppia per facilitare la somministrazione dei medicinali (opzionale).
- Adattatore e regolatore di flusso di chiusura (opzionale) per evitare perdite di liquidi e agevolare la manipolazione.

Compatibilità:


- I set di estensione Compat[®] Buddy sono compatibili con il bottone Compat[®] Buddy e con la maggior parte degli altri bottoni, compresi Mic-Key[®], Aquarius[™], MiniONE[®] e Freka[®] Belly.
- Compatibili solo con set di somministrazione e siringhe dotati di connettore ENFit[®] al fine di tutelare la sicurezza del paziente.

Sicurezza del Paziente: I connettori ENFit[®] sono realizzati in conformità allo standard ISO 80369-3. Sono progettati per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di tutelare la sicurezza del paziente aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati.

Materiali Sicuri: privi di DEHP, BPA e lattice*.


Informazioni per Gli Ordini

	Connettore	Porta ENFit [®]	Lunghezza (cm)	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Set di estensione per sonde per nutrizione gastrostomica a basso profilo Compat [®] Buddy	Ad angolo retto	Doppia	5	12475125	10
	Ad angolo retto	Doppia	30	12475124	
	Ad angolo retto	Doppia	60	12474948	
	Ad angolo retto	Singola	30	12475113	
	Ad angolo retto	Singola	60	12474936	
	Dritto	Singola	30	12474949	
	Dritto	Singola	60	12474937	

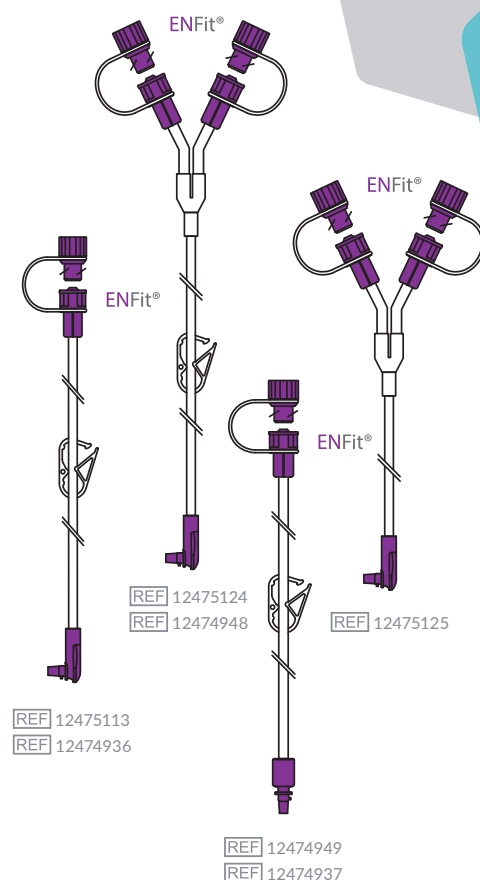

La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.

Gamma Completa di Set di Estensione per Sonde per Nutrizione Gastrostomica a Basso Profilo

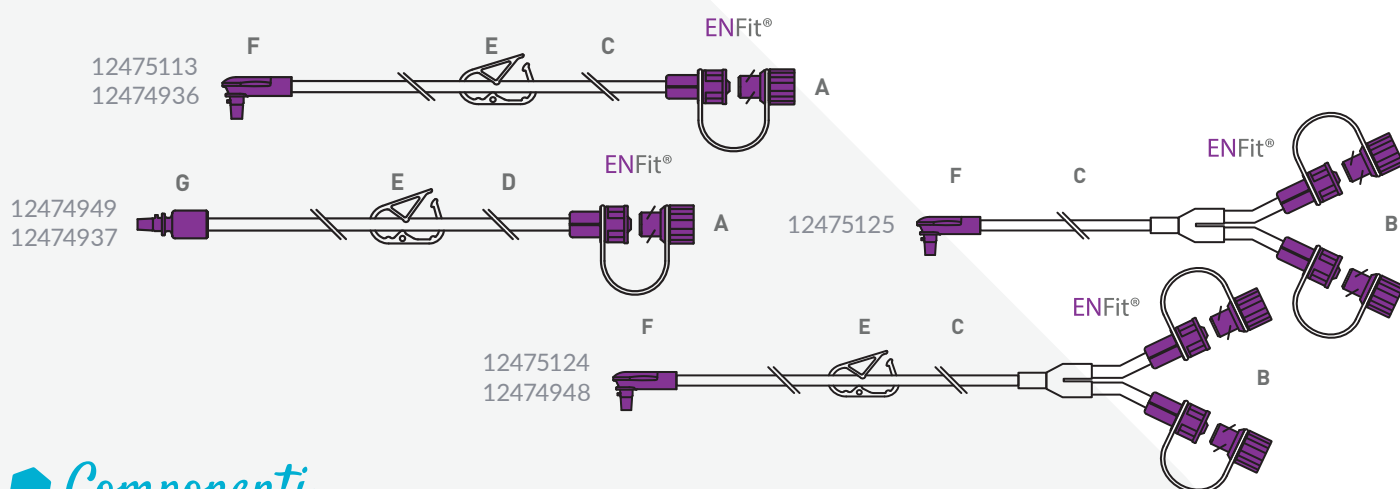

Componenti

- A** Porta per nutrizione ENFit® con chiusura a rotazione provvista di tappo con collare
- B** Porta per nutrizione ENFit® doppia con chiusura a rotazione provvista di tappo con collare
- C** Sonda in PVC standard con diametro esterno di 4,15 mm
- D** Sonda in PVC di grosso calibro con diametro esterno di 5,4 mm
- E** Regolatore di flusso di chiusura
- F** Connettore ad angolo retto con contrassegno di allineamento (collegamento sonda lato paziente)
- G** Connettore dritto con contrassegno di allineamento (collegamento sonda lato paziente)

Specifiche

Sterile:	Sterilizzati con ossido di etilene (EO).
Confezionamento:	Confezionati singolarmente in una confezione da: 10 pezzi per scatola (19 × 19 × 10 cm); 24 scatole in ogni confezione di spedizione (60 × 40 × 42 cm).
Conservazione:	Conservare all'asciutto, a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.
Durata:	3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego:	Fino a 7 giorni per un massimo di 5 utilizzi al giorno.
Lunghezza della sonda:	5, 30 o 60 cm.
Diametro esterno della sonda:	4,15 mm (REF con connettore ad angolo retto) o 5,4 mm (REF con connettore dritto).
Standard ISO:	Connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
Marchio CE:	Conformi alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
Classificazione:	Classe IIa.
Fabbricante legale:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilità:	Sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
Materiali:	Tubi in PVC. Connettori ENFit® e dei bottoni in copoliestere. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
Paese di origine:	Prodotto in Italia.

*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale. I marchi ENFit® e Compat® sono stati utilizzati previa autorizzazione. Mic-Key® è un marchio registrato di Halyard Health, Inc. o delle sue affiliate. Freka® è un marchio registrato di Fresenius Kabi AG. MiniONE® è un marchio registrato di Applied Medical Technology. Aquarius™ è un marchio registrato di Degania Medical, Inc.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com

AXI00469 REV.1 26 SETTEMBRE 2024

Compat®