

Compat[®] Buddy

Brett Utbud av Gastrostomiportar med Låg Profil, Förlängningsslangar

Förlängningsslangarna till Compat[®] Buddy gastrostomiport med låg profil är avsedda för administration av enteral näring, vätska och/eller läkemedel till patienter som kräver näringsstöd och som har en gastrostomiport med låg profil. Passar också för passiv gastrisk dekompression.

Egenskaper

Flera Storlekar och Egenskaper:


- Tillgängliga med vinklad koppling och rak koppling.
- 5, 30 och 60 cm för att uppfylla de flesta patientbehov.
- Dubbelport för att främja administration av läkemedel (valfri).
- Skruvlock och låsklämma (valfri) för att hindra vätske läckage och underlätta hantering.

Kompatibilitet:

- Compat[®] Buddy-förlängningsslang är kompatibel med Compat[®] Buddy-knappen och med de flesta andra knappar inklusive Mic-Key[®], Aquarius[™], MiniONE[®] och Freka[®] – Belly Button.
- Endast kompatibel med administreringsset och sprutor med ENFit[®]-koppling för att främja patientsäkerhet.

Patientsäkerhet: ENFit[®]-kopplingar är tillverkade i enlighet med ISO 80369-3. De är utformade för att vara IV-inkompatibla för att främja patientsäkerhet genom att hjälpa till med att undvika oavsiktliga felkopplingar.

Säkra Material: Fri från DEHP, BPA och latex*.

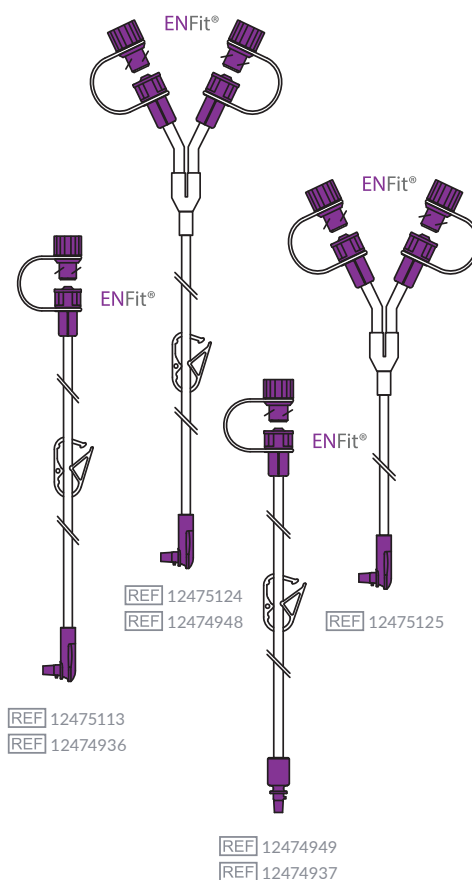


Beställningsinformation

	Koppling	ENFit [®] -port	Längd (cm)	Produktkod	Kvantitet/låda
Förlängningsslang till Compat [®] Buddy gastrostomimatningssond med låg profil	Högervinklad	Dubbel	5	12475125	10
	Högervinklad	Dubbel	30	12475124	
	Högervinklad	Dubbel	60	12474948	
	Högervinklad	Enkel	30	12475113	
	Högervinklad	Enkel	60	12474936	
	Rak	Enkel	30	12474949	
	Rak	Enkel	60	12474937	

Patientvård. Vår Prioritet.

Brett Utbud av Gastrostomiportar med Låg Profil, Förlängningsslangar

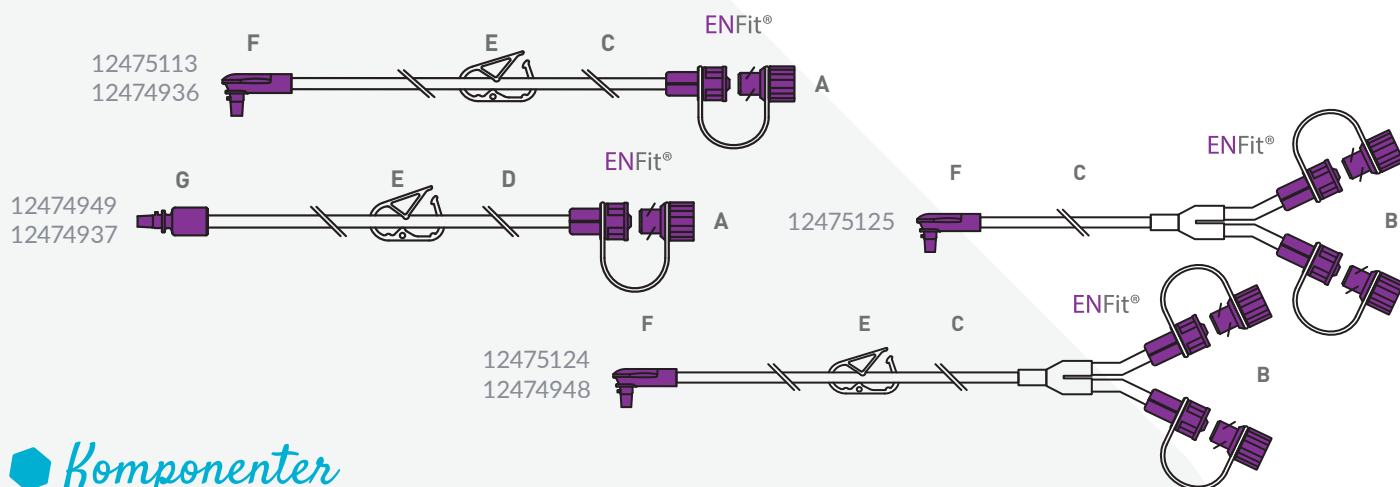

Komponenter

- A ENFit® matningsport med lock och förankring
- B Dubbel ENFit® matningsport med lock och förankring
- C Standard PVC-sond, yttre diameter 4,15 mm
- D PVC-sond med brett rör, yttre diameter 5,4 mm
- E Låsklämma
- F Högvinklad koppling med inriktningsmarkör (sondkoppling på patientsidan)
- G Rak koppling med inriktningsmarkör (sondkoppling på patientsidan)

Specifikationer

- Sterilitet:** Steriliserad med etylenoxid (EO).
- Förpackning:** Individuellt förpackad i lådor om:
 - 10 st per förpackning (19 × 19 × 10 cm).
 - 24 förpackningar i en transportlåda (60 × 40 × 42 cm).
- Förvaring:** Förvaras i rumstemperatur och skyddas mot solljus och fukt.
- Hållbarhetstid:** 3 år från tillverkningsdatumet. Utgångsdatumet på förpackningen.
- Användningstid:** Upp till sju dagar och fem användningar per dag.
- Sondlängd:** 5, 30 eller 60 cm.
- Yttre sonddiameter:** 4,15 mm (REF med högvinklad koppling) eller 5,4 mm (REF med rak koppling).
- ISO-standard:** ENFit®-kopplingar är tillverkade i enlighet med ISO 80369-3.
- CE-märke:** Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
- Klassificering:** Klass IIa.
- Juridisk tillverkare:** Cedec Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Hållbarhet:** Miljöhanteringssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
- Material:** Sond: PVC. ENFit® och knappkopplingar: Copolyester. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*. Ytterligare information kan begäras.
- Ursprungsland:** Tillverkad i Italien.

*DEHP och BPA är inte avsiktligt tillsatt under tillverkningsprocessen. Ej formulerad med naturgummilates.
ENFit® och Compat® är varumärken som används med tillstånd. Mic-Key® är ett registrerat varumärke tillhörande Halyard Health, Inc. eller dess dotterbolag.
Freka® är ett registrerat varumärke tillhörande Fresenius Kabi AG. MiniONE® är ett registrerat varumärke tillhörande Applied Medical Technology, Inc.
Aquarius™ är ett registrerat varumärke tillhörande Degania Medical, Inc.

För närmare information, kontakta din representant för Nestlé Health Science eller gå till www.compat.com
AXI00469 REV.1 26 SEPTEMBER 2024

Compat®