

Compat[®] Gastrotube

Gamme Complète de Sondes de Gastrostomie à Ballonnet en Silicone

Les sondes Compat[®] Gastrotube de gastrostomie à ballonnet sont destinées aux patients qui ont besoin d'une administration entérale intermittente ou continue de nutriments, de liquides ou de médicaments via une stomie bien établie. Elles conviennent également à la décompression gastrique.

Aperçu des Caractéristiques


Les sondes Compat[®] Gastrotube sont disponibles dans un large choix de tailles (12/14/16/18/20/22/24 FR) et de volumes de ballonnet (5, 10 et 15 cc) pour répondre à la plupart des besoins des patients.

Confort du Patient :

- Avec ballonnet en silicone haute résistance pour favoriser une durée d'utilisation maximale et limiter le remplacement de la sonde.
- En silicone souple transparent et biocompatible avec extrémité distale entièrement recouverte par le ballonnet pour préserver la paroi de l'estomac.
- Le disque de rétention en silicone avec orifices d'aération et pieds surélevés permet à l'air de circuler autour du site de la stomie pour réduire l'irritation de la peau.

Facilité d'Utilisation : Les sondes Compat[®] Gastrotube intègrent un port de médication ENFit[®] pour faciliter l'administration des médicaments et sont emballées individuellement dans un emballage stérile.

Sécurité du Patient : Les sondes Compat[®] Gastrotube comportent des connecteurs ENFit[®] conçus pour être incompatibles IV afin de promouvoir la sécurité du patient en évitant les erreurs de connexion. Toutes les sondes sont exemptes de DEHP, de BPA et de latex*.

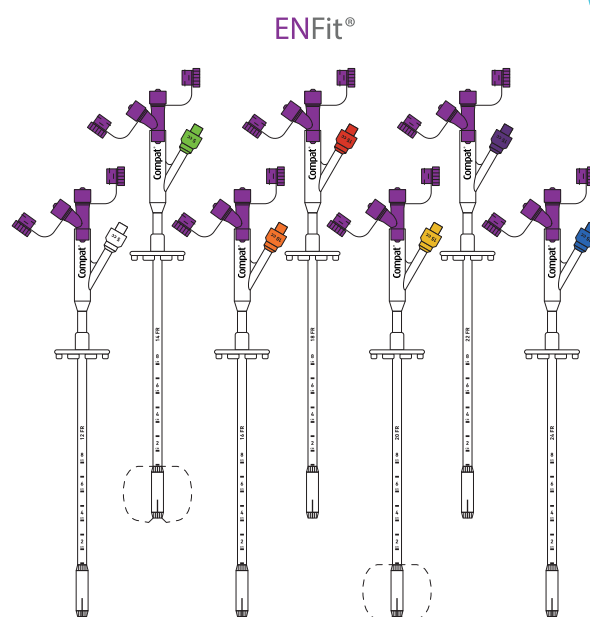


Informations de Commande

Description	Référence	Couleur de la valve	Taille du ballonnet	Taille extérieure nominale	Qté	Taille	Longueur
Compat [®] Gastrotube 12 FR	12480167		5 cc	Ø 4.0	1	12 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 14 FR	12287616		5 cc	Ø 4.7	1	14 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 16 FR	12287746		10 cc	Ø 5.3	1	16 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 18 FR	12287607		15 cc	Ø 6.0	1	18 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 20 FR	12287606		15 cc	Ø 6.7	1	20 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 22 FR	12287605		15 cc	Ø 7.3	1	22 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 24 FR	12287604		15 cc	Ø 8.0	1	24 FR	± 255 mm

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Gamme Complète de Sondes de Gastrostomie à Ballonnet en Silicone

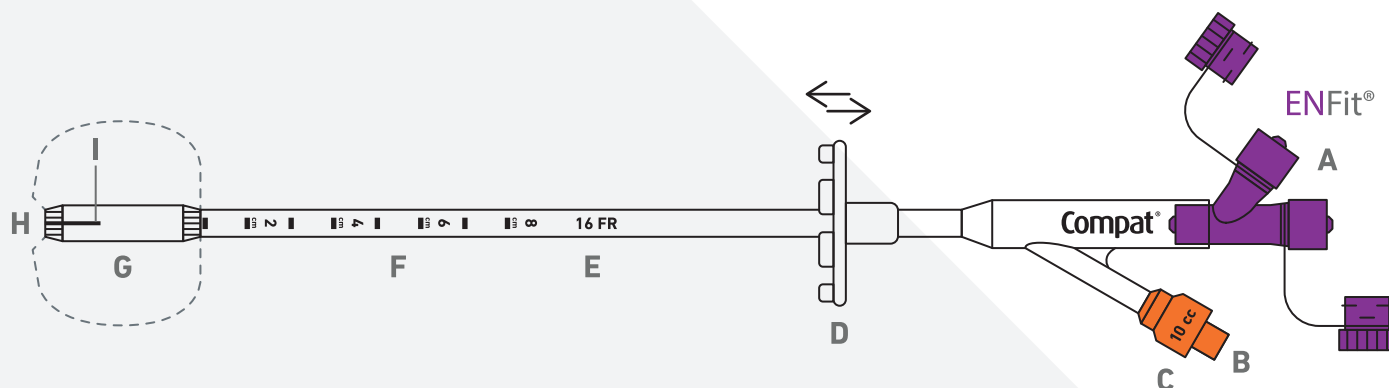

Composants

- A Port de nutrition ENFit® avec port de médication intégré et bouchons à vis
- B Valve de gonflage avec connecteur Luer
- C Taille identifiée avec code couleur et indication du volume du ballonnet
- D Disque de rétention en silicone ajustable de 37 mm de largeur avec orifices d'aération et pieds surélevés
- E Identification de la taille en charrière (FR: French) sur le tube
- F Sonde en silicone souple transparente biocompatible avec repères d'insertion tous les centimètres
- G Ballonnet en silicone haute résistance
- H Extrémité distale arrondie et perméable (extrémité distale en retrait lorsque gonflée)
- I Repère radio-opaque pour le placement et le contrôle de la position

Spécifications

Stérile:	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
Emballage:	Emballé individuellement en carton de 1 pièce (370 × 100 × 40 mm).
Stockage:	Stocker à température ambiante. Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Durée de conservation:	5 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation:	Indiqué pour une utilisation à long terme. À usage unique.
Longueur de tube:	Longueur nominale totale: ± 255 mm.
Diamètre du tube:	Diamètre extérieur nominal: de 12 FR (± 4,0 mm) à 24 FR (± 8,0 mm).
Norme ISO:	Raccord ENFit® fabriqué selon la norme ISO 80369-3.
Marquage CE:	Conforme à la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été attribuée par un organisme notifié agréé: TÜV SÜD (CE0123).
Classification:	Classe IIb.
Fabricant légal:	Degania Silicone Ltd.
Matériaux:	Silicone. Exempt de DEHP, de BPA et de latex*. Informations supplémentaires sur demande.

*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué médicale Compat® ou visitez www.compat.com

*Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales sont utilisées avec permission.
Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation qui doit être lue avant emploi.

AXI00028 RÉV.2 22 NOVEMBRE 2022

Compat®