

Compat[®] ENject

Enteral-Spritzen mit ENFit[®]-Anschluss

Compat[®] ENject Enteral-Spritzen mit ENFit[®]-Anschluss sind für die Verwendung mit ENFit[®]-Medizinprodukten für den enteralen Zugang geeignet.

Merkmale auf einen Blick

Die Compat[®] ENject-Spritzen haben einen transparenten Körper mit Graduierung, einen violetten Kolben, einen ENFit[®]-Anschluss und eine Kappe.

Die Vorteile: Compat[®] ENject-Spritzen sind in 8 Größen von 1 ml bis 100 ml erhältlich. Spritzen mit Low Dose Tip (LDT) sind in den Größen 1 ml, 2,5-3 ml und 5 ml erhältlich. Der Kolben lässt sich leicht im Spritzenkörper bewegen, und der schlanke Spritzenkörper erleichtert die Handhabung. Die Kappe ermöglicht es dem Anwender, Nahrung oder Medikamente im Voraus zuzubereiten und verhindert das Auslaufen der Spritze.


Sicherheit für den Patienten: Compat[®] ENject-Spritzen verfügen über leicht ablesbare Volumenmarkierungen, die eine präzise Verabreichung von Flüssigkeiten erleichtern. LDT-Spritzen verfügen über einen ENFit[®]-Anschluss mit geringem Leerraum, der eine genaue Dosierung bei der Verabreichung kleiner Medikamentenmengen gewährleistet. Alle Compat[®] ENject-Spritzen sind mit ENFit[®]-Anschlüssen ausgestattet, die nicht mit intravenösen Anschlüssen kompatibel sind, um die Patientensicherheit zu erhöhen und versehentliche Fehlanlüsse zu vermeiden.

Sichere Materialien: Compat[®] ENject-Spritzen sind steril und frei von DEHP, BPA und Latex¹.

Kompatibilität:

Enterale Ernährungssonden: ENFit[®]

Zugänge für die Verabreichung von Medikamenten: ENFit[®]

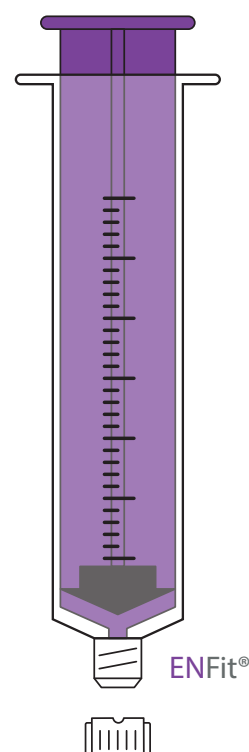


Bestellinformationen

Beschreibung	Artikelnummer	Einheiten pro Packung
Compat [®] ENject Enteralspritze 1 ml, Low Dose Tip	P00103	100
Compat [®] ENject Enteralspritze 2,5-3 ml, Low Dose Tip	P00104	100
Compat [®] ENject Enteralspritze 5 ml, Low Dose Tip	P00105	100
Compat [®] ENject Enteralspritze 10 ml	P00106	100
Compat [®] ENject Enteralspritze 20 ml	P00107	50
Compat [®] ENject Enteralspritze 30 ml	P00198	50
Compat [®] ENject Enteralspritze 50-60 ml	P00108	30
Compat [®] ENject Enteralspritze 100 ml	P00199	30

Patientenversorgung ist unsere Priorität.

Enteral-Spritzen mit ENFit®-Anschluss

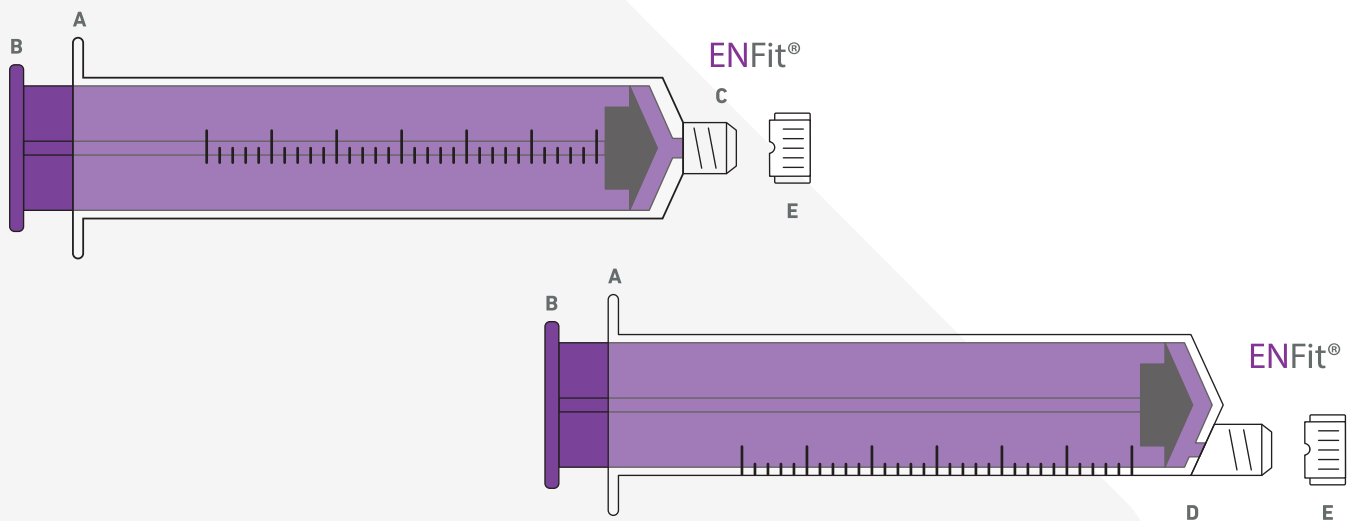

Komponenten

- A Transparenter Körper mit Graduiierung
- B Violetter Kolben
- C 1 ml bis 30 ml, 100 ml Spritzen: zentrischer ENFit®-Anschluss
- D 50-60 ml Spritze: exzentrischer ENFit®-Anschluss
- E ENFit® Kappe

Spezifikationen

- Sterilität:** Sterilisiert mit Ethylenoxid (EO).
- Verpackung:** Einzeln verpackt in Kartons von 30 bis 100 Stück.
- Lagerung:** Trocken, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt, lagern.
- Haltbarkeit:** 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
- Gebrauchsdauer:** Zum einmaligen Gebrauch.
- Erhältliche Größen:** Von 1 ml bis 100 ml. Siehe Tabelle auf Seite 1.
- ISO-Norm:** ENFit®-Anschluss gemäß ISO 80369-3.
- CE-Kennzeichnung:** Entspricht der europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Die CE-Kennzeichnung wurde von einer akkreditierten Prüfstelle ausgestellt: TÜV Rheinland (CE0197).
- Klassifizierung:** Klasse Is.
- Legal-Hersteller:** Jiangsu Micsafe Medical Technology Co., Ltd Xituan Industrial Park, Dafeng District, Yancheng, 224125, Jiangsu, China.
- EU-Vertreter:** Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro, Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf.
- Materialien:** Polypropylen. Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex¹. Weitere Details auf Anfrage.
- Ursprungsland:** Hergestellt in China.

¹DEHP und BPA werden während des Produktionsprozesses nicht absichtlich hinzugefügt. Enthält keinen Naturkautschuklatex.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Compat®-Vertreter oder besuchen Sie www.compat.com.

* Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.