

# Compat® ENject

## Seringues Entérales ENFit®

Les seringues entérales Compat® ENject avec embout ENFit® sont indiquées pour être utilisées avec les dispositifs médicaux de nutrition entérale ENFit®.

### Aperçu des Caractéristiques

Les seringues Compat® ENject sont fabriquées avec un corps transparent portant des marquages gradués et disposent d'un piston violet, d'un embout ENFit® et d'un capuchon.

**Facilité d'Utilisation:** Les seringues Compat® ENject sont disponibles en 8 tailles de 1 ml à 100 ml. Les seringues avec embout à faible dose « Low Dose Tip » (LDT) sont disponibles dans les tailles 1 ml, 2,5-3 ml et 5 ml. Le piston **glisse facilement dans le corps de la seringue** et le corps de la seringue **est mince pour faciliter la manipulation**. Le **capuchon** permet aux utilisateurs de **préparer les solutions nutritives ou les médicaments à l'avance** et évite toute fuite de la seringue.


**Sécurité des Patients:** Les marquages de volume des seringues Compat® ENject sont faciles à lire pour **rendre l'administration des fluides simple et précise**. Les seringues LDT sont dotées d'un embout ENFit® inversé à faible espace mort pour **aider à garantir un dosage précis** lors de l'administration de petits volumes de médicaments. Toutes les seringues Compat® ENject sont dotées d'embouts ENFit® conçus pour être incompatibles avec la voie veineuse afin **d'aider à assurer la sécurité des patients** et d'éviter les erreurs de connexion.

**Sécurité des Matériaux:** Les seringues Compat® ENject sont stériles, sans DEHP, sans BPA et sans latex\*.

#### Compatibilité:

Sondes d'alimentation entérale: ENFit®

Ports pour l'administration de médicaments: ENFit®

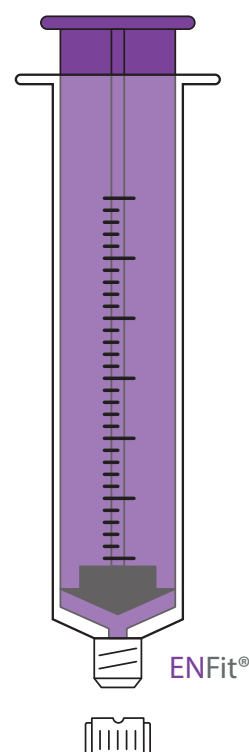


### Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente/carton
Seringue Entérale Compat® ENject 1 ml, Low Dose Tip	P00103	100
Seringue Entérale Compat® ENject 2,5-3 ml, Low Dose Tip	P00104	100
Seringue Entérale Compat® ENject 5 ml, Low Dose Tip	P00105	100
Seringue Entérale Compat® ENject 10 ml	P00106	100
Seringue Entérale Compat® ENject 20 ml	P00107	50
Seringue Entérale Compat® ENject 30 ml	P00198	50
Seringue Entérale Compat® ENject 50-60 ml	P00108	30
Seringue Entérale Compat® ENject 100 ml	P00199	30

*Les Soins aux Patients. Notre Priorité.*

# Seringues Entérales ENFit®

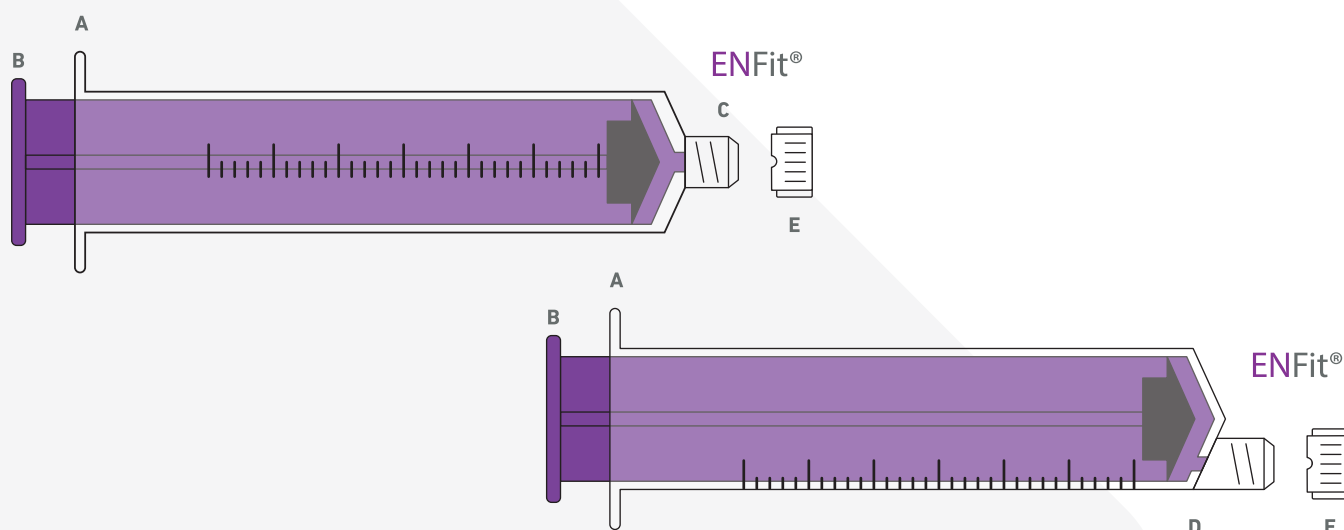

## Composants

- A Corps transparent gradué
- B Piston violet
- C Seringues 1 ml à 30 ml, 100 ml : embout ENFit® central
- D Seringues 50-60 ml : embout ENFit® excentrique
- E Capuchon ENFit®

## Caractéristiques

- Stérile :** Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (OE).
- Emballage :** Emballage individuel en boîtes de 30 à 100 pièces.
- Stockage :** Stocker dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri des rayons du soleil.
- Durée de conservation :** 5 ans à compter de la date de production.  
La date d'expiration est marquée sur l'emballage.
- Durée d'utilisation :** À usage unique.
- Tailles disponibles :** De 1 ml à 100 ml. Voir le tableau page 1.
- Norme ISO :** Embout ENFit® fabriqué conformément à la norme ISO 80369-3.
- Marquage CE :** Conforme à la Directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été délivrée par un Organisme notifié accrédité: TÜV Rheinland (CE0197).
- Classification :** Classe Is.
- Fabricant légal :** Jiangsu Micsafe Medical Technology Co., Ltd Xituan Industrial Park, Dafeng District, Yancheng, 224125, Jiangsu, Chine.
- Représentant CE :** Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro, Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, Allemagne.
- Matériaux :** Polypropylène. Exempt de DEHP, BPA et de latex\*. Informations supplémentaires sur demande.
- Pays d'origine :** Fabriqué en Chine.

\*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué(e) médical(e) Compat® ou visiter [www.compat.com](http://www.compat.com)

\* Sauf mention contraire, toutes les marques sont utilisées avec permission.