

# Compat® ENject

## Siringhe enterali con connettore ENFit®

Le siringhe enterali Compat® ENject con connettore ENFit® sono indicate per l'uso con dispositivi medici per accesso enterale dotati di connettore ENFit®.

### Panoramica delle caratteristiche

Le siringhe Compat® ENject sono costituite da un corpo trasparente graduato, uno stantuffo viola e un connettore ENFit® con tappo.

**Praticità:** le siringhe Compat® ENject sono disponibili in 8 misure, da 1 ml a 100 ml. Le siringhe con punta per dosi ridotte "LDT" sono disponibili nelle misure da 1 ml, 2,5-3 ml e 5 ml. Lo stantuffo scorre facilmente all'interno della siringa e la stessa è caratterizzata da un corpo sottile, che ne agevola la manipolazione. Il tappo consente agli utenti di preparare in anticipo la soluzione nutritiva o i medicinali e previene eventuali perdite dalla siringa.


**Sicurezza del paziente:** le siringhe Compat® ENject sono graduate con tacche ben visibili che indicano il volume per semplificare l'erogazione accurata dei liquidi. Le siringhe LDT sono provviste di un connettore ENFit® invertito con spazio morto ridotto che contribuisce a garantire un dosaggio accurato quando si somministrano volumi ridotti di medicinali. Tutte le siringhe Compat® ENject sono provviste di connettori ENFit® progettati per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di aiutare a promuovere la sicurezza del paziente ed evitare involontari collegamenti sbagliati.

**Materiali sicuri:** le siringhe Compat® ENject sono sterili e prive di DEHP, BPA e lattice<sup>1</sup>.

#### Compatibilità:

Sonde per nutrizione enterale: ENFit®

Porte per la somministrazione di medicinali: ENFit®

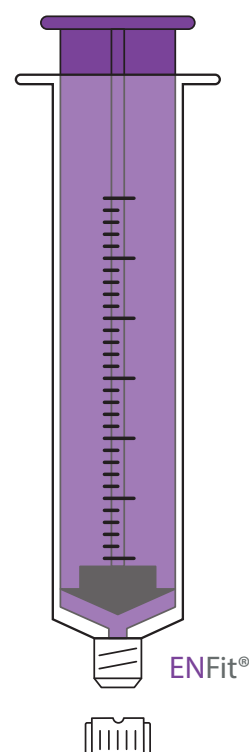


### Informazioni per gli ordini

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Siringa enterale Compat® ENject da 1 ml, punta LDT per dosi ridotte	P00103	100
Siringa enterale Compat® ENject da 2,5-3 ml, punta LDT per dosi ridotte	P00104	100
Siringa enterale Compat® ENject da 5 ml, punta LDT per dosi ridotte	P00105	100
Siringa enterale Compat® ENject da 10 ml	P00106	100
Siringa enterale Compat® ENject da 20 ml	P00107	50
Siringa enterale Compat® ENject da 30 ml	P00198	50
Siringa enterale Compat® ENject da 50-60 ml	P00108	30
Siringa enterale Compat® ENject da 100 ml	P00199	30

*La cura del paziente. La nostra priorità.*

# Siringhe enterali con connettore ENFit®

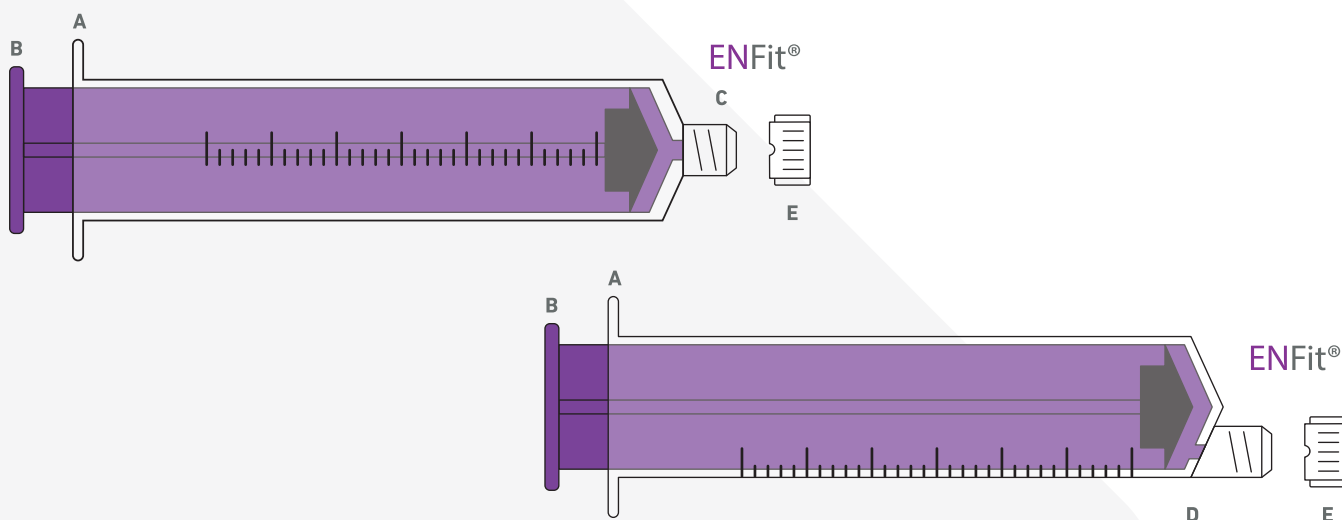

## Componenti

- A Corpo trasparente graduato
- B Stantuffo viola
- C Siringhe da 1 ml a 30 ml, 100 ml: connettore ENFit® centrato
- D Siringhe da 50-60 ml: connettore ENFit® eccentrico
- E Tappo ENFit®

## Specifiche

- Sterile:** sterilizzazione con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** confezionato singolarmente in confezioni da 30 a 100 pezzi.
- Conservazione:** conservare all'asciutto, a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.
- Durata:** 5 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** monouso.
- Misure disponibili:** da 1 ml a 100 ml. Vedere la tabella a pagina 1.
- Standard ISO:** connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
- Marchio CE:** conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV Rheinland (CE0197).
- Classificazione:** classe Is.
- Fabbricante legale:** Jiangsu Micsafe Medical Technology Co., Ltd Xituan Industrial Park, Dafeng District, Yancheng, 224125, Jiangsu, Cina.
- Rappresentante per la CE:** Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro, Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, Germania.
- Materiali:** polipropilene. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice<sup>1</sup>. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
- Paese di origine:** prodotto in Cina.

<sup>1</sup> Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Prodotto non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito [www.compat.com](http://www.compat.com)

<sup>®</sup> Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.